



**EN Explanation of symbols:** ① Read the instructions carefully before using this device. ② Do not use the pad folded or rucked. ③ Do not insert needles. ④ Not to be used by very young children (0 - 3 years).

**FR Description des symboles:** ① Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit. ② Ne pas utiliser le coussin plié ou chiffonné. ③ N'insérez pas d'aiguilles dedans. ④ Ce coussin ne convient pas aux enfants de 0 à 3 ans.

**ES Explicación de los símbolos:** ① Lea atentamente las instrucciones antes de usar este dispositivo. ② No utilice la almohadilla doblada o arrugada. ③ No inserte objetos punzantes. ④ No adecuado para niños de 0 - 3 años de edad.

**PT Explicação dos símbolos:** ① Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o dispositivo. ② Não utilize a almofada dobrada ou vincada. ③ Não introduzir agulhas. ④ Não adequado para crianças de 0 a 3 anos.

**PL Objaśnienie symboli:** ① Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. ② Nie korzystaj jeśli jest on złożony lub bardzo pognieciony. ③ Nie wbijać szpilek. ④ Bardzo małe dzieci (0-3 lat) nie powinny obsługiwać urządzenia.

**HU Jelmagyarázat:** ① Az eszköz használatá előt gondosan olvassa végig ezt az útmutatót! ② Hajtogatott vagy összegyűrt állapotban ne használja! ③ Ne szúrjon bele tűt! ④ 0 - 3 éves gyermekek ne használják!

**DE Zeichenerklärung:** ① Vor Verwendung Bedienungsanleitung genau studieren. ② Benutzen Sie das Kissen niemals in gefaltetem oder geknicktem Zustand. ③ Keine Nadeln anbringen. ④ Nicht geeignet für Kinder zwischen 0 - 3 Jahren.

**SV Förklaring av symboler:** ① Läs dessa instruktioner noga innan du använder instrumentet. ② Använd inte om vikta eller skrynkligt. ③ Stick inte in nålar. ④ Inte lämplig för barn mellan 0 - 3 år.

**FI Symbolien selitykset:** ① Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta. ② Älä käytä tynnyä taitettuna. ③ Älä kiinnitä laitteeseen neuloja tai hakaneuloja. ④ Ei saa käyttää 0 - 3-vuotiaiden lasten kanssa.

**TR Simge Tanımlaması:** ① Aygıtı kullanmadan önce, talimatları dikkatle okuyunuz. ② Padi katlanmış veya kırışmış şekilde kullanmayız. ③ Aygıtı iğne batırmayınız. ④ 0 - 3 yaş arası çocuklar için uygun değildir.

**GR Επεξήγηση συμβόλων:** ① Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή. ② Μην χρησιμοποιείτε το μαξιλάρι διπλωμένο ή τσαλακωμένο. ③ Μην εισάγετε βελόνες. ④ Ακατάλληλο για παιδιά μεταξύ 0 - 3 ετών.

**IT Spiegazione dei simboli:** ① Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso dell'apparecchio. ② Non utilizzare piegato o nella confezione. ③ Non bucare con spille o altri oggetti acuminati. ④ Non usare per bambini molto piccoli (0-3 anni).



Europe / Middle-East / Africa  
Microlife AG  
Espanstrasse 139  
9443 Widnau / Switzerland  
Tel. +41 / 71 727 70 30  
Fax +41 / 71 727 70 39  
Email admin@microlife.ch  
www.microlife.com

Asia  
Microlife Corporation  
9F, 431, RuiGang Road, NeiHu  
Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.  
Tel. +886 2 8797-1288  
Fax +886 2 8797-1283  
Email service@microlife.com.tw  
www.microlife.com

North / Central / South America  
Microlife USA, Inc.  
1617 Gulf to Bay Blvd., 2nd Floor Ste A  
Clearwater, FL 33755 / USA  
Tel. +1 727 442 5353  
Fax +1 727 442 5377  
Email msa@microlifeusa.com  
www.microlife.com

**DA Forklaring af symboler:** ① Læs instruktionerne omhyggeligt før brug af enheden. ② Brug ikke varmepuden foldet eller bøjet. ③ Stik ikke nåle i. ④ Ikke egnet til børn mellem 0 - 3 år.

**NL Uitleg van de symbolen:** ① Lees alvorens dit apparaat te gebruiken de instructies aandachtig door. ② Gebruik het warmtekussen niet als deze opgevouwen of verkreukeld is. ③ Steek er geen (veiligheids) naalden in. ④ Niet geschikt voor kinderen van 0 - 3 jaar.

**LT Simbolių reikšmė:** ① Prieš naudodamiesi prietaisu perskaitykite instrukciją. ② Nesinaudoti, jei šildyklys sulankstytas ar pažeistas. ③ Nebadykite adatomis. ④ Nenaudoti kūdikiams ir vaikams iki 3 m. amžiaus.

**LV Simbolu skaidrojums:** ① Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet instrukcijas. ② Nelietot sarītinātu vai salocītu sildītāju. ③ Nespraust adatas. ④ Nav paredzēts ļoti maziem bērniem (0-3 gadi).

**EE Sümbolite tähendused:** ① Enne seadme kasutust lugege hoolikalt juhiseid. ② Ärge kasutage soojenduskiti voltis või kortsus kujul. ③ Ärge kasutage nõelu. ④ Mitte kasutada väikelastel (0 - 3 aasta vanustel).

**BG Обяснение на символите:** ① Прочетете внимателно инструкциите, преди да ползвате този уред. ② Да не се прегъва и мачка при ползване. ③ Не вкарвайте игли. ④ Да не се използва от малки деца (0-3 години).

**RO Semnificația simbolurilor:** ① Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de a utiliza acest aparat. ② Nu utilizați perna împăturită sau mototolită. ③ Nu introduceți ace. ④ A nu se utiliza de către copii mici (0 - 3 ani).

**CZ Vysvětlení symbolů:** ① Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod. ② Nepoužívejte dečku pokud je přeložená nebo pomáčkaná. ③ Nevkládejte jehly. ④ Není vhodné pro děti od 0-3 let.

**SK Vysvetlenie značiek:** ① Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod. ② Podušku nepoužívajte zloženú alebo prehnutú. ③ Nevpchujte ihly. ④ Nie je vhodné pre deti od 0-3 rokov.

**SR Objašnjenje značenja simbola:** ① Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo. ② Ne koistite jastuče isključeno ili savijeno. ③ Ne ubadajte igle u jastuče. ④ Zabranjena upotreba kod dece mlađe od 3 godine.

**HR Pojašnjenje simbola:** ① Pažljivo pročitajte upute prije primjene ovog uređaja. ② Nemojte koristiti jastučić u namotanom ili naboranom stanju. ③ Ne umećite igle. ④ Nije prikladno za malu djecu (0-3 godine).

**AR تفسیر الرموز:** ① اقرأ التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز. ② لا تستخدمه وهو مطوي. ③ حافظ على الجهاز بعيدا عن الإبر والأدوات الحادة. ④ هذا الجهاز غير مناسب للأطفال الصغار (٣-٠ سنوات).

**FA شرح علايم:** ① قبل از استفاده از دستگاه، دستورالعملها را با دقت بخوانید. ② از دستگاه در حالت تا شده استفاده نکنید. ③ از فرو بردن سوزن در دستگاه خودداری کنید. ④ این دستگاه برای کودکان زیر ۳ سال طراحی نشده است.

IB FH 600 V25-1 40/14



Microlife Foot Warmer FH 600


<b>EN</b>	→	2	<b>NL</b>	→	24
<b>FR</b>	→	3	<b>LT</b>	→	26
<b>ES</b>	→	5	<b>LV</b>	→	27
<b>PT</b>	→	7	<b>EE</b>	→	28
<b>PL</b>	→	9	<b>BG</b>	→	29
<b>HU</b>	→	11	<b>RO</b>	→	31
<b>DE</b>	→	13	<b>CZ</b>	→	33
<b>SV</b>	→	15	<b>SK</b>	→	34
<b>FI</b>	→	16	<b>SR</b>	→	35
<b>TR</b>	→	17	<b>HR</b>	→	36
<b>GR</b>	→	19	<b>AR</b>	→	37
<b>IT</b>	→	21	<b>FA</b>	→	38
<b>DA</b>	→	23			



- Please read this manual carefully before using this device.
- This device is not intended for medical use in hospitals: For household use only.
- To avoid any risk of electric shock when using the pad please observe the following:
  - Do not use if wet. If the pad has become damp or wet, completely dry the pad before use.
  - Only use the pad in dry rooms, not e.g. in the bathroom.
  - Check that the pad is undamaged each time before use, i.e. do not use it if there is visible damage to the hand control, switches, plug or the pad itself.
  - Do not insert pins or other sharp objects.
- To avoid overheating:
  - Do not leave the pad switched on unsupervised; switch it off when you leave the room.
  - Do not use the pad while folded.
  - Avoid creasing the pad.
  - **Do not cover the hand control!** To ensure that the hand control functions correctly, do not place it on or under the heating pad or cover it with other objects.
  - The cable should not be wound around the hand control.
- Do not use on a person incapable of movement, a baby, a person insensitive to heat, or animals. Do not let children play with the device.
- Ensure that children do not use this device unsupervised. Children under 8 years of age must not use this device unless a parent or guardian has set the control to the lowest temperature setting 1.
- This device may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been instructed on how to use the device safely and have understood the resulting dangers.
- Excessive application at a high setting can result in skin burns.
- When the device is likely to be used for an extended period, i.e. by the user falling asleep, controls should be adjusted to a setting recommended for continuous use.
- Examine the device frequently for signs of wear or damage. If there are signs of wear or damage or the device has been misused, please contact the manufacturer or authorised agent prior to any further use.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorised agent or similarly qualified persons in order to avoid any hazards.
- Do not attempt to open or repair the device yourself. Special tools are required to re-assemble the device.
- This device emits very weak electrical and magnetic fields which may disturb the function of your cardiac pacemaker. Therefore, we recommend you to consult your physician and the manufacturer of your cardiac pacemaker before using this device.
- Allow the device to cool down before folding and storing it in a dry place. Do not place heavy objects on it to prevent buckling.

- ⚠ **Not suitable for children between 0-3 years!** Children under 3 years of age are unable to respond to overheating.
- ♻ Electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

## 1. How to use a Microlife foot warmer

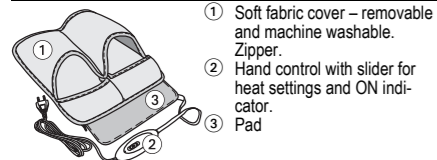

- ① Soft fabric cover – removable and machine washable. Zipper.
- ② Hand control with slider for heat settings and ON indicator.
- ③ Pad

- ⚠ **WARNING:** Never use the pad without the cloth cover. Allow some air circulation between the pad and skin during use.

- Do not use with shoes.
  - The device is not to be used for warming animals.
1. Put the cloth cover ① on a flat surface. Open the zipper.
  2. Insert the pad ③ completely into the cover, fitting one side at a time. Make sure the cable and hand control ② remain outside the cover.
  3. The pad will lie flat, filling the entire cover. Close zipper.
  4. Plug into a 220-240 volt AC mains socket and set the hand control to the desired heat setting using the slider.
    - Select the temperature setting on the slider – this switches on the heat pad. An indicator will illuminate, showing that the appliance is connected to the power supply and is switched on.
    - Setting 1 is recommended for continuous use.
    - The pad is switched off by moving the slider to the «0» position. The indicator light will then turn off.
  5. **The hand control will automatically turn off the heater after approximately 90 minutes**, however, the indicator light will remain illuminated. To reset the timer and start a further heating period, move the slider to the off «0» position and then back to the desired heat setting.
  6. Unplug when finished.

## 2. Cleaning Instructions

- ⚠ **WARNING:** Always unplug the power cable from the mains socket before undertaking any cleaning of the product.
1. The cover can be machine washed after removal from the pad according to the washing instructions given on the cover.
  2. The pad must **not** be machine washed or dry-cleaned. It can be cleaned with a brush when dry.
  3. Do not allow the hand control to get wet. Do not use any detergents or solvents as they may damage the device.
  4. Never hold the hand control under water. Otherwise moisture may enter the hand control and cause damage.
  5. Check the hand control for signs of damage. Dry the pad and its fabric cover completely before switching it on again.
- 👉 Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

## 3. Explanation of symbols

- |  |                          |  |                                 |
|--|--------------------------|--|---------------------------------|
|  | Wash at 40 °C!           |  | Do not iron!                    |
|  | Do not wash!             |  | Do not dry-clean!               |
|  | Bleaching not permitted! |  | Tumble-dry!                     |
|  | Iron at low temperature! |  | Do not dry in the tumble dryer! |

## 4. Guarantee

This product is guaranteed for **2 years** from the date of purchase. This guarantee covers the hand control, cable, and the pad itself. This guarantee does not cover incorrect use, accidents or damage resulting from failure to follow instructions, or modifications to the device not carried out by the manufacturer. **The guarantee is only valid upon presentation of the guarantee card completed by the dealer.**

## 5. Technical Specifications

**Model:** FH 600  
**Voltage:** 220 - 240 V

**Power:** 50 W  
**Frequency:** 50 Hz

Technical alterations reserved.

## 6. www.microlife.com

Detailed user information about our products and about our services can be found at [www.microlife.com](http://www.microlife.com).

FH 600

Name of Purchaser / Nom de l'acheteur / Nombre del comprador / Nome do comprador / Imię i nazwisko nabywcy / Vásárló neve / Name des Käufers / Inköparens namn / Ostajan nimi / Alicinin Adı / Ονοματεπώνυμο αγοραστή / Nome del rivenditore / Forhandlers navn / Naam koper / Pircēja vārds / Pirkėjo pavardė / Ostja nimi / Име на купувача / Numele cumpărătorului / Jméno kupujícího / Meno zákazníka / Ime i prezime kupca / Ime i prezime kupca / نام خریدار / اسم المشتري

Serial Number / Numéro de série / Número de serie / Número de série / Numer seryjny / Sorozatszám / Serien-Nr. / Seriennummer / Sarjanumero / Seri Numarası / Αριθμός σειράς / Numero di serie / Seriennummer / Seriennummer / Seriennummer / Sērijas numurs / Serijos numeris / Seeria-number / Серийный номер / Număr de serie / Výrobní číslo / Výrobné číslo / Serijski broj / Serijski broj / رقم التسلسل / شماره سریال

Date of Purchase / Date d'achat / Fecha de compra / Data da compra / Data zakupu / Vásárlás dátuma / Kaufdatum / Inköpsdatum / Ostöpäivämäärä / Satın Alma Tarihi / Ημερομηνία αγοράς / Data d'acquisto / Købsdato / Datum van aankoop / Iegādes datums / Pardavimo data / Ostukuupäev / Дата на закупване / Data cumpărării / Datum nákupe / Dátum kúpy / Datum kupovine / Datum kupovine / تاريخ خرید / تاريخ الشراء

Specialist Dealer / Revendeur / Distribuidor autorizado / Revendedor autorizado / Przedstawiciel / Forgalmazó / Fachhändler / Återförsäljare / Jälleenmyyjä / Uzman Satıcı / Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος / Categoria rivenditore / Specialforhandler / Specialist Dealer / Speciallists - pārstāvis / Pardavusi įstaiga / Ametlik müügiesindaja / Специалист дистрибутор / Distributor de specialitate / Specializovaný dealer / Špecializovaný predajca / Ovlašćeni diler / Ovlašćeni distributer / فروشنده متخصص / التاجر المختص

# Instructions importantes - à conserver!

FR

• **Veillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser ce produit.**

• **Ce produit ne se destine pas à une application médicale en milieu hospitalier. Il est réservé à un usage domestique.**

• **Pour éviter tout risque de choc électrique pendant l'emploi, veuillez prendre les précautions suivantes:**

- Évitez toute utilisation en cas d'humidité. Si le coussin est devenu humide, séchez-le bien avant de le mettre en œuvre.
- Utilisez le coussin seulement dans des locaux secs et aérés, ne l'utilisez pas dans une salle de bain, etc!
- Vérifiez l'état du coussin avant toute utilisation. Ne vous en servez pas si vous observez des défauts sur la commande manuelle, les interrupteurs, les connecteurs ou le coussin lui-même.
- N'y insérez pas d'épingle ni aucun autre objet pointu.

• **Pour éviter une surchauffe:**

- Ne laissez pas le coussin allumé sans surveillance. Mettez-le hors tension avant de quitter la pièce.
- N'utilisez pas le coussin plié.
- Évitez de froisser le coussin.
- **Ne recouvrez pas la commande manuelle!** Pour garantir un fonctionnement correct de la commande, ne pas la placer sur ou en dessous du coussin chauffant ou d'un autre objet. N'enroulez pas le câble autour de la commande manuelle.

• **N'appliquez pas le produit sur une personne incapable de bouger, insensible à la chaleur, sur un bébé ou sur des animaux.** Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit.

• **Ne laissez jamais les enfants utiliser le produit sans surveillance.** Les enfants en dessous de 8 ans ne doivent pas utiliser ce produit à moins qu'un adulte ait réglé sur la température la plus basse «1».

• Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ou par des personnes à mobilité réduite, ou en incapacité sensorielle ou mentale ou sans connaissances du produit dans le cas où ces derniers auraient été correctement renseignés sur l'utilisation du produit et les dangers inhérents possibles.

• **Une exposition excessive à une haute température peut provoquer des brûlures.**

• **Si le produit reste allumé longtemps, par exemple sur une personne qui s'endort, réglez-le sur un niveau adapté à une utilisation continue.**

• **Vérifiez fréquemment l'état du produit à la recherche de toute trace d'usure ou de dommage.** Si vous observez de tels signes sur le produit ou si celui-ci a été mal utilisé, adressez-vous au fabricant ou au représentant agréé avant de continuer à vous en servir.

• **Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son service après-vente ou des personnes ayant des qualifications similaires pour prévenir tout risque.**

• **N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer le produit vous-même.** Le réassemblage du produit nécessite des outils spéciaux.

• **Le produit émet de très faibles champs électriques et magnétiques qui pourraient perturber le bon fonctionnement de votre pacemaker.** Ainsi, nous vous recommandons de demander l'avis de votre médecin et du fabricant de votre pacemaker.

• **Laissez le produit refroidir avant de le plier et de le stocker dans un endroit sec.** Ne placez pas d'objets lourds sur le produit pour éviter le flambage.

⚠ **Ne convient pas à un enfant de 0 à 3 ans!** A ces âges les enfants sont incapables de réagir à la surchauffe.

🗑 Les appareils électroniques doivent être éliminés en conformité avec les prescriptions locales, séparément des ordures ménagères.

## 1. Utilisation d'un Microlife chauffe-pieds



- 1 Housse tissu – détachable et lavable en machine. Fermeture éclair.
- 2 Commande à curseur pour température avec témoin ON.
- 3 Coussin

⚠ **AVERTISSEMENT:** N'utilisez jamais le coussin chauffant sans la housse de tissu.

Veillez à ce que de l'air puisse circuler entre le coussin chauffant et la peau pendant le fonctionnement.

Ne l'utilisez pas en portant des chaussures.

Cet appareil ne doit pas être utilisé pour réchauffer les animaux.

1. Posez la housse en tissu ① sur une surface plane. Ouvrez la fermeture éclair.
2. Introduisez le coussin ③ complètement dans la housse en ajustant un côté après l'autre. Assurez-vous que le câble et la commande manuelle ② restent en dehors de la housse.
3. Le coussin remplit toute la housse à plat. Fermez la fermeture éclair.
4. Branchez le produit sur une prise secteur 220-240 volts et réglez le curseur de la commande à la température souhaitée.
  - Déplacez le curseur de réglage de la température – cette opération allume le coussin. Le témoin de mise sous tension et de fonctionnement s'allumera.
  - Réglage 1 recommandé pour une utilisation continue.
  - Pour mettre le coussin hors tension, réglez le curseur sur «0». Le témoin s'éteindra.
5. **La commande manuelle du coussin coupe le chauffage au bout de 90 minutes environ.** Mais le témoin reste allumé. Pour réinitialiser la minuterie et redémarrer une session de chauffage, placez le curseur sur «0» puis remettez-le à la position de température souhaitée.
6. Débranchez à la fin de la session.

## 2. Instructions de nettoyage

⚠ **AVERTISSEMENT:** Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant avant de procéder au nettoyage du produit.

1. Après avoir été retirée du coussin, la housse est lavable en machine selon les instructions qui figurent dessus.
  2. Le coussin ne doit pas être lavé à la machine ou nettoyé à sec! Il doit être nettoyé à sec avec une brosse.
  3. Évitez que la commande manuelle ne devienne humide. N'utilisez pas de détergents ou de solvants. Ils pourraient endommager le produit.
  4. Ne placez en aucun cas la commande manuelle sous l'eau. Elle pourrait devenir humide et s'abîmer.
  5. Vérifiez l'état de la commande manuelle. Séchez bien le coussin et sa housse avant une remise sous tension.
- 👉 Le nettoyage et maintenance ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

## 3. Significations des symboles

- |  |                                |  |                               |
|--|--------------------------------|--|-------------------------------|
|  | Laver à 40 °C!                 |  | Ne pas repasser!              |
|  | Ne pas laver!                  |  | Pas de nettoyage à sec!       |
|  | Ne pas essorer!                |  | Mettre au sèche linge!        |
|  | Repasser à faible température! |  | Ne pas mettre au sèche linge! |

## 4. Garantie

Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre la commande électronique, le câble et le coussin lui-même. Elle ne s'étend pas à un emploi incorrect, à des accidents ou à un endommagement résultant d'un non-respect des instructions ou de modifications non effectuées par le fabricant. **La garantie n'est valide que sur présentation de la carte remplie par le revendeur.**

## 5. Caractéristiques techniques

---

**Modèle:** FH 600  
**Voltage:** 220 - 240 V   
**Puissance:** 50 W  
**Fréquence:** 50 Hz

Sous réserve de modifications techniques.

## 6. [www.microlife.fr](http://www.microlife.fr)

---


Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site internet: [www.microlife.fr](http://www.microlife.fr).

- **Lea este manual atentamente antes de usar este dispositivo.**
- **Este dispositivo no está destinado al uso médico en hospitales. ¡Exclusivamente para uso doméstico!**
- **Para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica durante el uso de la almohadilla, tenga en cuenta lo siguiente:**
  - No la use si está mojada. Si la almohadilla se mojará o humedeciera, séquela completamente antes de usarla.
  - ¡Use la almohadilla sólo en habitaciones secas, no en el baño o en zonas húmedas!
  - Antes de cada uso, compruebe que la almohadilla no presente daños, p. ej. no la use si existen daños visibles en el control manual, los interruptores, los enchufes o la almohadilla térmica misma.
  - No inserte alfileres ni otros objetos punzantes.
- **Para evitar el sobrecalentamiento:**
  - No deje la almohadilla encendida sin vigilancia; apáguela cuando salga de la habitación.
  - No use la almohadilla doblada.
  - Evite arrugar la almohadilla.
  - **¡No cubra el control manual!** Para garantizar que el control manual funcione correctamente, no lo coloque sobre la almohadilla térmica o debajo de ella ni lo cubra con otros objetos.
  - El cable no se debe enrollar alrededor del control manual.
- **No usar en personas con incapacidad de movimiento, en bebés, en personas insensibles al calor ni en animales.** No deje que los niños jueguen con el dispositivo
- **Asegúrese de que los niños no utilicen el dispositivo sin supervisión.** Los niños menores de 8 años no deben utilizar este dispositivo a menos que sus padres o cuidadores hayan puesto el control de temperatura al 1.
- Este dispositivo pueden utilizarlo niños a partir de los 8 años de edad y adultos con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con experiencia y/o conocimientos insuficientes, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del mismo y hayan comprendido los peligros que podrían derivarse.
- **La aplicación excesiva con un elevado ajuste de calor puede provocar quemaduras en la piel.**
- **Si el dispositivo se va a utilizar durante un periodo prolongado, por ejemplo cuando el usuario se va a dormir, el calor debe ajustarse al nivel recomendado para el uso continuo.**
- **Examine el dispositivo frecuentemente en cuanto a signos de desgaste o daños.** Si hay signos de desgaste o daños o si el dispositivo se ha usado inadecuadamente, contacte con el fabricante o con un agente autorizado antes de cualquier uso.
- **Si está dañado el cable de alimentación, debe ser sustituido por el fabricante, por un agente autorizado o por otra persona cualificada, a fin de evitar peligros.**
- **No intente abrir o reparar usted mismo el dispositivo.** Para volver a ensamblar el dispositivo se requieren herramientas especiales.
- **Este dispositivo emite un débil campo eléctrico y magnético que puede interferir con su marcapaso.** Por lo tanto, recomendamos que consulte a su médico y el fabricante de su marcapaso antes de utilizar este dispositivo.
- **Deje que el dispositivo se enfríe antes de doblarlo y almacenarlo en un lugar seco.** No coloque objetos pesados sobre el mismo para evitar el pandeo.

**⚠ ¡No adecuado para niños de 0 a 3 años!** Los niños menores de 3 años no pueden responder al sobrecalentamiento.

**🗑** Los dispositivos electrónicos se deben eliminar según indique la normativa local pertinente y no se deben desechar junto con la basura doméstica.

## 1. Cómo usar un calentador de pie Microlife

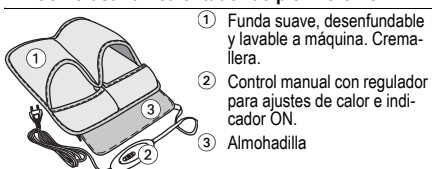

**⚠ ATENCIÓN:** No use la almohadilla nunca sin la funda textil. Deje que el aire circule ligeramente entre la almohadilla y la piel durante el uso.  
No usar con zapatos.  
El dispositivo no está a ser utilizado para el calentamiento de los animales.

1. Coloque la funda textil ① sobre una superficie plana. Abra la cremallera.
2. Introduzca la almohadilla ③ completamente en la funda, ajustando cada lado uno por uno. Compruebe que el cable y el control manual ② han quedado fuera de la funda.
3. La almohadilla está plana, llenando la funda entera. Cierre la cremallera.
4. Conéctela a un enchufe de 220-240 voltios CA y ajuste el control manual al calor deseado usando el regulador.
  - Seleccione el ajuste de temperatura en el regulador – se enciende la almohadilla térmica. Un indicador se ilumina indicando que el aparato está conectado a la alimentación eléctrica y que está encendido.
  - El nivel 1 se recomienda para el uso continuo.
  - La almohadilla se desconecta situando el regulador en la posición «0», entonces se apaga el indicador.
5. **El control manual apaga el calentador automáticamente al cabo de aprox. 90 minutos.** No obstante, la lámpara indicadora sigue encendida. Para resetear el temporizador e iniciar otro periodo de calentamiento, mueva el regulador a la posición apagada «0» y después otra vez al ajuste de calor deseado.
6. Desenchúfela cuando haya terminado.

## 2. Instrucciones de limpieza

**⚠ ADVERTENCIA:** Desenchufe siempre el cable de alimentación de la toma de corriente antes de proceder a la limpieza del producto.

1. La funda extraíble se puede lavar a máquina después de separarla de la almohadilla, siguiendo las instrucciones de lavado indicadas en la funda.
2. ¡La almohadilla no se debe lavar ni limpiar en seco! Se puede limpiar con un cepillo seco.
3. No deje que se moje el control manual. No utilice detergentes o disolventes que puedan dañar el dispositivo.
4. No ponga nunca el control manual bajo el agua. De lo contrario, la humedad podría llegar al control manual y dañarlo.
5. Compruebe que el control manual no presente signos de daños y seque la almohadilla y su funda completamente antes de volver a encenderla.

**👉** Las labores de limpieza y mantenimiento no deben realizarlas niños sin la supervisión de un adulto.

## 3. Explicación de los símbolos

	Lavar a 40 °C!		No planche!
	No lave!		No lavar en seco!
	Blanqueo no permitido!		Secar a máquina!
	Planchar a baja temperatura!		No secar en la secadora!

## 4. Garantía

Este producto tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre el control manual electrónico, el cable y la almohadilla misma. Esta garantía no cubre el uso incorrecto, los accidentes o daños producidos por no seguir las instrucciones o por modificaciones del dispositivo que no se hayan llevado a cabo por el fabricante.  
**Esta garantía únicamente tendrá validez presentando la tarjeta de garantía cumplimentada por el distribuidor.**

## 5. Especificaciones técnicas

---

**Modelo:** FH 600  
**Voltaje:** 220 - 240 V   
**Potencia:** 50 W  
**Frecuencia:** 50 Hz

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

## 6. [www.microlife.com](http://www.microlife.com)

---

En [www.microlife.com](http://www.microlife.com) encontrará información detallada sobre nuestros productos y servicios.

- **Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o dispositivo.**
- **Este dispositivo não foi concebido para utilização médica hospitalar. Destina-se apenas ao uso doméstico!**
- **Para excluir o perigo de choques eléctricos ao utilizar a almofada, tome as seguintes precauções:**
  - Não utilize a almofada se estiver molhada. Se a almofada estiver húmida ou molhada, seque-a completamente antes de a utilizar.
  - Utilize a almofada apenas em ambientes secos, ou seja, não utilize em casas de banho, etc.!
  - Antes de cada utilização, verifique se a almofada apresenta sinais de deterioração; não utilize se existirem danos visíveis no controlo manual, nos botões, na ficha eléctrica ou na própria almofada.
  - Não perfure o dispositivo com alfinetes nem com quaisquer outros objectos pontiagudos.
- **Para evitar o aquecimento excessivo:**
  - Não deixe a almofada ligada sem supervisão; desligue a almofada se tiver de se ausentar da sala onde a mesma se encontra.
  - Não utilize a almofada dobrada.
  - Evite enrugar a almofada.
  - **Não tape o controlo manual!** Para garantir o funcionamento correcto do controlo manual, não o coloque debaixo da almofada nem o cubra com outros objectos.
  - O cabo não deve ser enrolado em volta do controlo manual.
- **Não utilize o dispositivo em pessoas com mobilidade reduzida, em bebés, em pessoas insensíveis ao calor ou em animais.** O dispositivo não é um brinquedo, manter fora do alcance e da vista das crianças.
- **Certifique-se de que não deixa o dispositivo ao alcance das crianças.** As crianças com menos de 8 anos não podem utilizar este dispositivo a não ser que um dos pais ou tutor tenha colocado o controlo manual na temperatura mais baixa, posição 1.
- Este dispositivo pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas que tenham capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou experiência e/ou conhecimento inadequados, desde que sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas em como usar o dispositivo com segurança e tenham compreendido os perigos resultantes da sua utilização.
- **Uma utilização excessiva a temperaturas elevadas pode causar queimaduras na pele.**
- **Se o dispositivo for utilizado durante um longo período de tempo, por exemplo na eventualidade do utilizador poder adormecer,** os controlos devem ser ajustados para utilização em modo contínuo.
- **Verifique regularmente se o dispositivo apresenta sinais de desgaste ou danos.** Em caso afirmativo ou se o dispositivo tiver sido incorrectamente utilizado, consulte o fabricante ou o representante autorizado antes de voltar a usar.
- **Se o cabo de alimentação estiver danificado, terá que ser substituído pelo fabricante, pelo representante autorizado ou por uma pessoa devidamente qualificada de modo a evitar possíveis perigos.**
- **Não tente abrir nem reparar o dispositivo.** São necessárias ferramentas especiais para voltar a montar o dispositivo.
- **Este dispositivo emite campos eléctricos e magnéticos muito fracos que podem interferir com o funcionamento dos pacemakers.** É aconselhável consultar o seu médico e o fabricante do pacemaker antes de utilizar o dispositivo.
- **Deixe o dispositivo arrefecer antes de o dobrar e guardar num local seco.** Não coloque objectos pesados em cima do dispositivo para evitar deformações.

**⚠ Não é adequado para crianças com idades entre os 0-3 anos!** Crianças com menos de 3 anos não são capazes de responder ao sobreaquecimento.

**⚠** Os dispositivos electrónicos têm de ser eliminados em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis não devendo nunca ser incluídos no lixo doméstico.

## 1. Como utilizar as pantufas térmicas da Microlife



- 1 Cobertura em tecido macio – amovível e lavável na máquina. Fecho de correr.
- 2 Controlo manual com interruptor para ajuste do calor e indicação de «LIGADO».
- 3 Almofada térmica



**AVISO:** Nunca utilize a almofada sem a cobertura de tecido.

Assegure-se de que há circulação de ar entre a almofada e a pele durante a utilização da mesma.

Não utilize com sapatos.

Não utilize a almofada para aquecer animais.

1. Coloque a cobertura de tecido (1) numa superfície plana. Abra o fecho de correr.
2. Introduza a almofada (3) totalmente dentro da cobertura, colocando um lado de cada vez. Certifique-se de que o cabo e o controlo manual (2) ficam do lado de fora da cobertura.
3. A almofada deverá ficar plana preenchendo toda a cobertura. Prima o fecho de correr.
4. Ligue a ficha a uma tomada de 220-240V CA e ajuste o controlo manual para o valor de calor pretendido utilizando o interruptor deslizante.
  - Selecione a temperatura pretendida no interruptor deslizante – a almofada liga-se automaticamente. Acende-se uma luz de aviso que indica que o aparelho está ligado à corrente e pronto a funcionar.
  - Recomendamos a Regulação 1 para uma utilização contínua.
  - Para desligar a almofada, coloque o interruptor deslizante na posição «0», a luz de aviso apaga-se.
5. **O controlo manual do dispositivo desliga automaticamente o aquecedor decorridos cerca de 90 minutos.** No entanto, a luz de aviso permanece acesa. Para repor o temporizador e iniciar um novo período de aplicação de calor, coloque o interruptor deslizante na posição «0» e, em seguida, novamente na temperatura pretendida.
6. Desligue o dispositivo da tomada quando terminar a utilização.

## 2. Instruções de limpeza



**AVISO:** Desligue sempre o cabo de alimentação da corrente antes de limpar o produto.

1. Pode lavar a cobertura amovível na máquina de lavar roupa após retirar a almofada do seu interior e de acordo com as instruções de lavagem que se encontram na cobertura.
2. A almofada não pode ser lavada na máquina nem ser limpa a seco!  
Pode ser limpo com uma escova quando está seco.
3. Não molhe nem humedeça o controlo manual. Não utilize detergentes nem solventes, uma vez que podem danificar o dispositivo.
4. O controlo manual não pode nunca ser colocado dentro de água. Caso contrário, poderá introduzir-se humidade no controlo manual e causar danos.
5. Verifique o controlo manual para detectar quaisquer danos e seque completamente a almofada e a cobertura de tecido, antes de voltar a ligar o dispositivo.



A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

## 3. Explicação dos símbolos



Lavar a 40 °C!



Não passar a ferro!



Não lavar!



Não limpe a seco!



Não é permitido branqueamento!



Secar na máquina de secar roupa!



Passar a ferro a baixa temperatura!



Não secar na máquina de secar roupa!

#### 4. Garantia

---

Este produto está abrangido por uma garantia de **2 anos** a partir da data da compra. Esta garantia cobre o controlo manual electrónico, o cabo e a própria almofada. A garantia não é válida em caso de utilização incorrecta, acidentes ou danos resultantes do não cumprimento das instruções ou de alterações efectuadas no dispositivo que não tenham sido executadas pelo fabricante. **A garantia só é válida mediante a apresentação do cartão de garantia devidamente preenchido e carimbado pelo revendedor.**

#### 5. Especificações técnicas

---

**Modelo:** FH 600

**Voltagem:** 220 - 240 V

**Potência:** 50 W

**Frequência:** 50 Hz

O fabricante reserva-se o direito de proceder a alterações técnicas.

#### 6. [www.microlife.com](http://www.microlife.com)

---

Para obter informações mais pormenorizadas sobre os nossos produtos e serviços, consulte a nossa página no endereço [www.microlife.com](http://www.microlife.com).



- Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją przed korzystaniem z urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użycia w celach medycznych w szpitalach. Służy wyłącznie do użytku domowego!
- W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym podczas korzystania z poduszki należy stosować się do następujących zaleceń:
  - Nie wolno używać poduszki, jeśli jest ona mokra. Jeśli poduszka uległa zamoczeniu lub jest wilgotna, przed użyciem należy ją dokładnie wysuszyć.
  - Poduszki należy używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach; nie wolno jej używać w łazience itp.!
  - Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie należy z niego korzystać w przypadku, gdy widoczne są uszkodzenia ręcznego sterowania, przełączników, wtyczki lub samej poduszki.
  - Nie wolno wbić szpilek lub innych ostrych przedmiotów.
- Dla uniknięcia przegrzania:
  - Nie wolno zostawiać włączonej poduszki bez nadzoru; wychodząc z pomieszczenia należy ją wyłączyć.
  - Nie wolno używać złożonej poduszki.
  - Należy unikać zaginania poduszki.
  - Nie wolno zakrywać ręcznego sterowania! Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania ręcznego sterowania, nie umieszczaj innych przedmiotów na, lub pod poduszką rozgrzewającą oraz nie przykrywaj poduszką elektryczną innych obiektów.
  - Kabel nie powinien być owinięty wokół ręcznego sterowania.
  - Nie wolno używać urządzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, niemowląt, osób nie odczuwających ciepła lub zwierząt. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę poduszką grzewczą.
- Dopilnuj, aby dzieci nie używały przyrządu bez nadzoru. Dzieci poniżej 8 lat nie mogą korzystać z urządzenia chyba, że pod opieką rodziców lub opiekunów przy najniższym ustawieniu «1» temperatury.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i przez osoby, o obniżonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, lub mające niewystarczające doświadczenie i / lub wiedzę, pod warunkiem, że zostały pouczone, jak korzystać z niego bezpiecznie oraz zrozumieli niebezpieczeństwa płynące z jego korzystania.
- Zbyt częste stosowanie przy najwyższym ustawieniu może wywołać poparzenia skóry.
- Jeśli urządzenie będzie używane przez dłuższy czas, na przykład podczas snu, należy za pomocą regulatora wybrać ustawienie zalecane do długotrwałego użytkowania.
- Należy regularnie kontrolować urządzenia pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeśli oznaki takie istnieją lub urządzenie zostało użyte niezgodnie z przeznaczeniem, należy skonsultować to z producentem lub autoryzowanym przedstawicielem i powstrzymać się od dalszego korzystania z niego.
- Jeśli uszkodzony został przewód zasilający, ze względów bezpieczeństwa powinien on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis techniczny lub inne wykwalifikowane osoby.
- Nie wolno samodzielnie otwierać lub naprawiać urządzenia. Do ponownego złożenia urządzenia potrzebne są specjalistyczne narzędzia.
- Urządzenie emituje słabe pola elektryczne oraz elektromagnetyczne, które mogą zakłócić funkcjonowanie rozrusznika serca. Przed użyciem zalecamy konsultację z lekarzem oraz/lub producentem rozrusznika serca.
- Gdy urządzenie nie jest wykorzystywane, powinno być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu. Nie powinno się umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

**⚠** Urządzenie nie nadaje się dla dzieci w wieku 0-3 lat! Dzieci poniżej 3 roku życia nie są w stanie reagować na przegrzanie.

**⚠** Zużyte urządzenia elektryczne muszą być poddane utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie należy wyrzucać ich wraz z odpadami domowymi.

## 1. Jak korzystać z ogrzewacz stóp Microlife



- 1 Zdejmowana poszewka z miękkiej tkaniny – może być prana w pralce automatycznej. Zamek błyskawiczny.
- 2 Ręczna regulacja temperatury i wskaźnik włączonego urządzenia.
- 3 Poduszka

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie wolno używać poduszki grzewczej bez założonej poszewki. Podczas korzystania należy umożliwić cyrkulację powietrza pomiędzy poduszką grzewczą a skórą. Nie używać w obuwiu. Urządzenie nie służy do ogrzewania zwierząt.

1. Ułóż poszewkę z materiału ① na płaskiej powierzchni. Otwórz zamek błyskawiczny.
2. Włóż poduszkę ③ do poszewki, dopasowując po kolei każdą ze stron. Należy upewnić się, że przewód i ręczne sterowanie ② znajdują się na zewnątrz poszewki.
3. Poduszka powinna leżeć płasko, wypełniając całą poszewkę. Zamknąć zamek błyskawiczny.
4. Wsunąć wtyczkę w gniazdko elektryczne o napięciu 220-240 V i, korzystając z przełącznika ręcznego sterowania, ustawić odpowiednią temperaturę.
  - Ustawić żądaną temperaturę na przełączniku – w ten sposób poduszka grzewcza zostanie włączona. Zapalenie się wskaźnika będzie oznaczać, że urządzenie jest podłączone do prądu i jest włączone.
  - Ustawienie 1 zalecane jest do długotrwałego użytkowania.
  - Poduszkę grzewczą wyłącza się poprzez przesunięcie przełącznika do położenia «0» - wówczas gaśnie także wskaźnik.
5. Automatykne wyłączenie podgrzewacza stóp zadziała po 90 minutach. Jednakże dioda wskaźnika będzie się świecić w dalszym ciągu. W celu wyzerowania regulatora czasowego i rozpoczęcia nowego cyklu należy przesunąć przełącznik do położenia «0», a następnie z powrotem do wybranego położenia.
6. Po zakończeniu korzystania należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.

## 2. Instrukcja czyszczenia

**⚠ UWAGA:** Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.

1. Poszewka może być prana w pralce automatycznej dopiero po zdjęciu z poduszki, zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na poszewce.
2. Poduszki nie wolno prać w pralce automatycznej lub czyścić chemicznie! Można czyścić szczotką na sucho.
3. Nie wolno dopuścić do zamoczenia ręcznego sterowania.
4. W żadnym wypadku nie wolno zanurzać sterowania ręcznego w wodzie.
5. Przed ponownym włączeniem poduszki należy sprawdzić sterowanie ręczne pod kątem uszkodzeń i całkowicie osuszyć poduszkę oraz poszewkę.

**👉** Czyszczenia i konserwacji urządzenia nie mogą przeprowadzać dzieci bez nadzoru dorosłych.

## 3. Objasnienie symboli

- |  |                                  |  |                                       |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|
|  | Pierz w temperaturze 40 °C!      |  | Nie prasować!                         |
|  | Nie prać!                        |  | Nie suszyć mechanicznie!              |
|  | Nie wybielać!                    |  | Suszyć w suszarce!                    |
|  | Żelazko na niskiej temperaturze! |  | Można suszyć w suszarce mechanicznej! |

#### 4. Gwarancja

---

Urządzenie jest objęte **2-letnią** gwarancją, licząc od daty zakupu. Gwarancja ta obejmuje elektroniczne sterowanie ręczne, przewód i samą poduszkę. Gwarancja nie obejmuje skutków niewłaściwego użycia, uszkodzeń przypadkowych, uszkodzeń wynikających z niezastosowania się do instrukcji lub modyfikacji urządzenia nie przeprowadzonych przez producenta.

**Gwarancja jest ważna wyłącznie z wypełnioną przez sprzedawcę kartą gwarancyjną.**

#### 5. Specyfikacje techniczne

---

**Model:** FH 600  
**Napięcie zasilania:** 220 - 240 V   
**Moc:** 50 W  
**Częstotliwość:** 50 Hz

Prawo do zmian technicznych zastrzeżone.

#### 6. [www.microlife.com](http://www.microlife.com)

---

Dokładne informacje nt produktów i usług można znaleźć na stronie [www.microlife.com](http://www.microlife.com).

- Az eszköz használata előtt gondosan olvassa végig ezt az útmutatót!
- Ez az eszköz nem kórházi alkalmazásra készült. Csak otthoni használatra!
- A párna használata közben áramütés elkerülése érdekében tartsa be a következőket:
  - Nedves állapotban ne használja! Ha a párna nyirkos vagy vizes lett, használat előtt teljesen szárítsa meg!
  - Csak száraz helyiségekben használja, fürdőszobában stb. semmiképp!
  - Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a párna nem sérült-e, és ha a kezelőegységen, a kapcsolón, a csatlakozódugón vagy magán a párnán látható sérülés van, ne használja azt!
  - Ne szúrjon az eszközbe tűt vagy éles tárgyat!
- **A túlmelegedés elkerülése érdekében:**
  - Ne hagyja a párnát felügyelet nélkül bekapcsolva; ha kimegy a szobából, kapcsolja ki!
  - Ne használja a párnát összehajtván!
  - Ne gyűrje össze a párnát!
  - **A kezelőegységet ne fedje le!** Hogy a kezelőegység megfelelően működjön, ne tegye a melegítőpárnára vagy az alá és ne fedje be más tárgyakkal!
  - A kábelt ne tekerje a kezelőegység köré!
- **Mozgásképtelen vagy hőre érzéketlen személyeknél, csecsemőknél, illetve állatoknál ne használja!** Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az eszközzel!
- **Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket.** 8 év alatti gyerekeknek csak úgy használható, ha szülő vagy gondviselő a legalacsonyabb hőmérsékletű, 1-es fokozatot állítja be.
- Ez az eszköz úgy használható 8 éves vagy idősebb gyerekeknek, továbbá csökkent fizikai, szellemi, érzékszervi állapottal rendelkező vagy ügyetlen személyeknél, ha felügyelik őket vagy elmagyarázták nekik a biztonságos használatot, az előfordulható veszélyeket, és ők megértették mindezeket.
- **Ha sokáig használja a készüléket magas hőmérsékletre állítva, a bőrön égési sebeket okozhat.**
- **Ha az eszköz várhatóan hosszabb időn keresztül használja, például alvás közben, akkor a folyamatos használatra javasolt beállítást kell alkalmazni.**
- **Gyakran ellenőrizze, hogy az eszközön nem látható-e elhasználódás vagy sérülés jelei!** Ha ilyen jelek láthatók, illetve ha az eszköz nem rendeltetésszerűen használják, akkor a további használat előtt kérjen tanácsot a gyártótól vagy a forgalmazótól!
- **Ha az áramellátó kábel sérült, azt a kockázatok mellőzése érdekében a gyártónak, a gyártót képviselő szerviznek vagy hasonló jogosítványokkal rendelkező egyéb személynek kell kicserélnie.**
- **Ne próbálja meg saját maga felnyitni vagy megjavítani a készüléket!** Az eszköz ismételt összeszereléséhez speciális szerszámok szükségesek.
- **Az eszköz nagyon gyenge elektromos és mágneses sugárzás bocsát ki, melyek megzavarhatják a pacemaker működését.** Ilyen esetben ajánljuk beszéljen orvosával vagy a szívritmus-szabályzó gyártójával mielőtt használja az eszközt.
- **Hagyja az eszközt kihűlni elrakás előtt és tárolja száraz helyen!** Ne tegyen rá nehéz tárgyakat, melyek behorpasztják!

**⚠ Nem használható 0-3 éves kor közötti gyermekeknek!** 3 év alatti gyermekek nem képesek a túlmelegedésről riasztani.

**⚡ Az elektronikai termékek az érvényes előírásoknak megfelelően kell kezelni, a háztartási hulladéktól elkülönítve.**

## 1. A Microlife lábmelegítő használata



- 1 Puha textilhuzat – levehető és gépben mosható. Cipzár.
- 2 Kezelőegység csúsztatható hőfokszabályzóval és kontrolllámpával.
- 3 Párna

**⚠ FIGYELEM:** Sose használja a párnát a textilhuzat nélkül. Úgy helyezze el a készüléket, hogy használat közben legyen némi légáramlás a párna és a bőre között. Cipővel nem használható.

Ne használja a készüléket állatok melegítésére!

1. Helyezze a textilhuzatot (1) egy sima felületre. Nyissa ki a cipzárt.
2. Helyezze a párnát (3) teljes egészében a huzatba, egymás után hozzáillesztve az egyes oldalakat! Ügyeljen arra, hogy a kábel és a kezelőegység (2) a huzaton kívül maradjon!
3. A párna ekkor egy síkban fekszik, kitérve az egész huzatot. Zárja be a cipzárt.
4. Dugja be a csatlakozót egy 220-240 voltos váltakozó áramú csatlakozójzatba, és a kezelőegységen lévő csúsztatható hőszabályzóval állítsa be a kívánt melegítési fokozatot!
  - A hőfokszabályzón válassza ki a megfelelő hőmérsékletet – ezzel kapcsolja be a párnát! Ekkor kigyullad egy jelzőfény, amely azt mutatja, hogy a készülék csatlakoztatva van a hálózathoz, és be van kapcsolva.
  - Folyamatos használat esetén az 1. beállítás alkalmazandó.
  - A párna úgy kapcsolható ki, hogy a hőfokszabályzót a «0» állásba tolja; ekkor a jelzőfény is kialszik.
5. **A párna kezelőegysége kb. 90 perc után automatikusan kikapcsolja a melegítőt,** a jelzőfény azonban továbbra is világít. Ha vissza akarja állítani az időzítést és újabb melegítési periódust kíván kezdeni, csúsztassa a hőfokszabályzót a «0» (kikapcsolt) állásba, majd vissza a kívánt hőbeállításhoz.
6. Használat után húzza ki a hálózati csatlakozót!

## 2. Tisztítási útmutató

**⚠ FIGYELEM:** mielőtt hozzáfogna a termék tisztításához, mindig húzza ki a hálózati csatlakozót!

1. A párna kivétele után a textilhuzat gépben mosható, a rajta található mosási útmutató szerint.
2. Magát a melegítőpárnát tilos gépben mosni vagy vegytisztítani! Szárazon, kefével tisztítható.
3. Ügyeljen arra, hogy a kezelőegységet ne érje nedvesség! Ne használjon tisztító- vagy oldószereket, mert ezek károsíthatják az eszközt!
4. Semmiképp se tartsa a kezelőegységet víz alá, mert az esetleg bejutó víz kárt okozhat!
5. Mielőtt újra bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze, hogy a kezelőegységen nincs sérülés, a párna száraz és a huzata teljesen lefedi!

**☞ Gyermekek felügyelet nélkül nem vezethetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.**

## 3. Jelmagyarázat

- |  |                            |  |                                     |
|--|----------------------------|--|-------------------------------------|
|  | Kímélő mosás, 40 °C!       |  | Vasalni tilos!                      |
|  | Nem mosható!               |  | Vegytisztítás nem megengedett!      |
|  | Fehérités nem megengedett! |  | Szárítás csökkentett hőmérsékleten! |
|  | Vasalás alacsony hőfokon!  |  | Ne szárítsa szárító-gépben!         |

#### 4. Garancia

---

A termékre a vásárlás napjától számítva **2 év** garancia vonatkozik. Ez a garancia az elektromos kezelőegységre, a kábelre és magára a párnára vonatkozik. A garancia nem terjed ki az útmutatóban foglaltak be nem tartásából eredő helytelen használat, baleset vagy kár esetére, és nem érvényes akkor sem, ha az eszközön a gyártón kívül más személy átalakítást végez.

**A garancia csak a kereskedő által kitöltött garanciajegy felmutatásával érvényesíthető.**

#### 5. Műszaki adatok

---

**Modell:** FH 600

**Feszültség:** 220 - 240 V

**Teljesítmény:** 50 W

**Frekvencia:** 50 Hz

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

#### 6. [www.microlife.com](http://www.microlife.com)

---

Termékeinkről és szolgáltatásainkról részletes tájékoztatás található a következő webcímen: [www.microlife.com](http://www.microlife.com).

- **Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Verwendung des Geräts sorgfältig durch.**
- **Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen Gebrauch in Krankenhäusern gedacht: Nur für den häuslichen Gebrauch.**
- **Zur Vermeidung von Elektroschocks bei der Anwendung beachten Sie bitte Folgendes:**
  - Kissen nicht in nassem Zustand verwenden. Feuchte oder nasse Kissen müssen vor der Verwendung vollständig getrocknet werden.
  - Kissen nur in trockenen Räumen (nicht in Badezimmern o. ä.) verwenden.
  - Vor jeder Verwendung des Kissens sicherstellen, dass dieses nicht beschädigt ist. Bei sichtbarer Beschädigung von Wärmeregler, Schalter, Stecker oder Kissen darf dieses nicht verwendet werden.
  - Keine Sicherheitsnadeln oder andere scharfe/spitze Objekte anbringen.
- **Vermeidung von Überhitzung:**
  - Eingeschaltetes Kissen nicht unbeaufsichtigt lassen. Schalten Sie es aus, wenn Sie den Raum verlassen.
  - Kissen nicht in gefaltetem Zustand verwenden.
  - Kissen nicht verkneten.
  - **Wärmeregler nicht abdecken!** Um eine korrekte Funktion des Wärmereglers zu gewährleisten, darf dieser weder auf oder unter das Heizkissen gelegt, noch mit anderen Gegenständen zugedeckt werden.
  - Das Kabel sollte nicht um den Wärmeregler gewickelt werden.
- **Nicht für gelähmte Menschen, Babys, besonders hitzeempfindliche Personen oder Tiere geeignet.** Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- **Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen.** Kinder unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht verwenden, ausser ein Elternteil oder Erziehungsbe-rechtigter hat den Wärmeregler auf die niedrigste Tempera-turstufe 1 eingestellt.
- Kinder ab 8 Jahren und darüber und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähig-keiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen dürfen dieses Gerät benutzen, sofern sie beaufsichtigt oder im sicheren Umgang mit dem Gerät geschult wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Dauerhafte Anwendung bei hoher Wärmeinstellung kann zu Verbrennungen führen.**
- **Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum ein-geschaltet bleibt, z. B. wenn der Benutzer einschläft, dann sollte mit dem Wärmeregler die Einstellungen für den Dauerbetrieb gewählt werden.**
- **Das Gerät öfters auf Abnutzung oder Beschädigung überprüfen.** Wenn Anzeichen für Abnutzung / Beschä-digung existieren oder das Gerät unsachgemäss verwendet wurde, kontaktieren Sie bitte, vor der erneuten Verwendung, den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.
- **Weist das Netzkabel Beschädigungen auf, ist es durch den Hersteller, einen autorisierten Fachhändler oder eine entsprechend qualifizierte Person auszutauschen, um jede Gefährdung zu vermeiden.**
- **Versuchen Sie nicht, das Gerät selber zu öffnen oder zu reparieren.** Zum Wiederzusammenbau des Geräts sind Spezialwerkzeuge erforderlich.
- **Von diesem Gerät gehen sehr schwache elektrische und magnetische Felder aus, die eventuell die Funktion Ihres Herzschrittmachers beeinträchtigen könnten.** Deshalb empfehlen wir Ihnen, Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers vor der Benutzung des Geräts zu konsultieren.
- **Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es falten und an einem trockenen Ort aufbewahren.** Legen Sie keine schweren Gegenstände darauf, um Knickungen zu vermeiden.



**Nicht für Kinder zwischen 0-3 Jahren geeignet!**  
Kinder unter 3 Jahren sind nicht in der Lage, auf Über-hitzung zu reagieren.



Elektronische Geräte dürfen nicht im Hausmüll, sondern müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

## 1. Anwendung des Microlife Fußwärmers



- ① Weiche Stoffhülle – maschi-nenwaschbar. Reißver-schluss.
- ② Manuelle Kontrolle mit Wärmeregler und ON-Anzeige.
- ③ Heizkissen




**WORSICHT:** Verwenden Sie das Heizkissen niemals ohne den Stoffüberzug.  
Stellen Sie sicher, dass während der Anwendung etwas Luft zwischen Heizkissen und Haut zirkulieren kann. Nicht mit Schuhen benutzen.  
Das Gerät darf nicht zum Wärmen von Tieren verwendet werden.

1. Stoffüberzug ① auf flache Unterlage legen. Reißverschluss öffnen.
2. Heizkissen ③ in den Stoffbezug stecken; dabei jede Seite einzeln einpassen. Sicherstellen, dass sich Kabel und Wärmeregler ② ausserhalb des Bezugs befinden.
3. Wenn das Kissen flach ausgebreitet ist und den gesamten Überzug ausfüllt, Reißverschluss schliessen.
4. An eine 220-240 Volt AC Steckdose anschliessen und gewünschte Heizleistung mit dem Wärmeregler einstellen.
  - Durch Einstellen der Temperatur mittels Wärmeregler schaltet sich das Heizkissen ein. Die Leuchtanzeige zeigt an, dass das Kissen an das Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet ist.
  - Einstellung 1 wird für den Dauerbetrieb empfohlen.
  - Das Kissen wird ausgeschaltet, indem der Wärmeregler auf «0» gestellt wird. Die Leuchtanzeige schaltet sich aus.
5. **Nach ca. 90 Min. Dauerbetrieb schaltet sich das Heiz-kissen automatisch aus.** Die Leuchtanzeige bleibt jedoch eingeschaltet. Um die Zeitschaltuhr zurückzusetzen und eine neue Heiz-Periode einzuleiten, stellen Sie den Wärmeregler erst auf «0», dann wieder auf die gewünschte Heizleistung.
6. Gerät nach Gebrauch ausstecken.

## 2. Reinigungs-Anleitung




**WARNUNG:** Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.

1. Der Stoffbezug ist unter Beachtung der auf dem Bezug angebrachten Waschanleitung maschinenwaschbar. Vor dem Waschen ist das Heizkissen unbedingt daraus zu entfernen.
  2. Das Heizkissen darf nicht in der Maschine gewaschen oder chemisch gereinigt werden!  
Es kann in trockenem Zustand mit einer Bürste gereinigt werden.
  3. Der Wärmeregler darf nicht nass werden. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, denn diese könnten das Gerät beschädigen.
  4. Halten Sie den Wärmeregler keinesfalls ins Wasser. Feuchtigkeit könnte eindringen und den Wärmeregler beschädigen.
  5. Überprüfen Sie den Wärmeregler nach der Reinigung auf Beschädigungen. Trocknen Sie das Heizkissen und den Stoffbezug vor der erneuten Verwendung vollständig.
-  Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

### 3. Zeichenerklärung

---

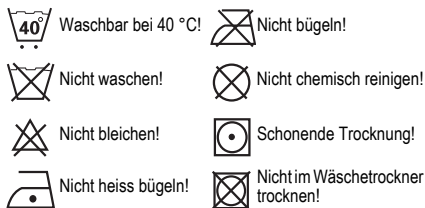

### 4. Garantie


---

Für dieses Gerät gewähren wir **2 Jahren** Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst den Wärmeregler, das Kabel und das Kissen selbst. Diese Garantie deckt keine Schäden, die auf unsachgemässe Handhabung, Unfällen, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder durch Dritte vorgenommen Änderungen zurückzuführen sind.

**Die Garantie ist nur bei Vorlage der Kaufquittung oder einer durch den Händler ausgefüllten Garantiekarte gültig.**

### 5. Technische Daten

---

**Modell:** FH 600  
**Spannung:** 220 - 240 V   
**Leistung:** 50 W  
**Frequenz:** 50 Hz

Technische Änderungen vorbehalten.

### 6. [www.microlife.com](http://www.microlife.com)

---

Genauere Benutzerinformationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter [www.microlife.com](http://www.microlife.com).

- **Läs igenom dessa anvisningar noga före användning.**
- **Denna produkt är inte avsedd för medicinsk behandling på sjukhus. Endast avsedd för privat bruk!**
- **Observera följande för att undvika elstötar:**

- Utsätt inte för väta. Om kudden blivit fuktig eller våt, torka helt före användning.
- Använd endast kudden i torra rum, inte i t.ex. badrum osv.
- Kontrollera att kudden är oskadad före användning, använd inte om reglage, kontakter eller kudden är skadade.
- Stick inte in nålar eller andra vassa föremål.

- **Undvik överhettning:**

- Lämna inte kudden på utan uppsikt.
- Använd inte kudden vikt.
- Undvik skrynklor eller veck.
- **Täck ej över handkontrollen!** För att säkerställa att handkontrollen fungera korrekt får den ej placeras på eller under produkten eller täckas över med andra föremål.
- Linda inte sladden runt reglaget.

- **Använd inte för person med rörelsehinder, spädbarn, värmekänslig person eller husdjur.** Låt inte barnen leka med apparaten.

- **Säkerställ att barn inte använder produkt utan uppsikt.** Barn under 8 år skall inte använda produkt utan att någon förälder eller skötare ställt in temperatur kontrollen på lägsta värde «1».

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med reducerad mental och fysisk förmåga förutsatt att de fått adekvata instruktioner om hur produkt skall användas på ett säkert sätt och förställt vilka risker som finns.
- **Långvarig användning med hög temperatur kan medföra brännskador.**

- **Om utrustningen skall användas under längre tid, t.ex. om användaren kan somna, bör inställningarna kontrolleras och ställas in för kontinuerlig användning.**

- **Kontrollera regelbundet att produkten inte är skadad eller utsatts för tillag.** Om det finns tecken på skador, vänligen kontakta tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare innan du använder produkten igen.

- **Om nätsladden är skadad, skall denna ersättas av tillverkaren, auktoriserad återförsäljare eller behörig elektriker för att undvika faror.**

- **Öppna eller reparera inte själv.** Specialverktyg krävs för detta.
- **Den här produkten avger mycket svaga elektriska och magnetiska fält som kan störa funktionen hos din pacemaker.** Vi rekommenderar därför att du rådgör med din läkare och tillverkaren av din pacemaker innan du använder produkten.

- **Låt produkten kylas av innan den viks ihop och stoppas undan på en torr plats.** Placera inte tunga saker ovanpå den; detta för att förhindra att den böjs.

- **Inte lämplig för barn mellan 0-3 år!** Barn under 3 år kan ej reagera på överhettning.

- Elektroniska instrument skall avfallshanteras enligt gällande miljölagstiftning och får inte kastas i hushålls-soporna.

## 1. Användning av Microlife fotvärmare



- 1 Textilöverdrag – avtagbart och maskintvätt. Blixttäs.
- 2 Reglage för värmeställningar och TILL.
- 3 Kudde

- **WARNING:** Använd aldrig värmekudden utan överdrag. Se till att det finns en aning luft mellan värmekudden och huden under användningen. Använd inte med skor. Produkten får ej användas för uppvärmning av djur.

1. Placera överdraget (1) på plant underlag. Öppna blixtlåset.
2. Lägg in kudden (3) helt i överdraget, justera varje hörn separat. Kontrollera att sladden och reglaget (2) ligger utanför överdraget.
3. Kudden fyller hela överdraget. Stäng blixtlåset.
4. Sätt in kontakten i ett vägguttag med 220-240 volt och ställ in reglaget på önskad värmeställning.
  - Välj temperatur på reglaget – detta aktiverar värmekudden. En lampa visar att värmekudden är ansluten och aktiverad.
  - Inställning 1 rekommenderas för kontinuerlig användning.
  - Stäng av värmekudden genom att skjuta reglaget till «0»-läge, lampan slöcknar.
5. **Reglage för värmeställning stänger automatiskt av värmen efter cirka 90 minuter.** Lampan fortsätter att lysa. Skjut reglaget till «0»-läge och sedan tillbaka till önskad temperaturinställning för att aktivera värmen igen.
6. Dra ur sladden efter användning.

## 2. Rengöring

- **WARNING:** Dra alltid ur nätsladden före rengöring.

1. Det avtagbara överdraget kan maskintvättas enligt anvisningarna.
2. Kudden får inte maskintvättas eller kemtvättas. Den kan bli rengjord med en torr borste.
3. Utsätt inte reglaget för väta. Använd inga aggressiva rengöringsmedel, dessa kan skada kudden.
4. Reglaget får under inga omständigheter hanteras under vatten. Fukt och väta skadar reglaget.
5. Kontrollera reglaget regelbundet på skador, torka kudden och överdraget före nästa användning.

☞ Rengöring eller underhåll får ej göras av barn utan instruktioner och under uppsikt.

## 3. Förklaring av symboler



Tvättas vid 40 C!



Får ej strykas!



Får ej tvättas!



Får ej kem tvättas!



Får ej blekas!



Får torktumlas!



Stryks vid låg temperatur!



Får ej torkas i torktumlare!

## 4. Garanti

Garantin gäller i 2 år från köpedatum. Garantin omfattar reglage, sladd och kudde. Garantin omfattar inte icke avsedd användning, olyckshändelse eller skador vilka kan härledas ur felaktig hantering eller modifikation, icke utförd av tillverkaren.

**Garantin gäller endast tillsammans med av återförsäljaren ifyllt garanti kort.**

## 5. Tekniska data

**Modell:** FH 600  
**Spänning:** 220 - 240 V   
**Effekt:** 50 W  
**Strömfrekvens:** 50 Hz

Med förbehåll för eventuella tekniska förändringar.

## 6. [www.microlife.com](http://www.microlife.com)

Mer detaljerad information om våra produkter och tjänster finns på adressen [www.microlife.com](http://www.microlife.com).

- Lue tämä ohjekirja huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lääkinälliseen sairaalakäyttöön. Vain kotikäyttöön!
- Ota huomioon seuraavat asiat, jotta vältät sähköiskun vaaran käyttäessäsi lämpötyynyä:
  - Älä käytä märkänä. Jos tyynty on kostea tai märkä, kuivata se täysin ennen käyttöä.
  - Käytä tyyntyä vain kuivissa tiloissa, älä käytä sitä esimerkiksi kylpyhuoneessa!
  - Tarkista aina, että tyynty on ehjä, ennen kuin käytät sitä. Älä käytä tyyntyä, jos säätölaitteessa, kytkimissä, pistokkeessa tai itse sähkölämpötyynyssä on näkyviä vaurioita.
  - Älä työnnä tyyntyn neuloja tai muita teräviä esineitä.
- Ylikuumentamisen välttämiseksi:
  - Älä jätä tyyntyn virtaa päälle ilman valvontaa. Katkaise virta, kun poistut huoneesta.
  - Älä käytä tyyntyä taitettuna.
  - Vältä poimuttamista tyyntyä.
  - Älä peitä säätölaitetta! Jotta säätölaite toimii varmasti oikein, älä jätä sitä sähkölämpötyyny päälle tai alle äläkä peitä sitä muilla esineillä.
  - Sähköjohtoa ei tule kiertää säätölaitteen ympärille.

- Ei saa käyttää liikuntakyvyttömillä henkilöillä, vauvoilla, henkilöillä, jotka eivät kykene tuntemaan lämpöä, eikä eläimillä. Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Huolehdi siitä, että lapset eivät käytä laitetta ilman valvontaa. Alle 8-vuotiaiden lasten ei tule käyttää laitetta ilman, että vanhempi tai valvova aikuinen on säätänyt lämpöasetuksen alhaisimmalle tasolle 1.
- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita tai riittämätön kokemus tai ymmärrys tuotteesta, saavat käyttää tuotetta vain valvotuissa oloissa tai silloin, kun heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ovat ymmärtäneet käyttöön liittyvät riskit.
- Laitteen liiallinen käyttö suurella teholla voi aiheuttaa iholle palovammoja.
- Kun on syytä olettaa, että laite on toiminnassa pitkäkestoisesti, esim. käyttäjän nukahtaessa, ohjaimet tulisi säätää vastaamaan jatkuvan käytön asetuksia.
- Tutki usein, ettei laitteessa näy kulumisen tai vaurioiden merkkejä. Jos huovassa ilmenee kulumisen tai vaurioitumisen merkkejä tai jos huopaa on käyretty väärin, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun myyjään ennen kuin käytät huopaa uudelleen.
- Vaarojen välttämiseksi välttämättömän sähköjohdon voi vaihtaa vain valmistaja, valmistajan edustaja tai joku muu vastaava pätevä henkilö.
- Älä yritä avata tai korjata laitetta. Laitteen uudelleen kokoamiseen tarvitaan erityisokaluja.
- Laitteen välittämät heikot sähkö- ja magneettikentät saattavat aiheuttaa häiriöitä sydämentahdistimen toimintaan. Suosittelemme konsultointia lääkärin sekä sydämentahdistimen valmistajan kanssa ennen laitteen käyttöä.
- Anna laitteen jäähtyä ennen kuin taittelet sen säilytykseen kuivassa paikassa. Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.

- ⚠ Tuote ei sovi 0-3-vuotiaille lapsille! Alle 3-vuotiaat lapset eivät pysty reagoimaan ylläpölyttämiseen.
- ⚠ Säätilalaitteet tulee hävittää paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti, eikä niitä saa laittaa talousjätteisiin.

## 1. Microlife-jalanlämmitin käyttöohjeet



- ① Pehmeä kangaspäällinen – voidaan irrottaa ja pestä koneessa. Vetoketju.
- ② Säätölaite, jossa on liukukytin lämmön asettamiseen ja ON-merkkivalo.
- ③ Tyynty

⚠ **VAROITUS:** Älä koskaan käytä lämpötyynyä ilman kangaspäällistä.

Anna ilman kiertää tyyntyä ja ihon välillä käytön aikana. Älä käytä yhdessä kenkien kanssa.

Laitetta ei saa käyttää eläinten lämmittämiseen.

1. Aseta kangaspäällinen ① tasaiselle pinnalle. Avaa vetoketju.
2. Työnnä tyynty ③ täysin päällisen sisään ja sovi se paikalleen sivu kerrallaan. Varmista, että sähköjohto ja säätölaite ② jäävät päällisen ulkopuolelle.
3. Tyynty on tasainen ja täyttää koko päällisen. Sulje vetoketju.
4. Kytke sähköjohto 220-240 voltin vaihtovirtaverkon pistorasiaan ja aseta säätölaite haluttuun lämpötilaan liukukytin avulla.
  - Valitse lämpötila-asetus liukukytkimellä – näin kytket lämpötyyny päälle. Merkkivalo syttyy osoittaen, että laite on kytketty verkkoon ja käynnistetty.
  - Jatkuvaassa käytössä suositellaan käyttämään asetusta 1.
  - Katkaise laitteen virta siirtämällä liukukytin asentoon «0», jolloin merkkivalo sammuu.
5. **Säätölaite katkaisee lämmittimestä virran automaattisesti noin 90 minuutin kuluessa.** Merkkivalo jää kuitenkin palamaan. Palauta ajastin alkuasetuntoon ja aloita uusi lämmitys vaihtamalla liukukytin asentoon «0» ja sen jälkeen takaisin haluttuun lämpötilaan.
6. Irrota laite sähköverkosta käytön jälkeen.

## 2. Puhdistusohjeet

- ⚠ **VAROITUS:** Poista sähköjohto verkkopistokkeesta aina, ennen kuin puhdistat laitetta.
  - 1. Voit pestä irrotettavan päällisen koneessa päällisessä olevien pesuohjeiden mukaan.
  - 2. Tyyntyä ei saa pestä koneessa eikä sitä saa puhdistaa kuivapussassa. Tuotteen voi puhdistaa harjalla sen ollessa kuiva.
  - 3. Säätölaite ei saa kastua. Älä käytä puhdistusainetta tai liuotimia, ne saattavat vahingoittaa laitetta.
  - 4. Säätölaitea ei missään tapauksessa saa upottaa veteen. Muussa tapauksessa kosteus voi päästä säätölaitteeseen ja aiheuttaa vahinkoa.
  - 5. Tarkista, näykkykö säätölaiteessa vaurioita, kuivavaa tyyntyä ja sen kangas täysin, ennen kuin kytket sen uudelleen käyttöön.
- 👉 Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman asianmukaista valvontaa.

## 3. Symbolien selitykset

- Pesu 40 °C lämpötilassa.
- Ei saa silittää.
- Ei saa pestä.
- Ei saa kuivapestä.
- Ei saa valkaista.
- Rumpukuivattava.
- Siilitettävä matalalla lämmöllä.
- Älä laita rumpukuivaimen.

## 4. Takuu

Tämän tuotteen takuu kestää **2 vuotta** ostopäivästä lukien. Tämä takuu kattaa sähkökäyttöisen säätölaitteen, sähköjohdon ja tyyntyä. Tämä takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutuvia vikoja, tapaturmia tai vahinkoja, jotka johtuvat ohjeiden laiminlyömisestä tai laitteeseen muiden kuin valmistajan toimesta tehdystä muutoksesta.

**Takuu on voimassa vain esitettäessä myyjän täyttämä takuukortti.**

## 5. Tekniset tiedot

- Malli:** FH 600
- Näyttö:** 220 - 240 V
- Virta:** 50 W
- Taajuus:** 50 Hz

Oikeus teknisiin muutoksiin pidetään.

## 6. www.microlife.fi

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme osoitteessa [www.microlife.fi](http://www.microlife.fi).



- **Aygıtı kullanmadan önce, lütfen, bu kılavuzu dikkatle okuyun.**
- **Bu aygıt, hastanelerde tıbbi uygulamalar için tasarlanmıştır. Yalnızca evde kullanılmıdır!**
- **Yastığı kullanırken elektrik çarpmasına önlemek için, lütfen, aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun:**
  - Islaksa kullanmayın. Yastık, nemli ya da ıslaksa, kullanmadan önce tamamen kurutun.
  - Yastığı salt kuru mekanlarda kullanın; banyo vb gibi yerlerde kullanmayın!
  - Kullanmadan önce her zaman yastığın zarar görüp görmediğini kontrol edin; ısı ayar kumandasında, anahatlarında, fişte ya da yastıkta bir hasar tespit ederseniz, elektrikli ısıtma yastığını kullanmayın.
  - İğne ya da diğer sivri nesnelere yastığa takmayın.
- **Aşırı ısınmayı önlemek için:**
  - Yastığı fişe takılı olarak tek başına bırakmayın; odadan çıkarırken fişini çekin.
  - Yastığı katlayarak kullanmayın.
  - Yastığın kırışmasını önleyin.
  - **Isı ayar kumandasını örtmeyin!** Kumandanın doğru çalışabilmesi için, kumandayı yastığın üzerine veya altına koymayın ya da herhangi bir şey ile örtmeyin.
  - Kablo, ısı ayar kumandasının çevresine sarılmamalıdır.
- **Hareket kabiliyeti olmayan kişilerin, bebeklerin, ısıya karşı duyarız insanların kullanmasına ya da hayvanlar üzerinde kullanılmasına izin vermeyin.** Çocukların aygıt ile oynamasına izin vermeyin.
- **Çocukların denetimsiz bir şekilde ürünü kullanmalarına izin vermeyin.** 8 yaşın altındaki çocuklar ebeveynlerinin ya da velilerinin ısı ayar derecesini en düşük sıcaklık ayarı olan 1'e getirmedikleri sürece aygıtı kullanmamalıdır.
- Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar, fiziksel, duyuusal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından denetimli olarak veya cihazın güvenli olarak nasıl kullanılacağı anlatılması ve olası tehlikeli sonuçlarının anlaşılması halinde kullanılabilir.
- **Uzun süre yüksek ayarda kullanmak, cilt yanıklarına yol açabilir.**
- **Aygıtın uzun bir süre kullanılması gerektiğinde, mesela kullanıcı uyku halindeyken olduğu gibi, aygıtın sürekli kullanım için önerilen ayara getirilmesi gerekir.**
- **Aygıt sık sık ısıya yırtık ya da hasara karşı kontrol edin.** Herhangi bir yırtık veya hasar tespit etmeniz ya da yanlış kullanım halinde, ürünü daha fazla kullanmadan üretici firma ya da yetkili bayi ile görüşün.
- **Elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, kablo, herhangi bir kazaya yol açmamak için, üretici firma, yetkili bayi ya da kalifiye kişilerle onarılmalıdır.**
- **Aygıt kendiniz açmaya ya da onarmaya kalkmayın.** Aygıtı yeniden kurmak için, özel aletlere gereksinim duyulmaktadır.
- **Aygıt kalp pilinizin çalışmasına zarar verebile ihtimali olan zayıf bir manyetik alana sahiptir.** Bu yüzden aygıtı kullanmadan önce doktorunuza ya da kalp pilinizin üreticisine danışmalısınız.
- **Aygıtı katlayıp kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.** Kıvrılması önlemek için üzerine ağır nesnelere koymayın.

- ⚠ **0-3 yaş arası çocuklar için uygun değildir!** 3 yaşın altındaki çocuklar aşırı ısınmaya tepki veremezler.
- ⚠ **Elektronik aygıtlar, evsel atık kurallarına göre değil, yürürlükteki yerel yönetmeliklere göre elden çıkarılmalıdır.**

## 1. Microlife Ayak Isıtıcısının Kullanımı



- 1 Yumuşak kılıf – çıkarılabilir ve makinede yıkanabilir. Fermuar.
- 2 Isı ayarları için sürgülü ve AÇIK göstergeli ısı ayar kumandası.
- 3 Yastık



**UYARI:** Isıtma yastığını kesinlikle kumaş kılıfı olmadan kullanmayın.

Kullanım sırasında, ısıtma yastığı ve cildiniz arasında bir miktar hava dolması bulunmasına dikkat edin.

Ayakhabarınızın aşağıyındayken kullanmayın.

Bu aygıt hayvanları ısıtmak için kullanılamaz.

1. Kumaş kılıfı (1) düz bir zemine yayın. Fermuarı açın.
2. Yastığı (3) kılıfın içerisinde tam olarak yerleştirin; her bir kenarını teker teker oturtun. Kablounun ve ısı ayar kumandasının (2) kılıfın dışında kaldığından emin olun.
3. Yastık, tüm kılıfı doldurarak düzün durmalıdır. Fermuarı kapatın.
4. Fişi, 220-240 voltluk bir Alternatif Akım prizine takın ve sürgülü ayar düğmesini kullanarak ısı ayar kumandasını istediğiniz sıcaklık ayarına getirin.
  - Sürgülü ayar düğmesini kullanarak, sıcaklık ayarını seçin – ısıtma yastığı açılır. Aygıtın güç kaynağına bağlı ve açık olduğunu gösteren bir göstergesi yanar.
  - Ayar 1, sürekli kullanım için önerilir.
  - Isıtma yastığı, sürgülü ayar düğmesinin «0» konumuna getirilmesi ile kapanır ve göstergesi söner.
5. **Yaklaşık 90 dakika sonra, ısıtma yastığı ayar kumandası, ısıtıcıyı otomatik olarak kapatır.** Ancak, ikaz lambası yanmaya devam eder. Zamanlayıcıyı sıfırlamak ve yeni bir ısıtma süresini yeniden başlatmak için, sürgülü ayar düğmesini önce «0» konumuna getirip sonra da istenen sıcaklığı ayarlamak gerekir.
6. Kullandıktan sonra prizden çekin.

## 2. Temizleme Talimatları



**UYARI:** Herhangi bir temizleme işleminden önce, her zaman aygıtın fişini prizden çekin.

1. Çıkarılabilir kılıf, yastıktan çıkarıldıktan sonra, üzerindeki yıkama talimatlarına uygun olarak makinede yıkanabilir.
2. Yastık, makinede yıkanmamalı ve kuru temizleme yapılmamalıdır!  
Kuruyken bir fırça yardımı ile temizlenebilir.
3. Isı ayar kumandasının ıslanmasına kesinlikle izin vermeyin. Herhangi bir deterjan ya da kimyasal çözücü madde kullanmayın; aygıt zarar verebilirler.
4. Kesinlikle ısı ayar kumandasını suyun altına tutmayın. Aksi takdirde, ısı ayar kumandası nemlenebilir ve hasara yol açabilir.
5. Isı ayar kumandasının zarar görüp görmediğini sık sık kontrol edin; yastık ve kumaş kılıfı tamamen kurumadan aygıtı açmayın.



Temizleme ve bakımı başlarında bir yetişkin olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

## 3. Simge Tanımlamaları



40 °C'de yıkayın!



Ütülemeyin!



Yıkamayın!



Kuru temizleme yapmayın!



Bezazlatıcı kullanmayın!



Kurutucuya konulabilir!



Düşük ısıda ütüleyin!



Kurutucuda kurutmayınız!

## 4. Garanti Kapsamı

Bu ürün, satın alındığı tarihten itibaren **2 yıl** garanti kapsamındadır. Bu garanti, ısı ayar kumandasını, kablo ve yastığın kendisini kapsamaktadır. Yanlış kullanımdan; talimatlarla uyulmamasından ya da aygıt üzerinde üretici firma dışında yapılan değişikliklerden kaynaklanan kazalar ve zarar zıyan, garanti kapsamında değildir.

**Garanti, sadece satıcı tarafından doldurulan garanti belgesinin ibraz edilmesi durumunda geçerlidir.**

## 5. Teknik Özellikler

---

<b>Model:</b>	FH 600
<b>Voltaj:</b>	220 - 240 V <input type="checkbox"/>
<b>Güç:</b>	50 W
<b>Frekans:</b>	50 Hz

Teknik özelliklerin değiştirilmesi hakkı saklıdır.

## 6. [www.microlife.com](http://www.microlife.com)

---

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı kullanıcı bilgisi almak için, bkz [www.microlife.com](http://www.microlife.com).

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για ιατρική χρήση σε νοσοκομείο. Προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση!
- Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όταν χρησιμοποιείτε το μαξιλάρι, τηρείτε τις εξής προφυλάξεις:

- Να μη χρησιμοποιείται εάν έχει βραχεί. Εάν το μαξιλάρι υγρανθεί ή βραχεί, στεγνώστε το καλά πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Χρησιμοποιείτε το μαξιλάρι μόνο σε στεγνούς χώρους, όχι στο μπάνιο, κ.λπ.!
- Πριν από κάθε χρήση, πρέπει να βεβαιώνετε ότι το μαξιλάρι δεν έχει υποστεί ζημιά. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχει εμφανής ζημιά στο χειριστήριο χειρός, τους διακόπτες, το φις ή στο ίδιο το ηλεκτρικό μαξιλάρι.

- Μην εισάγετε βελόνες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.
- Για να αποφυγείτε τυχόν υπερθέρμανση:
  - Μην αφήνετε το μαξιλάρι ενεργοποιημένο όταν δεν είστε παρόντες. Απενεργοποιήστε το μαξιλάρι όταν απομακρύνεστε από το δωμάτιο.
  - Μην χρησιμοποιείτε το μαξιλάρι διπλωμένο.
  - Μην τσαλακώνετε το μαξιλάρι.
  - **Μην καλύπτετε το χειριστήριο χειρός με άλλα αντικείμενα!** Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του χειριστηρίου χειρός, μην το τοποθετείτε επάνω ή κάτω από το μαξιλάρι και μην το καλύπτετε με άλλα αντικείμενα.
  - Το καλώδιο δεν πρέπει να είναι τυλιγμένο γύρω από το χειριστήριο χειρός.

- Να μη χρησιμοποιείται σε άτομα με κινητικά προβλήματα, βρέφη, άτομα με υπαισθησία στη θερμότητα ή σε ζώα. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με την συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν το όργανο χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν την συσκευή, εκτός εάν ο γονέας ή ο κηδεμόνας έχει ορίσει το σημείο ελέγχου στην χαμηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας 1.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα που έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ανεπαρκή εμπειρία ή/και ανεπαρκείς γνώσεις, με την προϋπόθεση ότι υπόκεινται σε εποπτεία ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσουν την συσκευή με ασφάλεια και έχουν κατανοήσει τους προκύπτοντες κινδύνους.
- Τυχόν υπερβολικά υψηλή ρύθμιση θερμότητας ενδέχεται να προκαλέσει δερματικά εγκαύματα.

- Εάν η συσκευή ενδέχεται να παραμείνει σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα εάν ο χρήστης κοιμηθεί, τα χειριστήρια θα πρέπει να ρυθμιστούν για συνεχή χρήση.

- Ελέγχετε συχνά το προϊόν για να διαπιστώσετε εάν έχει υποστεί φθορά ή ζημιά. Εάν υπάρχουν σημάδια φθοράς ή ζημιάς ή εάν το προϊόν έχει υποβληθεί σε κακή χρήση, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε το προϊόν εσείς οι ίδιοι. Για την επανασυναρμολόγηση του προϊόντος απαιτούνται ειδικά εργαλεία.

- Αυτή η συσκευή εκπέμπει πολύ ασθενή ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία του καρδιακού σας βηματοδότη. Ως εκ τούτου, σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας και τον κατασκευαστή του καρδιακού βηματοδότη σας πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής.

- Αφήστε την συσκευή να κρυσώνει προτού την διπλώσετε και αποθηκεύσετε σε στεγνό μέρος. Μην ενταποθέτετε βαριά αντικείμενα επάνω στην συσκευή για να μην την λυγίσετε.

- ⚠ **Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 0-3 ετών!** Παιδιά κάτω των 3 ετών δεν είναι σε θέση να αντιπαρκούν σε υπερθέρμανση.



Οι ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες που εφαρμόζονται στην χώρα σας, ποτέ μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

## 1. Πώς να χρησιμοποιήσετε τον θερμαντήρα ποδιών Microlife



- 1 Απαλό υφασμάτινο κάλυμμα – αφαιρούμενο και πλένομενο σε πλυντήριο. Φερμουάρ.
- 2 Χειριστήριο χειρός με κουμπί για τις ρυθμίσεις θερμότητας και ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης.
- 3 Μαξιλάρι



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μαξιλάρι χωρίς το υφασμάτινο κάλυμμα. Όταν χρησιμοποιείτε το μαξιλάρι, ανάμεσα στο δέρμα και το μαξιλάρι πρέπει να υπάρχει διάκενο ώστε να κυκλοφορεί αέρας. Μην το χρησιμοποιείτε όταν φοράτε παπούτσια. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την θέρμανση των ζώων.

1. Τοποθετήστε το υφασμάτινο κάλυμμα 1 σε μια επίπεδη επιφάνεια. Ανοίξτε το φερμουάρ.
2. Τοποθετήστε ολόκληρο το μαξιλάρι 3 μέσα στο κάλυμμα, προσμαρκώντας μια πλευρά κάθε φορά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο και το χειριστήριο χειρός 2 έχουν παραμείνει έξω από το κάλυμμα.
3. Το μαξιλάρι πρέπει να είναι «εξοπλιστό», και να εφαρμόζει σε όλο το κάλυμμα. Κλείστε το φερμουάρ.
4. Συνδέστε το σε τριζύ κεντρικής παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος 220-240V και ρυθμίστε με το χειριστήριο χειρός τη θερμοκρασία στην επιθυμητή τιμή χρησιμοποιώντας το σχετικό κουμπί.
  - Επιλέξτε τη ρύθμιση θερμοκρασίας στο κουμπί – με αυτό τον τρόπο το θερμαινόμενο μαξιλάρι τίθεται σε λειτουργία. Ανάβει μια ενδεικτική λυχνία, ως ένδειξη ότι το μαξιλάρι έχει συνδεθεί στο ρεύμα και ότι είναι ενεργοποιημένο.
  - Η ρύθμιση 1 συνιστάται για συνεχή χρήση.
  - Το ηλεκτρικό μαξιλάρι απενεργοποιείται εάν μετακινήσετε το κουμπί στη θέση «0». Τότε η ενδεικτική λυχνία σβήνει.
5. Το χειριστήριο χειρός θέτει το σύστημα θέρμανσης εκτός λειτουργίας μετά από 90 λεπτά περίπου, ωστόσο η λυχνία ένδειξης θα παραμείνει φωτισμένη. Για να μηδενίσετε το χρονόμετρο και να ανανεώσετε την περίοδο θέρμανσης, μετακινήστε το κουμπί στη θέση απενεργοποίησης «0» και ύστερα στη ρύθμιση θερμοκρασίας που επιθυμείτε.
6. Αποσυνδέστε το μαξιλάρι από την τριζύ όταν δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε πλέον.

## 2. Οδηγίες καθαρισμού



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αποσυνδέστε πάντοτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την τριζύ ρεύματος πριν καθαρίσετε το προϊόν.









1. Το αφαιρούμενο κάλυμμα μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο όταν αφαιρεθεί από το μαξιλάρι σύμφωνα με τις οδηγίες πλύσης που αναγράφονται στο κάλυμμα.
2. Το μαξιλάρι δεν πρέπει να πλένεται στο πλυντήριο ή να υποβάλλεται σε στεγνό καθαρίσμα! Καθαρίζεται με μια βούρτσα, στεγνά.
3. Το χειριστήριο χειρός δεν πρέπει να βραχεί. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλυτικά, διότι μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
4. Σε καμία περίπτωση μη βάζετε το χειριστήριο χειρός μέσα σε νερό. Διαφορετικά, μπορεί να εισέλθει υγρασία στο χειριστήριο χειρός και να προκαλέσει ζημιά.
5. Ελέγξτε το χειριστήριο χειρός για να διαπιστώσετε εάν φέρει σημάδια ζημιάς και στεγνώστε το μαξιλάρι και το υφασμάτινο κάλυμμα του καλά πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία.



Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήσης δεν θα πρέπει να γίνονται από επίβλεψη.

### 3. Επεξήγηση συμβόλων

---

 Πλένεται στους 40 °C!	 Δεν επιτρέπεται το σιδέρωμα!
 Δεν επιτρέπεται το πλύσιμο!	 Δεν επιτρέπεται το στεγνό καθάρισμα!
 Δεν επιτρέπεται το χλώριο!	 Ξηρό στέγνωμα!
 Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία!	 Δεν επιτρέπεται το στέγνωμα στο στεγνωτήριο!

### 4. Εγγύηση


---

Το προϊόν αυτό καλύπτεται από **2 ετή** εγγύηση που ισχύει από την ημερομηνία αγοράς. Αυτή η εγγύηση καλύπτει το ηλεκτρονικό χειριστήριο χειρός, το καλώδιο και το ίδιο το μαξιλάρι. Η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις λανθασμένης χρήσης, ατυχήματα ή ζημιά που έχουν προκληθεί λόγω της μη τήρησης των οδηγιών ή λόγω τροποποιήσεων στο προϊόν οι οποίες δεν διεξήχθησαν από τον κατασκευαστή.

**Η εγγύηση ισχύει μόνο με την προσκόμιση της κάρτας εγγύησης την οποία συμπληρώνει ο αντιπρόσωπος.**

### 5. Τεχνικά χαρακτηριστικά

---

<b>Μοντέλο:</b>	FH 600
<b>Τάση:</b>	220 - 240 V 
<b>Ισχύς:</b>	50 W
<b>Συχνότητα:</b>	50 Hz

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών.

### 6. [www.microlife.com](http://www.microlife.com)

---

Λεπτομερείς οδηγίες για την χρήση των προϊόντων μας ως επίσης και για το service τους, θα βρείτε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [www.microlife.com](http://www.microlife.com).

- Leggere attentamente questo manuale prima di usare l'apparecchio.
- Questo apparecchio non è adatto per uso ospedaliero. Apparecchio per uso domestico!
- Per evitare rischi di scariche elettriche durante l'uso dell'apparecchio si prega di osservare le seguenti regole:
  - Non usare quando è bagnato. Se l'apparecchio è umido o bagnato farlo asciugare completamente prima di utilizzarlo.
  - Usare l'apparecchio esclusivamente in ambienti asciutti, non utilizzare in bagno, ecc.!
  - Verificare che l'apparecchio non sia danneggiato prima di ogni utilizzo, ad esempio evitare di usarlo in presenza di danni visibili al sistema di controllo e impostazione della temperatura, al cavo di alimentazione, alla spina o allo termoformo riscaldante.
  - Non bucare con spille o altri oggetti acuminati il termoformo riscaldante.
- Per evitare il surriscaldamento:
  - Non lasciare l'apparecchio acceso e senza controllo; spegnerlo ogni volta quando si finisce di utilizzarlo anche temporaneamente.
  - Non accendere l'apparecchio quando è piegato o ancora nella scatola.
  - Evitare di piegarlo quando viene riposto.
  - Non coprire il sistema di controllo ed impostazione della temperatura! Per assicurarsi che il sistema di controllo ed impostazione della temperatura possa funzionare correttamente, non metterlo sopra o sotto il termoformo o coprirlo con altri oggetti.
  - Non avvolgere il cavo attorno al sistema di controllo ed impostazione della temperatura.
- Non utilizzare l'apparecchio su persone inferme o immobilizzate, su bambini, su persone insensibili al calore o su animali. Non lasciate che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Assicurarsi che i bambini non utilizzino il dispositivo senza la supervisione di un adulto. I bambini sotto gli 8 anni di età non devono utilizzare questo apparecchio a meno che un genitore o un supervisore abbia selezionato il sistema di controllo e impostazione della temperatura nella posizione «1», la temperatura più bassa.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali e/o esperienza e conoscenze insufficienti, a condizione che siano sorvegliate o istruite su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro comprendendo i pericoli derivanti.
- Prolungate applicazioni alla massima temperatura prevista potrebbero provocare arrossamenti o bruciature della pelle.
- Quando l'apparecchio deve essere utilizzato per periodi prolungati, ad esempio durante il sonno, impostare la temperatura per un uso continuativo come raccomandato.
- Esaminare frequentemente l'apparecchio per controllare segni di usura o danneggiamento. In presenza di segni di usura, danneggiamento o se l'apparecchiatura non funziona correttamente contattare l'assistenza clienti Microlife prima di utilizzarlo nuovamente.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito presso un centro di assistenza autorizzato per evitare possibili pericoli.
- Non aprire o provare a riparare l'apparecchio. Sono necessarie strumentazioni particolari per re-assemblare l'apparecchio.
- Questo apparecchio emette deboli campi elettromagnetici che potrebbero disturbare il funzionamento di pacemaker cardiaci. E quindi consigliabile consultare il proprio medico curante o il produttore del pacemaker prima di utilizzare questo apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di piegare e riporlo in un luogo asciutto. Non sovrapporre oggetti pesanti su di esso per evitare deformazioni.

- ⚠ Non adatto a bambini tra 0-3 anni! I bambini sotto i 3 anni di età non sono in grado di reagire al surriscaldamento.
- ⚠ Dispositivi elettronici devono essere smaltiti in conformità alle regolamentazioni locali e non con i rifiuti domestici.

## 1. Come usare un scaldapiedi Microlife



- ① Rivestimento in morbido tessuto con cerniera. Sfoderabile e lavabile in lavatrice.
- ② Sistema di controllo ed impostazione con selettore della temperatura a scorrimento e indicatore luminoso d'accensione ON.
- ③ Termoformo riscaldante



**ATTENZIONE:** non utilizzare il termoformo senza rivestimento.

Durante l'uso permettere all'aria di circolare tra lo scaldapiedi e la pelle. Non usarlo con le scarpe.

Il dispositivo non deve essere utilizzato per riscaldare animali.

1. Mettere il rivestimento ① su una superficie piana. Aprire la cerniera.
2. Inserire completamente il termoformo ③ nel rivestimento facendolo scorrere un lato alla volta. Assicurarsi che il cavo e il sistema di controllo ed impostazione della temperatura ② rimangano fuori dal rivestimento.
3. Quando il termoformo riscaldante è inserito in modo uniforme e steso all'interno del rivestimento, chiudere la cerniera.
4. Inserire la spina in una presa da 220-240 volt AC e impostare la temperatura desiderata utilizzando il selettore a scorrimento.
  - Accendere il termoformo selezionando la temperatura sul selettore a scorrimento. L'indicatore luminoso di accensione ON si illuminerà mostrando che l'apparecchio è connesso alla rete elettrica ed è acceso.
  - Il livello «1» è indicato per un uso prolungato.
  - Quando il selettore della temperatura è sulla posizione «0» il termoformo e l'indicatore luminoso d'accensione sono spenti.
5. Il sistema di controllo della temperatura spegnerà automaticamente il termoformo dopo circa 90 min., in ogni caso l'indicatore luminoso rimarrà acceso. Per un nuovo utilizzo far scorrere il selettore di temperatura nella posizione «0» e impostare nuovamente il livello di temperatura desiderato.
6. Scollegare alla presa elettrica l'apparecchio quando finito.

## 2. Istruzioni per la pulizia



**ATTENZIONE:** scollegare sempre il cavo dalla rete elettrica prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio.

1. Rimuovere il termoformo riscaldante dal rivestimento e procedere al lavaggio del rivestimento in lavatrice seguendo le istruzioni indicate nell'apposita etichetta.
2. Non lavare mai il termoformo riscaldante in lavatrice o a secco! Può essere pulito con una spazzola quando asciutto.
3. Non bagnare il sistema di controllo ed impostazione manuale. Non usare detergenti aggressivi o solventi che potrebbero danneggiare l'apparecchio.
4. Non mettere mai il sistema di controllo e impostazione in acqua. Dell'umidità potrebbe entrare nel sistema di controllo e impostazione danneggiandolo.
5. Verificare che il sistema di impostazione e controllo non sia danneggiato. Far asciugare completamente il termoformo ed il suo rivestimento prima di utilizzarlo nuovamente.



La pulizia e al manutenzione ordinaria non deve essere fatta da bambini senza sorveglianza.

## 3. Spiegazione dei simboli



Lavare a 40 °C!



Non tirare!



Non lavare!



Non lavare a secco!



Non candeggiare!



E' possibile asciugare con asciugatrice!



Stirare a bassa temperatura!



Non asciugare con asciugatrice!

#### 4. Garanzia

---

Questo prodotto è coperto da **2 anni** di garanzia dalla data d'acquisto. Sono in garanzia il sistema di controllo ed impostazione della temperatura, il cavo di alimentazione ed il termofofo riscaldante. La garanzia non copre danni causati da uso improprio, incidenti o utilizzo non conforme a quanto descritto in questo manuale. L'apertura o manomissione dell'apparecchio fanno decadere le condizioni di garanzia previste.

**La garanzia vale solo dietro presentazione della garanzia compilato del rivenditore.**

#### 5. Specifiche tecniche

---

**Modello:** FH 600  
**Voltaggio:** 220 - 240 V   
**Potenza:** 50 W  
**Frequenza:** 50 Hz

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

#### 6. [www.microlife.it](http://www.microlife.it)

---

Potrete trovare ulteriori informazioni sull'utilizzo dei nostri prodotti e sui nostri servizi su [www.microlife.it](http://www.microlife.it).

- **Læs denne brugervejledning nøje før brug af dette produkt.**
- **Dette produkt er ikke tilintænk medicinsk brug på hospitaler. Kun til privat brug!**

- **Følg følgende råd for at undgå elektrisk chok, når produktet bruges:**

- Bruges ikke, hvis den er våd. Varmepuden tørres helt, hvis den er blevet våd eller fugtig.
- Anvend kun puden i tørre rum, ikke badeværelser etc.!
- Kontroller hver gang at puden er intakt før brug, dvs. den bør ikke anvendes, hvis der er synlig beskadigelse af skydeknap, kontakter, stik eller selve varmegipuden.
- Stik ikke nåle eller andre skarpe genstande i puden.

- **For at undgå overophedning:**

- Lad ikke puden være tændt uden opsyn; sluk den når du forlader den.
- Fold ikke puden under brug.
- Undgå at bukke puden.

- **Dæk ikke skydeknappen til!** Placer ikke skydeknappen på eller under varmegipuden eller dæk den med andre objekter for at sikre, at skydeknappen virker korrekt.
- Kablet bør ikke vikles rundt om skydeknappen.

- **Må ikke anvendes på en person, der ikke kan bevæge sig, en baby, en person, der er ufølsom overfor varme eller på dyr.** Lad ikke børn lege med produktet.

- **Sørg for at børn ikke anvender produktet uden opsyn.** Børn under 8 år bør ikke bruge denne enhed, medmindre en forælder eller voksen har sat kontrollen til den laveste temperatur indstilling 1.

- Dette produkt kan bruges af børn i alderen 8 år eller derover, og af personer der har reduceret fysiske, sensoriske eller mentale evner eller utilstrækkelig erfaring og / eller viden, forudsat de er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan man bruger enheden sikkert og har forstået de potentielle farer.

- **Overdrevet anvendelse med for høj varme kan give forbrændinger af huden.**

- **Når produktet forventes anvendt i længere tid, f.eks. af en bruger der falder i søvn, skal knapperne indstilles til indstillingen anbefalet til vedvarende brug.**

- **Undersøg jævnligt produktet for tegn på slid eller beskadigelse.** Hvis der er sådanne tegn, eller hvis produktet har været brugt forkert, kontaktes producenten eller autoriseret forhandler, før den bruges igen.

- **Hvis den medfølgende ledning er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en autoriseret agent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.**

- **Prøv ikke at åbne eller reparere enheden selv.** Der kræves særligt værktøj til samle enheden igen.

- **Produktet udsender svage elektriske og magnetiske signaler, som kan forstyrre din pacemaker.** Derfor anbefaler vi at din læge og producenten af din pacemaker kontaktes før brug.

- **Dette produkt skal opbevares tørt og i den originale emballage, når det ikke anvendes.** Placér aldrig noget tungt på produktet.

- ⚠ **Ikke egnet for børn mellem 0-3 år!** Børn under 3 år er ikke i stand til at reagere på overophedning.

- ⚠ Elektroniske apparater må kun smides ud efter lokale foreskrifter, ikke sammen med husholdningsaffald.

## 1. Anvendelse af en Microlife fodvarmer



- 1 Blødt stofbetræk – aftageligt og kan maskinvaskes. Lynlås.
- 2 Betjeningsenhed med skydeknap til varmeindstilling og indikator for tændt (ON).
- 3 Varmelegeme

- ⚠ **ADVARSEL:** Brug aldrig varmegipuden uden betrækket. Lad der være nogen luftcirkulation mellem varmegipuden og huden under brug.

Bør ikke anvendes med sko på.

Produktet må IKKE anvendes på dyr.

1. Læg betrækket ① på en flad overflade. Åben lynlåsen.
2. Læg puden ③ helt ind i betrækket ved at få én side ad gangen til at passe. Sørg for at skydeknappen ② forbliver udenfor betrækket.
3. Puden ligger fladt og fylder hele betrækket. Luk lynlåsen.
4. Tilslut til en 220-240 volt stikkontakt og indstil skydeknappen til den ønskede varme.
  - Vælg temperaturindstilling på skydeknappen – dette tænder puden. Et lys vil tænde for at vise, at enheden er tilsluttet til stikkontakt og er tændt.
  - Indstilling 1 anbefales til vedvarende brug.
  - Puden slukkes ved at skubbe skyderen til «0» position. Lyset vil da slukke.
5. **Betjeningsenhed vil automatisk slukke for varmen efter ca. 90 minutter.** Men indikatorlyset vil fortsat være tændt. For at nulstille timeren og starte endnu en varmeperiode skubbes skyderen til «0» position og så tilbage til den ønskede temperatur.
6. Tag stikket ud, når den ikke bruges.

## 2. Rengøringsanvisninger

- ⚠ **ADVARSEL:** Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du foretager nogen form for rengøring af dette produkt.

1. Når det aftagelige betræk tages af selve puden, kan det maskinvaskes ifølge vaskeanvisningerne på betrækket.
2. Selve puden må ikke maskinvaskes eller sendes til rensning! Kan rengøres med en blød børste.
3. Lad ikke skydeknappen blive våd. Brug ikke rensningsmiddel eller opløsningsmiddel, da de kan skade enheden.
4. Hold under ingen omstændigheder skydeknappen under vand. Ellers kan fugten trænge ind og beskadige enheden.
5. Tjek skydeknappen for tegn på beskadigelse, og tør puden og dets stof helt, inden der tændes igen.

- 👉 Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

## 3. Forklaring af symboler

- |  |                           |  |                       |
|--|---------------------------|--|-----------------------|
|  | Vaskes ved 40 °C!         |  | Må ikke stryges!      |
|  | Må ikke vaskes!           |  | Må ikke renses!       |
|  | Må ikke bleges!           |  | Tørretumbles!         |
|  | Stryg ved lav temperatur! |  | Må ikke tørretumbles! |

## 4. Garanti

Garantien på dette produkt er 2 år fra købsdatoen. Denne garanti dækker betjeningsenheden med skydeknappen, kabel og selve puden. Denne garanti dækker ikke ukorrekt brug, uheld eller skade pga. manglende efterlevelse af instruktionerne eller ændringer af enheden, som ikke er udført af producenten. **Garantien gælder kun ved visning af garantikort udfyldt af forhandleren.**

## 5. Tekniske specifikationer

**Model:** FH 600  
**Spænding:** 220 - 240 V

**Strømforbrug:** 50 W

**Frekvens:** 50 Hz


Der tages forbehold for tekniske ændringer.

## 6. [www.microlife.com](http://www.microlife.com)

Detaljeret brugerinformation om vore produkter og vor service kan findes på [www.microlife.com](http://www.microlife.com).

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen. Alleen voor huishoudelijk gebruik!
- Ter voorkoming van elektrische schokken bij gebruik van het kussentje moet u het volgende in acht nemen:
  - Gebruik de deken niet als deze nat is. Als het kussentje vochtig of nat is geworden, dient het voor gebruik volledig gedroogd te worden.
  - Gebruik het kussentje alleen in droge kamers, niet in een badkamer etc.!
  - Controleer of het kussentje onbeschadigd is elke keer voordat u het gaat gebruiken, d.w.z. gebruik het niet als er zichtbare schade is aan de handbediening, schakelaars, stekker of kussentje zelf.
  - Steek er geen spelden of andere scherpe voorwerpen in.
- Ter voorkoming van oververhitting:
  - Laat het kussentje niet onbewaakt ingeschakeld, schakel het uit wanneer u de kamer verlaat.
  - Gebruik het kussentje niet gevouwen.
  - Voorkom dat het kussentje wordt gekreukeld.
  - **Bedek de handbediening niet!** Om te zorgen dat de handbediening goed kan werken, plaats je deze niet onder het kussen en bedek je deze niet.
  - Het snoer moet niet om de handbediening worden heen-gehouden.
- Gebruik het niet voor een persoon die zich niet kan bewegen, een baby, een persoon die niet gevoelig is voor warmte of dieren. Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
- Laat kinderen het apparaat alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken. Kinderen onder de 8 jaar mogen het warmtekussen alleen onder toezicht gebruiken en enkel op het laagste temperaturniveau stand 1.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en mensen met een verminderd fysiek en/of mentaal vermogen, mits onder toezicht of goed geïnstrueerd.
- Overmatige toepassing in de hoogste stand kan leiden tot huidverbrandingen.
- Wanneer het mogelijk is dat het apparaat langere tijd gebruikt zal worden, bijvoorbeeld doordat de gebruiker in slaap valt, dan moet de bediening aangepast worden naar een instelling die aanbevolen wordt voor continu gebruik.
- Controleer het apparaat regelmatig op slijtage of schade. Als er sprake is van slijtage of schade, of als het apparaat verkeerd gebruikt is, dient u contact op te nemen met de fabrikant of bevoegde vertegenwoordiger, alvorens de deken verder te gebruiken.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet dit vervangen worden door de fabrikant, een bevoegde vertegenwoordiger of andere gekwalificeerde personen, om mogelijke ongelukken te voorkomen.
- Probeer niet zelf het apparaat te openen of te repareren. Er zijn speciale gereedschappen nodig om het apparaat te demonteren en te monteren.
- Dit apparaat verzend licht elektrische en magnetische velden, deze zouden de functies van een pacemaker kunnen verstoren. Daarom raden wij aan om voor gebruik van het apparaat, informatie in te winnen bij uw medisch specialist of bij de fabrikant van uw pacemaker.
- Als u de deken niet gebruikt, berg het apparaat dan op in de originele verpakking en bewaar hem op een droge plaats. Leg geen zware voorwerpen op het apparaat neer.

 **Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar!**  
Kinderen van 3 jaar of jonger zijn niet in staat te reageren bij oververhitting.

 Elektronische apparaten moeten volgens de lokale wetgeving en regels worden verwijderd, nooit samen met het huisafval.

## 1. Gebruik van het voetenwarmer Microlife



- ① Sloopje van zachte stof – kan worden afgenomen en gewassen. Rits.
- ② Handbediening met schuifje voor warmte-instellingen en ON indicatielampje.
- ③ Warmtekussen



**WAARSCHUWING:** Gebruik het kussentje nooit zonder de stoffen sloop.

Zorg dat er lucht kan circuleren tussen het kussentje en de huid tijdens gebruik.  
Niet met schoenen gebruiken.


Dit product niet gebruiken bij dieren.

1. Plaats het sloopje ① op een vlak oppervlak. Open de rits.
2. Steek het warmtekussen ③ geheel in het sloopje, en pas steeds een zijde per keer er goed in. Let erop dat de kabel en de handbediening buiten het sloopje blijven ②.
3. Het kussentje moet vlak liggen en zo het gehele sloopje vullen. Sluit de rits.
4. Steek de stekker in een stopcontact met een spanning van 220-240 volt AC en stel de handbediening in op de gewenste warmte met behulp van het schuifje.
  - Selecteer de temperatuurstelling met het schuifje – dit schakelt het kussentje in. Een indicator zal oplichten en laten zien dat het apparaatje op de stroomtoevoer is aangesloten en ingeschakeld is.
  - Stand 1 wordt aanbevolen voor continu gebruik.
  - Het kussentje wordt uitgeschakeld door het schuifje op de «0» positie te zetten, de indicator zal dan uitgaan.
5. De handbediening zal automatisch de verwarming uitschakelen na circa 90 minuten. Echter, het indicatielampje zal blijven branden.
6. Om de timer te resetten en nog een verwarmtijd te starten, beweegt u het schuifje naar de uit
7. stand en dan terug naar de gewenste warmteinstelling.
8. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u gereed bent.

## 2. Reinigingsinstructies



**WAARSCHUWING:** Trek altijd het netsnoer uit het stopcontact voordat u het product gaat reinigen.

1. Het sloopje kan in de machine worden gewassen, nadat het van het warmtekussen is gehaald.
  2. Het warmtekussen kan niet in de machine worden gewassen of chemisch worden gereinigd!  
Kan worden schoongemaakt met een droge borstel..
  3. Laat de handbediening niet nat worden. Gebruik geen afwasmiddelen of oplosmiddelen, zij kunnen het apparaat beschadigen.
  4. Houd de handbediening beslist niet onder water. Anders kan er vocht in de handbediening komen en schade veroorzaken.
  5. Controleer de handbediening op schade, droog het kussentje en de sloop van stof geheel voordat u het weer inschakelt.
-  Reiniging en onderhoud dient niet door kinderen te worden uitgevoerd zonder toezicht.

## 3. Uitleg van de symbolen



Wassen op 40 °C!



Niet strijken!




Niet wassen!



Niet stomen!




Niet bleken!

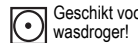

Geschikt voor de wasdroger!



Strijken op lage temperatuur!

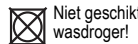

Niet geschikt voor de wasdroger!



#### 4. Garantie

---

Dit product heeft een garantie van **2 jaar na datum van aankoop**. Deze garantie beslaat de elektronische handbediening, kabel, en het kussentje zelf. Deze garantie dekt niet onjuist gebruik, ongelukken of schade tengevolge van het niet juist opvolgen van de instructies, of wijzigingen aan het apparaat die niet door de fabrikant zijn verricht.

**Deze garantie is alleen geldig op vertoon van de door de dealer ingevulde garantiekaart.**

#### 5. Technische specificaties

---

**Model:** FH 600  
**Spanning:** 220 - 240 V   
**Macht:** 50 W  
**Frequentie:** 50 Hz

Technische wijzigingen voorbehouden.

#### 6. [www.microlife.com](http://www.microlife.com)

---

Uitgebreide gebruikers informatie omtrent onze producten en service zijn te vinden op [www.microlife.com](http://www.microlife.com).

# Svarbi informacija. Išsaugokite instrukciją ateičiai!

LT

- Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Šio prietaiso negalima naudoti ligoninėje. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui!
- Norėdami išvengti elektros šoko šildyklės naudojimosi metu, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:
  - Nesinaudokite drėgna šildykle. Jei šildyklė šlapia ar drėgna, prieš naudojimąsi ją gerai išdžiovininkite.
  - Šildyklę naudokitės sausose patalpose, jokiū būdu ne vonios kambariye ar pan!
  - Prieš kiekvieną naudojimąsi patikrinkite, ar šildyklė nepažeista. Nenaudokite šildyklės, jei ji matomai pažeista, pažeistas reguliavimo pultas, jungikliai, kištukas.
  - Šildyklės nebodykite, saugokite ją nuo aštrių daiktų.
- Norint išvengti perkaitinimo:
  - Nepalikite įjungtos šildyklės be priežiūros. Išeidami iš patalpos šildyklę išjunkite.
  - Nesinaudokite sulankstyta šildykle.
  - Šildyklės nelamykite.
  - **Neuždenkite reguliavimo pulto!** Nedėkite pulto ant šildyklės ar po ją, priešingu atveju reguliavimo funkcija sutriks.
  - Nevyniokite laido ant reguliavimo pulto.
- Nenaudoti asmenims, negalintiems jūdėti, kūdikiams ar asmenims, neįautriems šilumai. Nenaudoti gyvūnams. Nepalikite vaikų su prietaisu be priežiūros.
- Neleiskite vaikams be priežiūros naudotis prietaisu. Vaikai iki 8 metų gali naudotis šildykle tik tada, kai tėvai ar globėjai nustato žemiausią temperatūros lygį «1».
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en mensen met een verminderd fysiek en/of mentaal vermogen, mits onder toezicht of goed geïnstrueerd.
- Per ilgą naudojimą aukščiausios temperatūros režime gali sukelti odos nudegimus.
- Esant tikimybei, kad prietaisas bus naudojamas ilgą laiką, pvz. naudotojui užmigęs, turi būti nustatytas nepertraukiamo naudojimo režimas.
- Pastoviai tikrinkite prietaisą dėl galimų nusidėvėjimo požymių ar pažeidimų. Jei tokių požymių esama, arba prietaisas buvo neteisingai eksploatuojamas, prieš tolimesni naudojimą visuomet kreipkitės į gamintoją ar jo įgaliotą atstovą.
- Pažeista prietaiso laidą gali pakeisti tik gamintojas, jo serviso įgaliotinis ar kitas kvalifikuotas specialistas.
- Neardykite ir neremontuokite prietaiso patys. Tam būtini specialūs įrankiai.
- Šis prietaisas skleidžia labai silpnus elektrinius ir magnetinius laukus, galinčius sutrikdyti širdies stimulatoriaus darbą. Todėl, prieš naudodamiesi prietaisu, pasitarkite su gydytoju ir Jūsų širdies stimulatoriaus gamintoju atstovu.
- Nenaudojama prietaisą ataušinkite ir laikykite originalioje pakuotėje sausoje vietoje. Nedėkite ant prietaiso sunkių daiktų.

**⚠ Nanaudoti 0-3 metų vaikams!** Vaikai iki 3 metų nereaguoja į perkaitimą.

**⚠** Elektroniniai prietaisai turi būti užliuzojami laikantis aplinkosaugos reikalavimų. Negalima prietaiso išmesti su buitinėmis šiukšlėmis.

## 1. Kaip naudotis Microlife šildykle kojoms



- ① Minkštas užvalkalas su užtrauktuka. Jį galima nuimti ir skalbti automatinėje skalbyklėje.
- ② Reguliavimo pultas su perjungėju bei įjungto prietaiso indikatoriumi.
- ③ Šildyklė.

**⚠ DĖMESIO!** Nesinaudokite pagalvėle be užvalkala. Leiskite orui laisvai cirkuliuoti tarp pagalvėlės ir odos paviršiaus. Nesinaudokite su aralu. Prietaiso nenaudoti gyvūnams šildyti.

1. Ištieskite užvalkalą ① ant lygaus paviršiaus. Atsekite užtrauktuką.
2. Įkiškite šildyklę į užvalkalą ③. Atkreipkite dėmesį, ar laidas ir reguliavimo pultas ② liko užvalkalo išorėje.
3. Gulėdama ant plokštumos pagalvėlė turi užpildyti visą užvalkalo vidų. Užsekite užtrauktuką.
4. Įjunkite kištuką į 220-240V kintamos srovės rozetę. Regulatoriaus rankenėlę nustatykite pagal norimą šilumą.
  - Nustatčius regulatoriaus rankenėlę į bet kurią darbinę padėtį, užsižiebia lemputė, parodanti, kad prietaisas įjungtas į tinklą ir veikia.
  - Padėtis «1» nustato nepertraukiamo naudojimo režimą.
  - Šildyklę išjunkite pastumdami regulatoriaus rankenėlę į «0» padėtį. Lemputė užges.
5. **Pagalvėlė automatiškai išsijungia apytikriai po 90-ties minučių.** Tačiau lemputė tebešviečia. Norint nustatyti naują šildymo ciklą, būtina reguliavimo rankenėlę nustumti į padėtį «0» ir vėl iš naujo į norimą šildymo padėtį.
6. Pasinaudoję šildykle, ištraukite kištuką iš rozetės.

## 2. Valymo instrukcijos

**⚠ DĖMESIO!** Prieš valydami pledą jį būtina išjunkite iš maitinimo tinklo

1. Užvalkalas, nuimtas nuo šildyklės, gali būti skalbiamas skalbyklėje laikantis gamintojo nurodymų ant etiketės.
  2. Pačią šildyklę skalbti ar sausai valyti draudžiama! Sausą prietaisą galima valyti šepetėliu.
  3. Neleiskite reguliavimo pultui sudrėkti. Nenaudokite tirpiklių ar detergentų – jie sugadins prietaisą.
  4. Jokiū būdu nermkite reguliavimo pulto į vandenį. Drėgmė, patekusi į vidų, sugadins prietaisą.
  5. Patikrinę, ar reguliavimo pultas nepažeistas, išdžiovinę šildyklę bei jos užvalkalą, galite įjungti ją vėl.
- ☞** Vaikai be priežiūros negali valyti šildyklės.

## 3. Simbolių reikšmė

	Skalbti 40°C temperatūros vandenyje!		Nelyginti!
	Neskalbti!		Sausas valymas draudžiamas!
	Negalima naudoti baliklių!		Džiovinoti skalbinių džiovyklėje!
	Lyginti nekarštu lygintuvu!		Nedžiovinoti skalbinių džiovyklėje!

## 4. Garantija

Prietaisui suteikiama 2 metų **garantija** nuo pardavimo datos. Garantija taikoma elektroniniam reguliavimo pultui, laidui bei šildyklei. Garantija negalioja pažeidimams, kuriuos sukėlė netaisyklingas naudojimas, avarijos, naudojimo instrukcijų nesilaikymas arba trečių asmenų atlikti prietaiso pakeitimai. **Garantija galioja tik pateikus užpildytą garantijos kortelę ir pirkinio čekį.**

## 5. Techninės specifikacijos

**Modelis:** FH 600  
**Įtampa:** 220 - 240 V   
**Galingumas:** 50 W  
**Dažnis:** 50 Hz

Galimi techniniai pakeitimai.

## 6. [www.microlife.lt](http://www.microlife.lt)

Platesnė informacija apie mūsų produktus ir paslaugas pateikiama internete adresu [www.microlife.lt](http://www.microlife.lt).

# Svarīga informācija – saglabāt turpmākajai izmantošanai!

LV

• Pirms lietojat šo ierīci, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

• Šī ierīce nav paredzēta medicīniska rakstura izmantošanai slimnīcās. Paredzēta lietošanai tikai mājās apstākļos!

• Lai izvairītos no elektriskā šoka, izmantojot sildītāju, ievērojiet šādus norādījumus:

- Nelietojiet sildītāju, ja tas ir slapjš. Pirms lietošanas sildītājam jābūt pilnībā izžuvētam.
- Izmantojiet sildītāju tikai sausās istabās, nevis, piemēram, vannas istabā!
- Katru reizi, pirms lietojat sildītāju, pārlicinieties, ka tas nav bojāts, t.i. neizmantojiet sildītāju, ja novēroti manuālās vadības, pārslēgta, kontaktakšas vai sildītāja bojājumi.
- Nedurties ar adatām vai citiem asiem priekšmetiem.

• Lai izvairītos no pārmērīgas sakaršanas:

- Neatstājiet sildītāju ieslēgtu bez uzraudzības; atstājot telpu, izslēdziet to.
- Neizmantojiet sildītāju, ja tas ir salocīts.
- Sildītājs nedrīkst būt saburzīts.
- **Nepārkāpiet manuālās vadības slēdzi!** Lai nodrošinātu pareizu manuālās vadības darbību, nelietojiet to virs vai zem sildošā spilvena, kā arī nenosēgt ar citiem objektiem.
- Vads nedrīkst būt aptīts ar manuālās vadības slēdzi.

• Neizmantojiet šo ierīci cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bērniem, pret siltumu nejutīgiem cilvēkiem vai dzīvniekiem. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.

• Pārlicinieties, ka bērni neizmanto šo ierīci bez uzraudzības. Bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst lietot šo ierīci, ja vien vecāki vai aizbildnis vai uzstādītāji vadības ierīci viszemākā temperatūras uzstādījumā 1.

• Šo ierīci drīkst lietot bērni, kuri ir 8 gadus veci vai vecāki, kā arī cilvēki, kuriem pazeminātas fiziskās, sensorās vai mentālās spējas, kā arī neadekvāta pieredze un/vai zināšanas, ņemot vērā nosacījumu, ka viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti, kā droši lietot šo ierīci, kā arī apzinās esošos bīstamības riskus.

• Pārmērīga ierīces izmantošana lielā karstuma iestatījumā var izraisīt ādas apdegumus.

• Ja ierīce tiek lietota, uzstādot pārmērīgi lielu sildīšanas iestatījumu, tad tā var izraisīt ādas apdegumus.

• Bieži pārbaudiet ierīci, lai pārlicinātos, vai nav novērojamas nolietojuma vai bojājuma pazīmes. Ja ierīce vērojamas nolietojuma vai bojājuma pazīmes, vai ierīce tikusi nepareizi izmantota, lūdzu, pirms turpmākas lietošanas, sazinieties ar ražotāju vai oficiāli pilnvarotu personu.

• Ja ir bojāts padeves vads, tas jānomaina ražotājam, oficiāli pilnvarotai personai vai līdzīgi kvalificētam darbiniekam, lai izvairītos no iespējamā riska.

• Neatveriet vai nelabojiet ierīci pats. Ierīces demontēšanai nepieciešami speciāli darbarīki.

• Ierīce izstaro vāju elektrisko un magnētisko lauku, kas var traucēt sirds stimulatora darbību. Tādēļ pirms ierīces lietošanas iesakam konsultēties ar ārstu un sirds stimulatora ražotāju.

• Laikā, kad ierīce netiek lietota, uzglabāt to sausā vietā, oriģinālajā iepakojumā. Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus.

**⚠ Nav piemērots bērniem līdz 3 gadu vecumam!** Bērni, kas ir jaunāki par 3 gadiem, nespēj reaģēt uz pārkarsēšanu.

**⚠** Elektroniskās ierīces izmantojiet saskaņā ar vietējiem spēkā esošajiem noteikumiem, nevis kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.

## 1. Kā lietot Microlife kāju sildītājs



- 1 Mikstā auduma pārvalks – noņemams un paredzēts mazgāšanai veļas mazgājamajā mašīnā. Rāvējslēdzējs.
- 2 Manuālā vadība ar pārslēgu un ieslēgšanas (ON) indikatoru.
- 3 Sildītājs

**⚠ BRĪDINĀJUMS:** Neizmantojiet sildītāju bez pārvalka. Lietošanas laikā atstājiet nelielu vietu gaisa cirkulācijai starp sildītāju un ādas virsmu. Nelietojiet kopā ar korpūm.

Ierīci nedrīkst lietot dzīvnieku sildīšanai.

1. Izklājiet auduma pārvalku ① uz līdzenas virsmas. Atvērt rāvējslēdzēji.
2. Ievietoj sildītāju ③ pārvalkā pilnībā, līdz viena puse pilnībā pielāgojas. Pārlicinieties, vai vads un manuālā vadība ② atrodas ārpus pārvalka.
3. Sildītājs būs līdzens, aizplidot visu pārvalku. Aizvērt rāvējslēdzējus.
4. Iespraust kontaktakšas 220-240 Voltu sprieguma kontaktlīdzādā un iestatīt manuālo vadību vēlamajā sildīšanas režīmā, izmantojot pārslēgu
  - Izvēlēties temperatūras iestatījumus uz pārslēga – tā tiek ieslēgts sildītājs. Indikators būs apgaismots, norādot, ka ierīce ir pievienota strāvai un ir ieslēgta.
  - Ilgstošai lietošanai ieteicams izmantot 1. iestatījumu.
  - Sildītāju izslēdz, pārbīdot pārslēgu «0» pozīcijā. Indikators vairs netiek apgaismots.
5. **Manuālā kontrole automātiski izslēgs sildītāju pēc apmēram 90 minūtēm.** Tajā pašā laikā indikators būs izgaismots. Lai iestatītu laika regulatoru citā režīmā un izsāktu nākamo sildīšanas periodu, pārbīdīt pārslēgu uzslēgšanas «0» pozīcijā un tad atpakaļ uz vēlamo siltuma iestatījumu.
6. Atvienojiet no strāvas pēc tam, kad vairs nevēlaties veikt sildīšanu.

## 2. Kopšanas pamācība

**⚠ BRĪDINĀJUMS:** Pirms tīrīšanas pārlicināties, vai kontaktakšas neatrodas kontaktlīdzādā.

1. Pēc noņemšanas no sildītāja pārvalku drīkst mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā, ievērojot norādījumus, kas pievienoti pārvalkam.
  2. Sildītājs nav piemērots mazgāšanai veļas mazgājamajā mašīnā vai ķīmiskajai tīrīšanai!  
To var tīrīt ar suku, ja atrodas sausā stāvoklī.
  3. Nesasalpināt manuālo vadību. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, jo tie var radīt bojājumus.
  4. Nekādā gadījumā neiegremdēt manuālo vadību zem ūdens. Pretējā gadījumā ūdens var nokļūt manuālās vadības sistēmā un radīt bojājumus.
  5. Pārlicināties, vai manuālā rokas vadība nav bojāta. Pirms lietošanas pilnībā izžvēt sildītāju un tā auduma pārvalku.
- 👉 Tīrīšanu un lietotāja veiktu uzturēšanu nedrīkst veikt bērni, ja netiek uzraudzīti.

## 3. Simbolu skaidrojums

	Mazgāt 40 °C temperatūrā!		Negrudināt!
	Nemazgāt!		Nepakļaut ķīmiskajai tīrīšanai!
	Nav atļauta balināšana!		Žāvēt veļas žāvētājā!
	Gludināt zemā temperatūrā!		Nežāvēt veļas žāvētājā!

## 4. Garantija

Šai precei ir 2 gadu garantija no iegādes dienas. Šī garantija attiecas uz elektroniskās manuālās vadības, vada un sildītāja bojājumiem. Nepareiza lietošana, negadījumi vai bojājumi, kas radušies, neievērojot lietošanas noteikumus, vai ierīces labojumi, ko nav veicis ražotājs, uz garantijas noteikumiem neattiecas. **Garantija ir derīga, uzrādot pārstāvja aizpliddu garantijas talonu.**

## 5. Tehniskās specifikācijas

Modelis:	FH 600
Spriegums:	220 - 240 V
Jauda:	90 W
Frekvence:	50 Hz

Tiek saglabātas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

## 6. www.microlife.lv

Sīkāka šī produkta lietošanas instrukcija un mūsu piedāvātie pakalpojumi pieejami tīmekļa vietnē [www.microlife.lv](http://www.microlife.lv).

- Enne seadme kasutust lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
- See seade ei ole mõeldud kasutuseks haiglates. Kasutada ainult kodustes tingimustes!
- Et vältida soojenduskoti kasutamise ajal elektrilöögi ohtu, võtke kasutusele järgmist ettevaatusabinõud:
  - Ärge kasutage märga soojenduskotti. Kui soojenduskott on saanud märjaks või niiskeks, kuivatage see enne kasutust täielikult.
  - Kasutage soojenduskotti ainult kuivades ruumides, ärge kasutage seda näiteks vannitoas!
  - Kontrollige enne iga kasutust, et soojenduskott oleks terve. Ärge kasutage seda, kui soojaregulaatoril, lülilitel, pistikul või soojenduspadjal endal on nähtavaid kahjustusi.
  - Ärge torgake soojenduskoti sisse nõelu ega muid teravaid esemeid.
- Et vältida ülekuumenemist:
  - Ärge jätke sisselülitatud soojenduskotti järelevalveta. Toast lahkudes lülitage see välja.
  - Ärge kasutage soojenduskotti voldituna.
  - Vältige soojenduskoti kortsutamist.
  - **Ärge katke soojaregulaatorit kinni!** Et soojaregulaator toimiks õigesti, ärge asetage seda soojenduskoti peale või alla või ärge katke seda teiste objektidega.
  - Ärge laske juhtmel keeruda ümber soojaregulaatori.
- Mitte kasutada liikumisvõimetu inimese, imiku, kuumuse suhtes tundetu inimese või loomade puhul. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada. Alla 8 aastased lapsed ei tohi seadet kasutada kui just ei juhtu olema vanemate või eestkostja kontrolli all seatud madalaima temperatuuri astmel 1.
- Seadet võivad kasutada 8 aastased või vanemad lapsed ja inimesed kellel on alanenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või ebaadekvaatne kogemus ja/või teadmised, tuleks juhendada või instrueerida kuidas ohutult seadet kasutada ja mõistaksid sellest tulenevat ohtusid.
- Kui suurel kuumusel olev soojenduskott jätta peale liiga kauaks, võib see põhjustada nahapõletusi.
- Kui seadet on kavas kasutada pikemat aega, näiteks kui võib juhtuda, et kasutaja jääb magama, tuleb lüliti seada kestvaks kasutamiseks sobivale töörežiimile.
- Kontrollige seadet sageli võimalike kulumisnähtude ja kahjustuste osas. Kui täheldate soojenduskoti kulumisnähte, kahjustusi või on seda valesti kasutatud, pöörduge palun enne edasist kasutust tootja või ametliku müügiesindaja poole.
- Ohutuse tagamiseks peab kahjustunud voolujuhtme asendamata tootja, ametlik müügiesindaja või analoogsed kvalifikatsiooniga isik.
- Ärge püüdke seadet ise osadeks võtta ega parandada. Seadme kokkupanemiseks on vaja spetsiaalseid tööriistu.
- See seade kiirgab väga nõrka elektri- ja magnetvälja, mis võib omada mõju teie südamestimulaatorile. Seetõttu soovitate enne seadme kasutamist pidada nõu oma arstiga ja stimulaatori tootjaga.
- Laske seade ära jätta enne, kui selle kokku voldite ja kuiva kohta seisma panete. Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid.

## 1. Kuidas Microlife jalasoojendit kasutada



- 1 Pehmest riidest kate – eemaldatav ja pesumasinas pestav. Lukk.
- 2 Soojaregulaatori liugnupp kuumusastme valikuks ja «SISSELÜLITATUD» indikaator.
- 3 Soojenduskott



**HOIATUS:** Ärge kunagi kasutage soojuskotti ilma riidekatteta.

Võimaldage soojenduskoti ja naha vahele õhuringlust. Mitte kasutada jalatsitega.

Seadet mitte kasutada loomade soojendamiseks.

1. Asetage riidekate (1) lamedale pinnale. Avage lukk.
2. Asetage soojenduskotti (3) täielikult kätte sisse, sobitades küljed ükshaaval. Kontrollige, et juhe ja soojusregulaator (2) jääksid kättest välja.
3. Soojenduskott asetub siledalt, täites kogu kätte. Sulgege lukk.
4. Ühendage soojenduskott 220-240 V vahelduvvoolu võrku ja valige soojaregulaatori liugnupu abil sobiv kuumus.
  - Valige liugnupuga temperatuur – soojenduskott lülitub sisse. Süttiv signaallülit näitab, et soojenduskott on vooluvõrgu ühendatud ja sisse lülitatud.
  - Kestvaks kasutamiseks sobib töörežiim 1.
  - Soojenduskoti saab välja lülitada, kui lükata liugnupp «0» asendisse, signaallülit kustub.
5. **Soojaregulaator lülitab kültehega ligikaudu 90 minuti möödudes automaatselt välja.** Signaallülit jääb aga põlema. Et taimerit ümber seada ja alustada uut soojendamist, liigutage liugnupp väljalülitatud «0» asendisse ja seejärel tagasi soovitud kuumusele.
6. Kui olete lõpetanud, ühendage seade vooluvõrgust lahti.

## 2. Puhastamisjuhised



**HOIATUS:** enne kui hakkate toodet puhastama, ühendage see vooluvõrgust lahti.

1. Eemaldatavat kate võib pesumasinas pesta, kui olete enne sellest soojenduskoti välja võtnud. Täpsemat teavet vaadake kaamel toodud pesemisjuhistest.
2. Soojenduskoti ei tohi pesumasinas pesta ega kuiv-puhastada! Kuivalt võib seda puhastada harjaga.
3. Ärge laske soojaregulaatoril saada märjaks. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid, need võivad seadet kahjustada.
4. Ärge ühelgi juhul hoidke soojaregulaatorit veel all. Niiskus võib siseneda soojaregulaatorisse ja seda kahjustada.
5. Enne soojenduskoti sisse lülitamist kontrollige soojaregulaatorit kahjustuste osas ning kuivatage soojenduskotti ja selle riidekate täielikult.



Puhastust ja hooldust ei tohi teostada lapsed ilma hool-dajate järelevalveta.

## 3. Sümbolite tähendused



Pesta 40 °C vees!



Mitte triikida!



Mitte pesta!



Mitte keemiliselt puhastada!



Valgendamine keelatud!



Trummelkuivatus!



Triikida madalal temperatuuril!



Mitte kuivatada trummelkuivatis!

## 4. Garantii

Sellele tootele on antud **2-aastane** garantii, mis algab ostukuupäevast. Garantii hõlmab soojaregulaatorit, kaablit ja soojenduskotti. Garantii ei kata seadme valest käsitsemisest, õnnetusjuhtumitest või kasutusjuhendi eiramisest tekitatud kahjustusi. Garantii ei kehti, kui seadmet on muudnud keegi teine, va tootja. **Garantii kehtib ainult müügiesindaja täidetud garantiikaardi ette näitamisel.**

## 5. Tehnilised andmed

**Mudel:** FH 600  
**Pinge:** 220 - 240 V   
**Võimsus:** 50 W  
**Voolusagedus:** 50 Hz

Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.

## 6. www.microlife.ee

Üksikasjaliku informatsiooni meie toodete ja teenuste kohta leiate veebilehelt [www.microlife.ee](http://www.microlife.ee).

- Моля прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате уреда.
- Този уред не е предназначен за медицинска употреба в болници. Само за домашна употреба!
- За да избегнете електрически удар, когато използвате уреда, спазвайте следното:

- Не използвайте, ако е мокър. Ако уредът се е навлажнил или намокрил, изсушете го напълно преди употреба.
- Използвайте уреда само в сухи стаи, не в бани и др!
- Преди всяка употреба проверявайте дали уредът не е повреден, тоест не използвайте, ако има видима повреда на ръчното управление, превключвателите, контакта или самия уред.
- Не пробждайте с игли или други остри предмети.

**• За да избегнете прегряване:**

- Не оставяйте уредът включен без наблюдение; изключвайте го, когато напускате стаята.
- Не го използвайте прегрянат.
- Не огъвайте уреда.
- **Не покривайте ръчното управление!** За да гарантирате, че ръчното управление работи правилно, не го поставяйте върху или под възглавницата, или не го покривайте с други предмети.

- Кабелът не трябва да е увит около ръчното управление.

- **Не използвайте при бебета, при обездвижени или нечувствителни към топлина хора, или при животни.** Не позволявайте на децата да играят с устройството.
- **Не позволявайте на деца да използват прибора без родителски контрол.** Деца под 8-годишна възраст не трябва да използват това устройство, освен ако родителя или настойника не е поставил ръчното управление на най-ниската температурна степен 1.

- Това устройство може да се използва от деца на възраст 8 или повече години и от хора, които са с намалени физически, сензорни или умствени способности или недостатъчно опит и / или познания, при условие те са под надзор или са били инструктирани как да използват устройството безопасно и са разбрали произтичащите опасности.

- **Безопасната употреба на уреда на висока степен може да предизвика изгаряния на кожата.**


- **Когато е вероятно използването на този уред за продължително време, например, когато потребителят заспи, настройките трябва да се регулират според препоръчаните за продължителна употреба.**


- **Проверявайте често уреда за признаци на износване или повреда.** Ако има признаци на износване или повреда, или уредът е употребяван неправилно, моля свържете се с оторизиран представител, преди да продължите употребата.

- **Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде заменен от производителя, оторизиран представител или лица с подобна квалификация, за да се избегнат рискове.**

- **Не се опитвайте да отваряте или поправяте уреда сами.** За сглобяване на уреда са необходими специални инструменти.

- **Този уред излъчва много слаби електрически и магнитни полета, които могат да нарушат функцията на вашия сърдечен пейсмейкър.** Ето защо, ние Ви препоръчваме да се консултирате с Вашия лекар и производителя на сърдечния пейсмейкър преди да използвате този уред.
- **Оставете устройството да изстине преди да го приберете и съхраняйте на сухо място.** Не поставяйте тежки предмети върху него, за да се предотврати деформиране.


 **Не е подходящ за деца на възраст между 0-3 години!** Деца под 3-годишна възраст не са в състояние да реагират на прегряване.

 Електронните уреди трябва да се изхвърлят съгласно местните приложими разпоредби, а не с битовите отпадъци.

## 1. Как да използвате Microlife нагревател за крака



- ① Калъф от мек плат – може да се маха и пере в пералня. Цип.
- ② Ръчно управление с плъзгач за настройка на отопление и индикатор ON (Включено). Нагряваща подложка
- ③

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогa не използвайте уреда без калъф.

Трябва да има циркулация на въздуха между уреда и кожата по време на употреба.

Да не се използва с обувки.


Не използвайте уреда за затопляне на животни.

1. Поставете калъфа ① на равна повърхност. Отворете ципа.
2. Поставете уреда ③ изцяло в калъфа, като напасвате всяка страна поотделно. Уверете се, че кабелът и ръчното управление ② остават извън калъфа.
3. Уредът трябва да е равен и да изпълва целия калъф. Затворете ципа.
4. Включете към контакт 220-240 волта и настройте ръчното управление на желаната степен за затопляне, използвайки плъзгача.


- Изберете температурата с плъзгача – така се включва уреда. Ще светне индикатор, който показва, че уредът е свързан към захранването и е включен.
- Положение 1 се препоръчва за продължителна употреба.
- Уредът се изключва като преместите плъзгача в положение «0», при което индикаторът ще загасне.

5. **Ръчното управление ще изключи автоматично нагряването след около 90 минути.** Въпреки това, индикаторната лампичка продължава да свети. За да нулирате таймера и започнете нов период на нагряване, преместете плъзгача до положение «0» (изключено) и след това обратно до желаната настройка за нагряване.
6. Изключете уреда от контакта, когато вече не го ползвате.







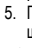

## 2. Инструкции за почистване

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги изключвайте захранващия кабел от контакта, преди да започнете да почиствате уреда.

1. Калъфата може да се пере, като преди това извадите уреда от нея. Спазвайте инструкциите за пране посочени на опаковката.
2. Електрическото тяло на уреда не трябва да се пере в пералня или да се дава на химическо чистене! Може да се почисти със суха четка.
3. Не мокрете ръчното управление. Не използвайте препарати или разтворители, те могат да повредят уреда.
4. В никакъв случай не дръжте ръчното управление под вода. В противен случай може да влезе вода в него и да го повреди.
5. Проверете дали ръчното управление не е повредено, изсушете напълно уреда и калъфа, преди да го включите отново.

 Почистване и поддръжка не се извършват от деца без надзор.

## 3. Обяснение на символите

- |   |   |
|---|---|
|  Перете на 40 °C!              |  Не гладете!                               |
|  Не перете!                    |  Да не се почиства чрез химическо чистене! |
|  Не се разрешава изелбване!    |  Може да се суши в сушилня!                |
|  Гладете на ниска температура! |  Не сушете в сушилня!                      |

#### 4. Гаранция

---

Този продукт има гаранция **2 години** от датата на покупка. Тази гаранция покрива електронното ръчно управление, кабела и самата възглавница. Тази гаранция не покрива неправилна употреба, злополука или повреда вследствие на неспазени инструкции или модификации на уреда, които не са извършени от производителя.

**Гаранцията е валидна само при представяне на гаранционната карта попълнена от търговеца.**

#### 5. Технически спецификации

---

**Модел:** FH 600

**Напрежение:** 220 - 240 V

**Мощност:** 50 W

**Честота:** 50 Hz

Запазва правото си на технически промени.

#### 6. [www.microlife.bg](http://www.microlife.bg)

---

Подробна информация за нашите продукти и услуги може да се намери на адрес [www.microlife.bg](http://www.microlife.bg).

• **Vă rugăm citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza acest produs.**

• **Acest produs nu este destinat utilizării în scopuri medicale în spitale. Este destinat numai pentru utilizarea la domiciliu!**

• **Pentru a evita orice risc de electrocutare în timpul utilizării, vă rugăm respectați următoarele:**

- Nu o utilizați dacă este umedă. Dacă perna devine umedă sau udă, uscați-o complet înainte de utilizare.
- Utilizați perna numai în încăperi uscate, nu în baie sau alte asemenea locuri!
- Înainte de fiecare utilizare verificați ca perna să nu fie deteriorată, pentru a nu exista defecte vizibile la comanda manuală, întrerupătoare, ștecher sau la perna însăși.
- Nu o înțeptați cu ace sau alte obiecte ascuțite.

• **Pentru a evita încălzirea excesivă:**

- Nu lăsați perna pomită și nesupravegheată; opriți-o în momentul în care părăsiți încăperea.
- Nu utilizați perna împăturită.
- Evitați formarea de cute.
- **Nu acoperiți comanda manuală!** Pentru a asigura funcționarea corectă a comenzii manuale, nu o plasați deasupra sau dedesubtul păturii electrice și nu o acoperiți cu alte obiecte.
- Cablul nu trebuie înfășurat în jurul comenzii manuale.

• **A nu se utiliza pe persoane incapabile să se miște, pe bebeluși, pe persoane insensibile la căldură sau pe animale.** Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.

• **Aveți grijă să nu lăsați produsul nesupravegheat la îndemâna copiilor.** Copiii sub 8 ani nu trebuie să utilizeze acest aparat decât dacă un părinte sau supraveghetor a setat cea mai joasă temperatură, și anume reglajul 1.

• Acest aparat poate fi utilizat de către copii sub 8 ani sau de către persoane cu posibilități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau cu insuficientă experiență și/sau cunoștințe dobândite, decât sub supraveghere sau dacă li s-a explicat modul de utilizare în siguranță și au înțeles posibilele pericole.

• **Aplicarea excesivă la un nivel ridicat poate duce la arsuri ale pielii.**

• **Atunci când este probabil ca produsul să fie folosit o perioadă mai lungă de timp, de exemplu de către un utilizator care este pe cale să adoarmă, dispozitivele de control trebuie poziționate pe un reglaj recomandat pentru utilizare continuă.**

• **Verificați frecvent produsul pentru a observa semnele de uzură sau deteriorare.** Dacă există semne de uzură sau deteriorare, sau dacă aparatul a fost utilizat incorect, vă rugăm contactați producătorul sau agentul autorizat înainte de a-l mai utiliza.

• **Dacă este deteriorat cablul de alimentare, trebuie înlocuit de producător, un agent autorizat al acestuia sau de o persoană calificată în acest sens, pentru a evita orice pericol.**

• **Nu încercați să desfaceți sau să reparați aparatul dvs.** Este nevoie de instrumente speciale pentru a reasambla produsul.

• **Acest produs emite câmpuri electrice și magnetice foarte slabe, care pot disturba funcționarea stimulatoarelor cardiace.** De aceea, vă recomandăm să consultați medicul sau producătorul stimulatorului dvs. cardiac înainte de utilizarea acestui produs.

• **Lăsați produsul să se răcească înainte de a-l împături și a-l depozita într-un loc uscat.** Nu așezați obiecte grele deasupra.

**⚠ Nerecomandat copiilor între 0-3 ani!** Copiii sub 3 ani nu pot reacționa la supraîncălzire.

**🔧** Instrumentele electronice trebuie salubritate în concordanță cu reglementările locale în vigoare, și nu împreună cu deșeurile menajere.

## 1. Modul de utilizare a încălzitorului pentru picioare Microlife



- Înveliș din material textil moale – se poate detașa și spăla în mașina de spălat. Fermoar.
- Comandă manuală cu cursor pentru reglarea căldurii și indicator Pomit.
- Pernă

**⚠ ATENȚIE:** Nu utilizați niciodată perna fără învelișul din material textil. Lăsați să circule puțin aer între perna și pielea pe durata utilizării.

Nu utilizați atunci când purtați pantofi. Aparatul nu este destinat încălzirii animalelor.

- Puneți învelișul din material textil (1) pe o suprafață plană. Deschideți fermoarul.
- Introduceți perna (3) complet în înveliș, potrivit fiecare parte, pe rând. Verificați cablul și comanda manuală (2) să rămână în afara învelișului.
- Perna va sta întinsă uniform, umplând întregul înveliș. Închideți fermoarul.
- Introduceți ștecherul într-o priză de 220-240 V CA și reglați comanda manuală la nivelul dorit cu ajutorul cursorului.
  - Selectați nivelul de temperatură cu ajutorul cursorului – astfel se pornește perna. Se va aprinde un indicator luminos, indicând faptul că aparatul este conectat la tensiunea de alimentare și este pomit.
  - Reglajul 1 este recomandat pentru utilizare continuă.
  - Perna se oprește prin mutarea cursorului pe poziția «0», apoi indicatorul se va stinge.
- Comanda manuală va opri automat aparatul după aproximativ 90 de minute.** Cu toate acestea, lampa indicatoare va rămâne aprinsă. Pentru a reseta cronometrul și a începe o nouă perioadă de încălzire, mutați cursorul pe poziția oprit «0» și după aceea înapoi la nivelul dorit de încălzire.
- Scoateți din priză la finalul utilizării.

## 2. Instrucțiuni privind curățarea

**⚠ ATENȚIE:** Întotdeauna scoateți din priză cablul de alimentare înainte de a efectua curățarea produsului.

- Învelișul detașabil poate fi spălat în mașina de spălat rufe după scoaterea de pe pernă, în conformitate cu instrucțiunile de spălare prezentate pe înveliș.
- Perna nu trebuie spălată în mașina de spălat rufe sau curățată chimic!  
Se poate curăța uscat, cu o perie.
- Nu udați comanda manuală. Nu utilizați nici un fel de detergenți sau solvenți, pentru că aceștia pot deteriora produsul.
- Sub nici o formă nu introduceți comanda manuală în apă. În caz contrar, umezeala poate pătrunde în interiorul acesteia și duce la deteriorare.
- Verificați comanda manuală pentru semne de deteriorare. Uscați complet perna și învelișul său textil înainte de a o porni din nou.

**👉** Curățarea și întreținerea nu se face de către copii fără supraveghere.

## 3. Semnificația simbolurilor

- |  |                               |  |                                    |
|--|-------------------------------|--|------------------------------------|
|  | Spălați la 40 °C!             |  | Nu călcați!                        |
|  | Nu spălați!                   |  | Nu se curăță chimic!               |
|  | Nu înălbiți!                  |  | Uscare normală, prin centrifugare! |
|  | Călcați la temperatură joasă! |  | Nu uscați prin centrifugare!       |

#### 4. Garanția

---

Acest produs este garantat pentru **2 ani** de la data cumpărării. Garanția acoperă comanda manuală electronică, cablul și perna electrică în sine. Această garanție nu include utilizarea incorectă, accidentele sau daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor, sau modificările efectuate asupra aparatului de altcineva decât producătorul aparatului.

**Garanția este valabilă numai la prezentarea fișei de garanție completată de distribuitor.**

#### 5. Specificații tehnice

---

**Model:** FH 600  
**Voltaj:** 220 - 240 V   
**Putere:** 50 W  
**Frecvență:** 50 Hz

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice.

#### 6. [www.microlife.com](http://www.microlife.com)

---

Informații în detaliu pentru utilizatori cu privire la produsele și serviciile noastre pot fi găsite la [www.microlife.com](http://www.microlife.com)



# Důležité informace - uchovejte pro budoucí použití!


CZ

- Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Tento výrobek není určen k lékařskému použití v nemocnicích. Pouze k domácímu použití!
- Aby při používání podušky nedošlo k úrazům elektrickým proudem, dodržujte prosím následující:
  - Nepoužívat vlhké. Pokud poduška navlhne nebo se namočí, před použitím ji zcela vysušte.
  - Používat pouze v suchých místnostech, nikoliv v koupelně apod.!
  - Před každým použitím zkontrolujte, není-li poduška poškozená, to znamená nepoužívejte ji v případě viditelného poškození ručního ovládání, přepínačů, zátky nebo podušky samotné.
  - Nevkládejte špendlíky nebo jiné ostré předměty.
- Aby nedošlo k přehřátí:
  - Neponechávejte podušku zapnutou bez dozoru; pokud opouštíte místnost, vypněte ji.
  - Nepoužívejte podušku ve složeném stavu.
  - Dbejte, ať se netvoří přehyby.
  - **Nezakrývejte ruční ovládání!** Pro zajištění správné funkce ručního ovládání, neumísťujte ovládání na anebo pod podušku a nezakrývejte ho jinými předměty.
  - Kabel neomotávejte kolem ručního ovládání.
- Nepoužívat u osob neschopných pohybu, malých dětí, osob necitlivých na teplo ani u zvířat. Nedovolte dětem hrát si s přístrojem.
- Dbejte na to, aby přístroj nepoužívaly děti bez dohledu. Děti do 8 let nesmí používat tento přístroj; mohou ho použít jen v případě, že rodič nebo opatrovník nastaví nejnižší úroveň teploty 1.
- Tento přístroj může být používán u dětí od 8 let a u lidí, kteří mají sníženou fyzickou nebo mentální schopnost. Lidé s nedostatečnými zkušenostmi za předpokladu, že jsou pod dozorem anebo byli poučeni o tom, jak bezpečně používat zařízení a pochopit z toho vyplývající nebezpečí.
- **Nadměrné používání při vysokých teplotách může způsobit popáleniny.**
- **Pokud má být přístroj používán po delší dobu, např. u usínajícího uživatele, ovládání by mělo být nastaveno na doporučený režim pro nepřetržitě použití.**
- **Podušku často kontrolujte, není-li poškozená nebo opotřebená.** Vykazuje-li jakékoliv znaky opotřebení nebo poškození, nebo byl-li výrobek nesprávně použit, před jakýmkoliv dalším použitím kontaktujte výrobce nebo autorizovaného zástupce.
- **Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí se vyměnit za kabel dodaný výrobcem, autorizovaným zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k nebezpečí úrazu.**
- **Nepokoušejte se výrobek otevřít nebo sami opravit.** Pro zpětnou montáž je zapotřebí speciální nářadí.
- **Tento přístroj vydává velmi slabé elektrické a magnetické pole, které může rušit fungování Vašeho kardiostimulátoru.** Proto před používáním tohoto přístroje doporučujeme kontaktovat Vašeho lékaře a výrobce Vašeho kardiostimulátoru.
- **Před poskládáním a uložením na suchém místě nechte přístroj vychladnout.** Nepokládejte těžké předměty na zařízení proti vybočení.

**⚠ Není vhodné pro děti od 0-3 let!** Děti do 3 let nejsou schopné reagovat na přehřátí organismu.

**⚠** Elektronické přístroje nutno likvidovat v souladu s místními platnými předpisy, nikoliv s domácím odpadem.

## 1. Jak používat vyhřívací papuce Microlife

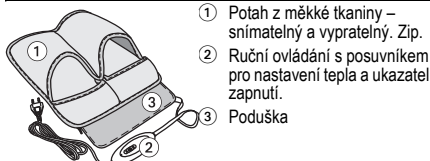

- 1 Potaž z měkké tkaniny – snímatelný a vypratelný. Zip.
- 2 Ruční ovládání s posuvníkem pro nastavení tepla a ukazatel zapnutí.
- 3 Poduška

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Podušku nikdy neužívejte bez potahu. Během používání zajistěte mezi poduškou a pokožkou příměrnou cirkulaci vzduchu. Nepoužívat s botama.

Poduška není určena k ohřívání zvířat.

1. Potaž ① položte na rovný povrch. Otevřít zip.
2. Podušku ③ zcela vložte do potahu a postupně upravte obě strany. Kabel a ruční ovládání ② ponechte mimo potah.
3. Poduška se rozloží a vyplní celý potah. Zavřít zip.
4. Zastrčte do zásuvky 220-240 V stříd. napětí a pomocí posuvníku ručního ovládání zvolte požadované teplotní nastavení.
  - Na posuvníku zvolte teplotní nastavení – tím se poduška zapne. Rozsvítí se kontrolka signalizující připojení spotřebiče k napájení a jeho zapnutí.
  - Pro nepřetržitě použití se doporučuje nastavení 1.
  - Poduška se vypíná přesunutím posuvníku do polohy «0», načež kontrolka zhasne.
5. **Ruční ovládání podušky automaticky vypne topné těleso za přibližně 90 minut.** Kontrolka však zůstane svítit. Pro vyresetování časovače a spuštění dalšího vyhřívání posuvník přesuňte do polohy «0» a poté zpět do požadovaného teplotního nastavení.
6. Po skončení vypněte.

## 2. Pokyny k čištění

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Před zahájením jakéhokoliv čištění výrobku napájecí kabel vždy odpojte od zdroje napětí.

1. Po sevednutí z podušky lze snímatelný potah vyprat dle pokynů uvedených na potahu.
2. Manžeta se nesmí mytí ani chemicky čistit! Může být čistěna kartáčem nasucho.
3. Dbejte, aby ruční ovládání nenavlhlo. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla, mohla by výrobek poškodit.
4. Ruční ovládání v žádném případě nenamáčejte. V opačném případě se do ručního ovládání může dostat vlhkost a způsobit škody.
5. Před opětovným zapnutím zkontrolujte stav ručního ovládání, důkladně vysušte podušku a její látkový potah.

**👉** Děti bez dozoru nesmí vykonávat čištění a údržbu.

## 3. Vysvětlení symbolů

Prát při maximální teplotě 40 °C!

Nežehlit!

Výrobek se nesmí prát!

Výrobek se nesmí chemicky čistit!

Výrobek se nesmí bělit!

Výrobek se může sušit v bubnové sušičce!

Žehlit při nízké teplotě!

Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce!

## 4. Záruka

Na tento výrobek se vztahuje záruka v délce 2 let od data nákupu. Tato záruka se vztahuje na elektronické ruční ovládání, kabel a podušku samotnou. Záruka se nevztahuje na nesprávné použití, nehody nebo poškození v důsledku nedodržování pokynů či úprav výrobku neprovedených výrobcem.

**Záruka je platná pouze po předložení záručního listu vyplněného dealerem.**

## 5. Technické specifikace

**Model:** FH 600  
**Napětí:** 220 - 240 V

**Spotřeba:** 50 W  
**Frekvence:** 50 Hz

Práva na technické změny vyhrazena.

## 6. www.microlife.cz

Podrobné uživatelské informace o našich výrobcích a službách lze nalézt na [www.microlife.cz](http://www.microlife.cz).

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod.
- Tento výrobok nie je určený na lekárske použitie v nemocniciach. Len na domáce použitie!
- Aby ste pri používaní tejto podušky zamedzili úrazu elektrickým prúdom, dodržujte nasledovné:
  - Nepoužívajte vlhké. Ak sa poduška premočila alebo navlhla, úplne ju pred používaním vysušte.
  - Podušku používajte iba v suchých miestnostiach, nie v kúpeľni a podobne!
  - Pred každým používaním skontrolujte, či nie je poduška poškodená, to znamená nepoužívajte ju v prípade viditeľných poškodení ručného ovládača, spínačov, vidlice alebo samotného výrobku.
  - Nepevhujte špendlíky ani iné ostré predmety.

## • Aby ste zamedzili prehriatiu:

- Nenechávajte podušku zapnutú bez dozoru; keď opúšťate miestnosť, vypnite ju.
- Nepoužívajte podušku prehnúť.
- Zamedzte pokrčeniu podušky.
- **Nezakrývajte ručný ovládač!** Aby ste zabezpečili správnu funkčnosť ručného ovládača, neumiestňujte ho na alebo pod podušku a nezakrývajte ho inými predmetmi.
  - Kábel by sa nemal omotávať okolo ovládača.
- **Nepoužívajte u imobilných osôb, detí, u osôb necitlivých na teplo a u zvierat.** Nedovoľte deťom hrať sa s prístrojom.
- **Zaistite, aby deti nepoužívali tento prístroj bez dozoru.** Deti do 8 rokov nesmú používať tento prístroj; môžu ho použiť iba v prípade, že rodič alebo opatrovník nastavil najnižšiu úroveň teploty 1.
- Tento prístroj môže byť používaný u detí vo veku 8 a viac rokov a u ľudí, ktorí majú zníženú fyzickú alebo mentálnu schopnosť, alebo nedostatočné skúsenosti za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučení o tom, ako bezpečne používať zariadenie a pochopiť z toho vyplývajúce nebezpečenstvo.
- **Prilíh dlhé používanie pri nastavení na vysoký výkon môže viesť k popáleniu kože.**
- **Ak chcete výrobok používať dlhšiu dobu, napríklad ak je používateľ ospalý, ovládacie prvky by ste mali upraviť na nastavenie, ktoré je odporúčané na nepretržité použitie.**
- **Pravidelne výrobok kontrolujte, či nevykazuje znaky opotrebovania alebo poškodenia.** Ak sa vyskytnú znaky opotrebovania alebo poškodenia, alebo sa výrobok nepoužíva správne, kontaktujte prosím pred jeho ďalším používaním výrobcu alebo autorizovaného zástupcu.
- **Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný zástupca alebo iná oprávnená osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.**
- **Nepokúšajte sa prístroj otvárať alebo opravovať sami.** Na opätovnú montáž je potrebné špeciálne náradie.
- **Tento prístroj vydáva veľmi slabé elektrické a magnetické polia, ktoré môžu rušiť fungovanie vášho kardiostimulátora.** Preto pred používaním tohto prístroja odporúčame kontaktovať vášho lekára a výrobcu vášho kardiostimulátora.
- **Prístroj nechajte pred skladaním a uskladnením najprv vychladnúť.** Na výrobok nepokladajte ťažké predmety, aby ste predišli jeho deformácii.

**!** Nie je vhodné pre deti od 0-3 rokov! Deti do 3 rokov nie sú schopné reagovať na prehriatie organizmu.

**!** Elektronické prístroje sa musia likvidovať v súlade s miestne platnými predpismi, nie s domácim odpadom.

## 1. Ako používať Microlife vyhrievacie papuče



- ① Mäkký látkový poťah – snímateľný, s možnosťou prať v práčke. Zips.
- ② Ručný ovládač s regulátorom nastavenia ohrievania a s indikátorom zapnutia.
- ③ Poduška

**!** **VAROVANIE:** Podušky nikdy nepoužívajte bez textilného poťahu. Počas používania umožnite, aby medzi vyhrievacou poduškou a kožou prúdil vzduch.

Nebuďte obutí.

Poduška nie je určená na ohrievanie zvierat.

1. Položte textilný poťah ① na rovnú plochu. Otvorte zips.
2. Celú podušku vložte ③ do poťahu pričom ju na jednej strane prichyťte. Uistite sa, že kábel a ručný ovládač ② zostali mimo poťahu.
3. Podušku nechajte vyrovnanú, aby vypĺňala celý poťah. Zatvorte zips.
4. Pripojte do sieťovej zásuvky na 220-240 V, striedavý prúd a nastavte ručný ovládač na požadovanú intenzitu vyhrievania.
  - Zvoľte nastavenie teploty na regulátore – takto vyhrievaciu podušku zapnete. Rozsvieti sa indikátor, ktorý zobrazuje pripojenie výrobku do siete a jeho zapnutie.
  - Nastavenie 1 vám odporúčame na nepretržité používanie.
  - Podušku je možné vypnúť nastavením regulátora do polohy «0», indikátor zhasne.
5. **Ručný ovládač podušky automaticky vypne vyhrievanie po približne 90 minútach.** Avšak v tomto prípade zostane indikátor stále rozsvietený. Ak chcete vynulovať časovač a spustiť novú vyhrievaciu fázu, posuňte regulátor do vypnutej polohy «0» a potom do požadovaného nastavenia intenzity vyhrievania.
6. Po ukončení odpojte od siete.

## 2. Pokyny na čistenie

**!** **VAROVANIE:** Pred akýmkoľvek čistením výrobku najskôr odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.

1. Poťah je možné po jeho zvlčení z podušky oprat' v práčke podľa pokynov prania uvedených na poťahu.
2. Poduška sa nesmie prať v práčke ani čistiť nasucho! Môže byť čistená kefou nasucho.
3. Nedovoľte, aby sa ručný ovládač namočil. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, pretože môžu zničiť výrobok.
4. Za žiadnych okolností nedrže ručný ovládač pod vodu. Ináč sa do ručného ovládača môže dostať vlhkosť a spôsobiť poškodenie.
5. Pred opätovým pripojením do siete skontrolujte ručný ovládač, či nejaví známky poškodenia, vysušte podušku a jej látkový poťah.

**!** Deti bez dozoru nesmú vykonávať čistenie a údržbu.

## 3. Vysvetlenie značiek

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Práť pri maximálnej teplotě 40 °C! | Nežehliť!                                   |
| Výrobok sa nesmie prať!            | Výrobok sa nesmie chemicky čistiť!          |
| Výrobok sa nesmie bieliť!          | Výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke!   |
| Žehliť pri nízkej teplote!         | Výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke! |

## 4. Záruka

Na prístroj sa vzťahuje **2 ročná záruka** od dátumu jeho kúpy. Táto záruka sa vzťahuje na elektronický ručný ovládač, kábel a samotnú podušku. Táto záruka sa nevzťahuje na nesprávne používanie, úrazy alebo poškodenia vplyvom nedodržania pokynov alebo vplyvom zmien výrobku, ktoré nevykonal výrobca. Záruka je platná iba na základe predloženia záručného listu vyplneného distribútorom alebo predajcom.

## 5. Technické údaje

**Model:** FH 600  
**Napätie:** 220 - 240 V   
**Spotreba:** 50 W  
**Frekvencia:** 50 Hz

Zmena technickej špecifikácie vyhradená.

## 6. [www.microlife.sk](http://www.microlife.sk)

Detailné užívateľské informácie ako o našich produktoch, tak aj službách môžete nájsť na [www.microlife.sk](http://www.microlife.sk).

- **Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo.**
- **Ovaj uređaj nije namenjen za medicinsku primenu u bolnicama: Namenjeno isključivo za kućnu upotrebu.**
- **Kako biste izbegli električni udar tokom korišćenja ovog grejača, molimo Vas da obratite pažnju na sledeće:**
  - Ne koristite grejač kada je mokar. Ukoliko je grejač vlažan ili mokar, potpuno ga osušite pre upotrebe.
  - Koristite grejač isključivo u suvim prostorijama, nikako u kupatilu.
  - Proverite da li je grejač neoštećen pre svake upotrebe, ne koristite ga ukoliko postoje vidljiva oštećenja na ručnom upravljaču, prekidačima, utikaču ili samom grejaču.
  - Ne ubadajte igle ili druge oštre predmete.
- **Kako biste izbegli pregrevanje:**
  - Ne ostavljajte grejač uključen bez nadzora; isključite ga kada napuštate prostoriju.
  - Ne koristite grejač kada je isključen.
  - Izbegavajte gužvanje grejača.
- **Ne prekrivajte ručni upravljač!** Kako biste obezbedili pravilan rad ručnog upravljača, ne postavljajte ga na ili ispod grejača, i ne pokrivajte ga drugim objektima.
  - Kabl ne sme biti omotan oko ručnog upravljača.
- **Ne koristite kod osoba koje ne mogu da se kreću, kod beba, kod osoba neosetljivih na zagrevanje ili kod životinja.** Ne dozvoljavajte deci da se igraju sa uređajem.
- **Obezbedite da deca ne koriste ovaj uređaj bez nadzora.** Deca starosti ispod 8 godina ne smeju koristiti ovaj uređaj ukoliko roditelj ili staratelj nije podesio upravljač na najniži stepen zagrevanja 1.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca koja imaju 8 i više godina, ljudi sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima, kao i ljudi sa nedovoljno iskustva i znanja, ukoliko se obezbedi nadzor ili adekvatna edukacija o bezbednoj upotrebi uređaja i ukoliko razumeju moguće opasnosti.
- **Preduaga upotreba na visokim temperaturama može uzrokovati opekotine na koži!**
- **Ukoliko je verovatno da će uređaj biti korišćen duži vremenski period, npr. ukoliko korisnik zaspi, upravljač treba podesiti na vrednost preporučenu za kontinuiranu upotrebu.**
- **Često pregledajte uređaj kako biste otkrili znake habanja ili oštećenja.** Ukoliko ima znakova habanja ili oštećenja ili je uređaj nepravilno korišćen, molimo Vas da kontaktirate proizvođača ili ovlašćenog distributera pre ponovne upotrebe.
- **Ukoliko je kabal za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, ovlašćeni serviser ili odgovarajuća kvalifikovana osoba kako bi se izbegle eventualne opasnosti.**
- **Nikada ne pokušavajte da otvorite ili popravite uređaj sami.** Za ponovno sklapanje uređaja potreban je poseban alat.
- **Ovaj uređaj emituje veoma slabo električno i magnetno polje koje može da ometa funkcionisanje Vašeg pejsmejkera.** Iz tog razloga, preporučujemo Vam da konsultujete svog lekara ili proizvođača pejsmejkera, pre upotrebe ovog uređaja.
- **Uređaj mora u potpunosti da se ohladi pre nego što ga odložite i čuvate na suvom mestu.** Ne stavljajte teške predmete na uređaj, kako biste izbegli savijanje.

- ⚠ Nije pogodno za decu mlađu od 3 godine!** Deca mlađa od 3 godine ne reaguju na pregrevanje.
- ⌚ Elektronski uređaji moraju biti odlagani u skladu sa lokalnim važećim propisima, ne sa komercijalnim otpadom.**

## 1. Kako koristiti Microlife grejač stopala



- 1 Navlaka od mekane tkanine - može se skidati i prati u mašini za veš. Zatvarač.
- 2 Ručni upravljač sa klizačem za podešavanje grejanja i indikator uključenosti.
- 3 Grejač

- ⚠ UPOZORENJE:** Nikada ne koristite grejač bez navlake od tkanine.
- Tokom upotrebe obezbedite cirkulaciju vazduha između grejača i kože.
- Ne koristiti sa cipelama.
- Zabranjeno korišćenje za zagrevanje životinja.

1. Postavite navlaku od tkanine ① na ravnu površinu. Otkopčajte zatvarač.
2. Postavite kompletan grejač ③ u navlaku podešavajući svaku stranu pojedinačno. Obezbedite da kabl i ručni upravljač ② ostanu van navlake.
3. Grejač će ležati ravno, ispunjavajući čitavu navlaku. Zatvorite zatvarač.
4. Uključite uređaj u utičnicu sa naponom od 220-240V i podesite ručni upravljač na željeni stepen zagrevanja, koristeći klizač.
  - Izaberite željenu temperaturu zagrevanja na klizaču – to će uključiti grejač. Indikator će svetleti, pokazujući da je uređaj povezan sa izvorom napajanja i uključen.
  - Položaj jedan 1 se preporučuje za kontinuiranu primenu.
  - Grejač se isključuje postavljanjem klizača u položaj «0». Tada će se i svetlo indikatora ugasiti.
5. **Ručni upravljač će automatski isključiti grejač nakon otprilike 90 minuta,** međutim, indikator će nastaviti da svetli. Da biste resetovali tajmer i započeli novi period grejanja, pomerite klizač u položaj za isključivanje «0» a zatim izaberite željenu temperaturu zagrevanja.
6. Isključite iz utičnice kada završite korišćenje.

## 2. Uputstvo za čišćenje

- ⚠ UPOZORENJE:** Uvek isključite kabl za napajanje iz utičnice pre nego što započnete bilo kakvo čišćenje uređaja.

1. Navlaka se može prati u mašini za veš, u skladu sa uputstvom za pranje na samoj navlaci, pošto se skine sa grejača.
2. Za grejač nije dozvoljeno ni pranje u mašini za veš, niti hemijsko čišćenje. Može se čistiti suvom četkom.
3. Ne dozvolite da se ručni upravljač pokvasi. Ne koristite deterdžente i rastvarače jer mogu oštetiti uređaj.
4. Nikada nemojte držati ručni upravljač pod vodom. Inače vlaga može ući u ručni upravljač i izazvati oštećenje.
5. Proverite da li ima znakova oštećenja na ručnom upravljaču. Osušite grejač i njegovu fabričku navlaku u potpunosti, pre nego što ponovo uključite uređaj.

- 👉 Deca ne smeju učestvovati u čišćenju i održavanju bez nadzora.**

## 3. Objašnjenje značenja simbola

- |  |                                |  |   |
|--|--------------------------------|--|---|
|  | Prati na 40 °C!                |  | Zabranjeno peglanje!                    |
|  | Zabranjeno pranje!             |  | Zabranjeno hemijsko čišćenje!           |
|  | Zabranjeno beljenje!           |  | Sušiti u mašini za sušenje veša!        |
|  | Peglati na niskoj temperaturi! |  | Zabranjeno sušenje u mašini za sušenje! |

## 4. Garancija

Aparat je pod garancijom **2 godina**, počev od datuma kupovine. Garancija se odnosi na ručni upravljač, kabl i sam grejač. Garancija ne uključuje slučajeve: nepravilne upotrebe, nezgoda ili oštećenja koja nastaju usled nepoštovanja uputstva za upotrebu ili promena na uređaju koje nije izveo sam proizvođač. **Garancija je validna jedino uz garantni list, popunjen od strane prodavca.**

## 5. Tehničke specifikacije

**Model:** FH 600  
**Napon:** 220 - 240 V   
**Snaga:** 50 W  
**Frekvencija:** 50 Hz

Zadržano pravo na tehničke izmene.

## 6. www.microlife.com

Detaljne informacije za korisnike o našim proizvodima i uslugama možete naći na adresi [www.microlife.com](http://www.microlife.com).

- Pažljivo pročitajte upute prije primjene ovog uređaja.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za medicinsku upotrebu u bolnicama: samo za upotrebu u kućanstvu.
- Kako biste izbjegli svaki rizik od strujnog udara prilikom upotrebe jastučića za grijanje, molimo obratite pozornost na sljedeće:
  - Ne koristiti ako je vlažan. Ako se jastučić navlaži ili smooči, potpuno ga osušite prije upotrebe.
  - Koristiti isključivo u suhim prostorijama, a ne npr. u kupaoznicama.
  - Prije svake upotrebe provjeriti ima li oštećenja na jastučiću tj. ne upotrebljavati ukoliko postoji vidljivo oštećenje upravljača, prekidača, utikača ili samog jastučića.
  - Ne umećite igle ili druge oštre predmete u uređaj.
- Kako biste izbjegli pregrijavanje:
  - Ne ostavljajte jastučić uključen bez nadzora; priključite ga prilikom izlaska iz prostorije.
  - Ne upotrebljavajte jastučić kada je namotan.
  - Izbjegavajte gužvanje jastučića.
  - **Ne pokrivajte upravljač!** Kako biste osigurali pravilnu funkciju upravljača, ne postavljajte ga na ili ispod jastučića za grijanje i ne pokrivajte ga drugim predmetima.
  - Kabel ne bi smio biti omotan oko upravljača.

- **Ne upotrebljavati na nepokretnim osobama, maloj djeci, osobama koje su neosjetljive na toplinu ili životinjama.** Ne dozvoliti djeci da se igraju s uređajem.
- **Djeca ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati bez nadzora.** Djeca mlađa od 8 godina ne smiju upotrebljavati ovaj uređaj osim ako je roditelj ili staratelj namjestio upravljač na postavku 1 najniže temperature.
- Ovaj uređaj smiju upotrebljavati djeca u dobi od 8 ili više godina, kao i osobe koje imaju smanjene fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti ili neadekvatno iskustvo i/ili znanje, uz uvjet da su pod nadzorom ili da im je objašnjeno kako upotrebljavati uređaj na siguran način te uz uvjet da razumiju potencijalne opasnosti.
- **Prekomjerna primjena uređaja na postavkama visoke temperature može uzrokovati opekline na koži.**
- **Ukoliko će se uređaj koristiti kroz dulji vremenski period, tj. prilikom spavanja,** kontrole treba posediti na postavku preporučenu za kontinuiranu upotrebu.
- **Učestalo pregledavajte uređaj na znakove istrošenosti ili oštećenja.** Ukoliko postoje znakovi istrošenosti ili oštećenja ili je uređaj nepravilno korišten, molimo kontaktirati proizvođača ili ovlaštenu osobu prije bilo kakvog daljnjeg korištenja.
- **Ukoliko je kabel oštećen, zamijeniti ga mora proizvođač, ovlaštena osoba ili kvalificirana osoba kako bi se izbjegao svaki rizik.**
- **Ne pokušavajte sami otvarati ili popravljati uređaj.** Za ponovno sklapanje uređaja potreban je poseban alat.
- **Ovaj uređaj emitira vrlo slabo električno i magnetsko polje koje može poremetiti rad vašeg elektrostimulatora srca.** Stoga vam preporučujemo konzultiranje s liječnikom i proizvođačem vašeg elektrostimulatora srca prije korištenja ovog uređaja.
- **Prije slaganja i spremanja uređaja na suho mjesto potrebno ga je pustiti da se ohladi.** Kako bi se izbjeglo deformiranje, ne stavljajte teške predmete na njega.

**⚠ Nije prikladno za djecu starosti 0-3 godine!** Djeca mlađa od 3 godine nisu sposobna reagirati na visoke temperature kao posljedice pregrijavanja.

**⚠ Elektronički uređaji moraju se zbrinuti u skladu s lokalnim propisima. Ne odlagati u komunalni otpad.**

## 1. Kako koristiti Microlife grijač za noge



1. Navlaka od meke tkanine - može se skinuti i prati u perilici za rublje. Patentni zatvarač.
2. Upravljač s klizačem za odabir postavki grijanja i indikatorom ON (uključeno).
3. Jastučić.

**⚠ UPOZORENJE:** Nikada ne upotrebljavajte jastučić bez navlake.

Prilikom upotrebe omogućite protok zraka između jastučića i kože.

Uklonite obočnu prije upotrebe.

Uređaj se ne smije koristiti za grijanje životinja.

1. Stavite navlaku (1) na ravnu površinu. Otvorite patentni zatvarač.
2. Umetnite jastučić (3) potpuno unutar navlake, namještajući prvo jednu, a zatim i drugu stranu. Provjerite nalaze li se kabel i upravljač (2) izvan navlake.
3. Jastučić će ležati ravno i popunjavati cijelu navlaku. Zatvorite patentni zatvarač.
4. Uključite u utičnicu od 220-240 V AC i postavite upravljač na željenu postavku grijanja pomoću klizača.
  - Odaberite postavku temperature na klizaču – na taj način se jastučić za grijanje uključuje. Indikator će svijetliti, pokazujući da je uređaj spojen na struju i uključen.
  - Za kontinuiranu upotrebu preporučuje se postavka 1.
  - Jastučić se isključuje postavljanjem klizača na položaj «0». Svjetlo na indikatoru će se tada isključiti.
5. **Upravljač će automatski ugasiiti grijač nakon 90 minuta,** iako će svjetlo na upravljaču nastaviti svijetliti. Da biste mjerac vremena ponovno postavili na 0 i nastavili s grijanjem, pomaknite klizač na upravljaču na poziciju isključeno «0» i nazad na željenu postavku topline.
6. Isključite iz struje kada završite.

## 2. Upute o čišćenju

**⚠ UPOZORENJE:** Uvijek isključite strujni kabel iz utičnice prije bilo kakvog čišćenja proizvoda.

1. Navlaka se može prati strojno nakon što se ukloni s jastučića, u skladu s uputama koje se nalaze na navlaci.
2. Jastučić se ne smije prati strojno niti čistiti kemijski. Može se čistiti četkom kada je suh.
3. Nemojte dopustiti da se upravljač smooči. Ne upotrebljavajte nikakve deterdžente ili otapala, jer oni mogu oštetiti uređaj.
4. Nikada ne držite upravljač pod vodom. U suprotnom, vlaga može ući u upravljač i uzrokovati oštećenje.
5. Provjeravajte upravljač na znakove oštećenja. Prije ponovnog uključivanja, potpuno osušite jastučić i njegovu navlaku.

**👉 Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju provoditi djeca bez nadzora.**

## 3. Pojašnjenje simbola

- |                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Maksimalna temperatura pranja 40 °C! | Zabranjeno glačanje!          |
| Zabranjeno pranje!                   | Zabranjeno kemijsko čišćenje! |
| Zabranjeno izbjeljivanje!            | Dopušteno sušenje u stroju!   |
| Glačati na niskoj temperaturi!       | Zabranjeno sušenje u stroju!  |

## 4. Jamstvo

Ovaj uređaj ima **2 godišnje jamstvo** od datuma kupnje. Ovo jamstvo odnosi se na upravljač, kabel i sam jastučić. Ovo jamstvo ne obuhvaća nepravilnu upotrebu, nezgode ili oštećenja koji su rezultat nepridržavanja uputa ili modifikacija na uređaju koja nije izvršio proizvođač.

**Jamstvo vrijedi samo uz račun ili jamstveni list ispunjen od strane prodavača.**

## 5. Tehničke specifikacije

- Model:** FH 600  
**Napon:** 220 - 240 V   
**Snaga:** 50 W  
**Frekvencija:** 50 Hz

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene.

## 6. www.microlife.com

Detaljne korisničke informacije o našim proizvodima i uslugama mogu se pronaći na stranici [www.microlife.com](http://www.microlife.com).

# تعليمات هامة – احتفظ بها للاستعمال في المستقبل

- اقرأ هذا الكتيب بعناية قبل استعمال الجهاز.
- قرية التدفئة هذه ليست مخصصة للاستعمال الطبي في المستشفيات، بل للاستعمال المنزلي فقط!
- لتجنب أي خطر للتعرض لصدمة كهربائية عند استعمال قرية التدفئة يرجى اتباع التعليمات التالية:
  - لا تستعمل القرية إذا كانت مبللة. إذا أصبحت القرية رطبة أو مبللة قم بتجفيفها تماماً قبل الاستعمال.
  - استعمل القرية في غرف جافة فقط ولا تستعملها في الحمام، الخ!
  - تأكد أن القرية غير تالفة قبل كل استعمال، أي لا تستعملها إذا لاحظت تلفاً في بد التحكم أو المفاتيح أو القابس أو قرية التدفئة الكهربائية نفسها.
  - لا تدخل في القرية أبداً أو أجسام حادة أخرى.
  - لتجنب التسخين المفرط:
    - لا تترك القرية مشغلة دون إشراف، وقم بإيقاف التشغيل عند خروجك من الغرفة.
    - لا تستعمل القرية وهي مغطاة.
    - تجنب ثني القرية.
  - لا تقم بتغطية بد التحكم! للتأكد من عمل بد التحكم بشكل سليم، لا تقم بوضعه، تحت القرية أو أي شيء آخر.
  - يجب عدم لف الشريط السلكي حول بد التحكم.
  - لا تستعمل القرية لشخص غير قادر على الحركة أو لطفل رضيع أو لشخص فاقد الشعور بالحرارة أو على الحيوانات. لا تدع الأطفال يلعبون بالجهاز.
  - تأكد بأن الأطفال لا يستعملون الجهاز بدون إشراف من غير المسموح استعمال الجهاز من قبل الأطفال الذين يقل عمرهم عن 8 سنوات بدون إشراف الأهل.
  - يسمح باستعمال هذا الجهاز لمن يبلغون أكثر من 8 سنوات، ولديهم القدرة الجسدية والعقلية والحسية، لتمييز الحرارة ويمكنهم الوعي الكافي لاستعمال الجهاز، وفهم المخاطر الناتجة عن الاستعمالات الخاطئة.
  - يمكن للاستعمال المفرط عند ضبط تسخين عال أن يؤدي إلى حروق جلدية.
  - عندما يكون من المحتمل أن تستعمل الجهاز لفترة ممتدة، على سبيل المثال من قبل المستعمل أثناء النوم، فإنه يجب أن تعدل الإعدادات إلى الوضع الموصى به لإستعمال المستمر.
  - افحص قرية التدفئة بانتظام بحثاً عن علامات البلي أو التلف. إن وجدت مثل هذه العلامات أو تم إساءة استخدام القرية، راجع المصنع أو الوكيل المعتمد (انظر أدناه) قبل أي استعمال تالي.
  - إذا تلف الشريط الكهربائي فيجب استبداله من المصنع أو وكيل الصيانة أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.
  - لا تحاول فتح أو تصليح الجهاز بنفسك. يتطلب الجهاز أدوات خاصة لإعادة تركيبه.
  - يصدر الجهاز انبعاثات ضعيفة للغاية حيث ينشئ مجالات كهربائية ومغناطيسية، والتي قد تتعرق وظيفة جهاز ضبط نبض القلب لديك. لذلك، فإننا نوصيك باستشارة الطبيب المعالج لك ومصنع جهاز ضبط نبض القلب قبل استعمال هذا الجهاز.
  - يجب أن تترك الجهاز ليبرد قبل طيه وتخزينه في مكان جاف. يجب عدم وضع أشياء ثقيلة فوقه لمنع تكسره.

## ٢. تعليمات التنظيف

- **تنبيه:** انزع دائماً شريط الكهرباء من مقبس التغذية الكهربائية قبل أن تقوم بأي تنظيف لقرية التدفئة الكهربائية.
- ١. يمكن غسل الغطاء القابل للزنج على آلة الغسيل بعد نزعها من القرية وفقاً لتعليمات الغسل المتوفرة على الغطاء.
- ٢. يجب عدم غسل القرية في آلة الغسيل ولا بالتنظيف على البخار بالامكان تنظيف القرية بالفرشات عندما تكون جافة.
- ٣. لا تسمح بتعرض بد التحكم للبلل. لا تستخدم أي مواد منظفة أو مذيبة حيث أنها قد تتلف الجهاز.
- ٤. لا يجوز بأي حال وضع بد التحكم تحت الماء. وإلا فقد تتحلل الرطوبة بد التحكم وتسبب تلفها.
- ٥. افحص بد التحكم بحثاً عن علامات تلف. جفف القرية وغطاها القماشى تماماً قبل إعادة التشغيل.
- التنظيف وأعمال الصيانة لا يمكن أن يقوم بها الأولاد.

## ٣. تفسير الرموز

- ⚠️ إغسل على درجة حرارة ٤٠ درجة مئوية! لا توكو!
- ⊗ لا تسهل! لا تستخدم التنظيف الجاف!
- ⊗ يمنع استخدام المبيض! يسمح باستخدام النشافة!
- ⊗ اكو على درجة حرارة منخفضة! لا يسمح باستخدام النشافة!

## ٤. الكفالة

- قرية التدفئة هذه مكفولة لمدة سنتين من تاريخ الشراء. تغطي هذه الكفالة بد التحكم الإلكترونية والشريط الكهربائي وقرية التدفئة نفسها. لا تغطي هذه الكفالة التلف الناتج عن سوء الاستعمال والحوادث وعدم اتباع التعليمات أو عن التعديلات على الجهاز والتي لا يقوم بها المصنع.
- الكفالة صالحة فقط عند تقديم بطاقة الكفالة المعبأة بواسطة البائع المزود.
- ⚠️ لا تستعمل هذا الجهاز على الأطفال من عمر ١٠ إلى ٣ سنوات! الأطفال ما دون ٣ سنوات لا يستطيعون تمييز مستوى الحرارة المرتفع.
- ⚠️ يجب أن يتم التخلص من الآلات الإلكترونية بموجب التعليمات المطبقة محلياً، وليس مع النفايات المنزلية.

## ١. كيف تستعمل مدفأة القدم من مايكرولايف

- ① غطاء من القماش الناعم - قابلة للفصل والماكينة قابلة للفصل.
- ② تحكم يدوي مع مزلاق لأوضاع الحرارة ومؤشر تشغيل.
- ③ وسادة



- **تنبيه:** لا تستعمل قرية التدفئة أبداً بدون الغطاء القماشى. اسمح بمرور الهواء قليلاً بين قرية التدفئة والجد أثناء الاستعمال. لا تستعملها وأنت مرتدي الحذاء.
- هذا الجهاز غير مناسب لتدفئة الحيوانات!
- ضع الغطاء القماشى ① على سطح مستو. افتح السحاب.
- أدخل القرية ③ بشكل كامل داخل الغطاء بترتيب أحد الطرفين ثم الآخر. تأكد من بقاء الشريط الكهربائي وبد التحكم ② خارج الغطاء.
- سمّتد القرية بشكل مسطح وتملأ الغطاء بالكامل. أغلق السحاب.

## ٤. www.microlife.com

يمكن الحصول على معلومات مفصلة للمستخدم حول منتجاتنا وخدماتنا عبر الموقع [www.microlife.com](http://www.microlife.com).







# نکات مهم برای افزایش دوام دستگاه!

- **لطفاً پیش از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید.**
- **این دستگاه برای کاربرد بیمارستانی طراحی نشده است و فقط برای استفاده خانگی مناسب است.**
- **برای جلوگیری از خطر شوک الکتریکی در هنگام استفاده از گرم کن برقی لطفاً نکات زیر را رعایت کنید:**
  - در صورت مرطوب بودن گرم کن برقی از آن استفاده نکنید.
  - دستگاه پیش از استفاده باید کاملاً خشک شود.
  - گرم کن را در محیط کاملاً خشک استفاده کنید. از بکارگیری آن در حمام و غیره خودداری نمایید.
  - پیش از استفاده دستگاه آن را بررسی کرده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید. در صورت مشاهده هرگونه صدمه در کنترل دستی، کلبدها، دوشاخه یا گرم کن برقی از کاربرد آن خودداری خودداری کنید.
  - از فرو بردن سوزن و سایر اشیاء نیز در گرم کن برقی جلوگیری کنید.
  - **راههای جلوگیری از گرم شدن زیاد:**
    - گرم کن برقی را بدون نظارت رها نکنید؛ هنگامی که اتاق را ترک می کنید، دستگاه را خاموش کنید.
    - از گرم کن برقی در حالت در پوشاندن استفاده نکنید.
    - از گرم شدن گرم کن جلوگیری کنید.
    - **کنترل دستی را نپوشانید!** برای اطمینان از صحت کارکرد بخش تنظیم حرارت از پوشاندن رو با زیر پوششچه برقی خودداری نمایید.
    - **کابل نایل دور کنترل دستی پیچیده شود.**
  - **از بکارگیری دستگاه برای افراد معلول، نوزادان، حیوانات و افرادی که قادر به حس حرارت نیستند خودداری نمایید.** اجازه ندهید کودکان با گرم کن برقی بازی کنند.
  - **اطمینان حاصل کنید که کودکان بدون نظارت شما از دستگاه استفاده نکنند.** برای کودکان زیر ۸ سال کمترین زمان در تنظیم شماره ۱ استفاده شود.
  - اطمینان حاصل کنید که کودکان بزرگتر از ۸ سال، افراد کم توان و افراد کم تجربه بدون نظارت شما برای ایمنی و جلوگیری از بروز خطر از دستگاه استفاده نکنند.
  - **استفاده بیش از حد از دستگاه در دمای بالا موجب سوختگی پوست می شود.**

## ۲. چگونگی تمیزکردن دستگاه

- **هشدار:** پیش از تمیز کردن دستگاه، همیشه سیم برقی را از پریز خارج کنید.
- **۱. روکش دستگاه،** با در نظر گرفتن توصیه های روی آن، پس از جدا شدن از گرم کن قابل شستشو به وسیله ماشین لباسشویی است.
- **۲. از شستشو و خشک کردن گرم کن به وسیله ماشین لباسشویی خودداری کنید.** روکش دستگاه هنگامیکه خشک است می توانید با برس تمیز نمایید.
- **۳. از مرطوب شدن بخش تنظیم حرارت جلوگیری کنید.** در هنگام تمیز کردن دستگاه از مواد پاک کننده و حلال استفاده نکنید، زیرا موجب تخریب دستگاه می شوند.
- **۴. تحت هیچ شرایطی بخش تنظیم حرارت را زیر آب جاری قرار ندهید.** در غیر این صورت رطوبت وارد بخش تنظیم درجه شده و موجب تخریب آن می شود.
- **۵. بخش تنظیم حرارت را به طور کامل بررسی کنید تا هیچ گونه آسیب دیدگی در آن وجود نداشته باشد.** پیش از روشن کردن مجدد دستگاه گرم کن و پوشش آن را کاملاً خشک نمایید.
- **اطمینان حاصل کنید که کودکان بدون نظارت شما دستگاه را تمیز نکنند.**

## ۳. شرح علائم

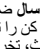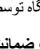	دستشو با دمای ۴۰°C! اتو نشود!
	دستشو نشود!
	از مواد سفیدکننده استفاده نشود!
	اتوکنی با حرارت پایین!
	خشک کردن چرخشی با دمای کم!
	با خشک کن، خشک نشود!

## ۴. ضمانت

- این محصول از تاریخ خرید بمدت ۲ سال ضمانت می شود. این ضمانت بخش تنظیم حرارت الکتریکی، کابل و گرم کن را تحت پوشش قرار می دهد. آسیب هایی که بر اثر استفاده نادرست، حوادث، تخریب حاصل از عدم پیروی از نکات دفترچه راهنما یا تعمیرات دستگاه توسط افراد غیر مجاز به دستگاه وارد آید شامل ضمانت نخواهد بود.
- **ضمانت فقط در صورت ارائه کارت ضمانت پر شده توسط نماینده فروش معتبر میباشد.**
- **۱. روش استفاده از گرم کن با مایکروولاف**
  - ① روکش گرم کن نرم و از جنس پارچه است. این روکش قابل شستشو به وسیله ماشین لباسشویی بوده و توسط زیپ باز و بسته میشود.
  - ② حرارت دستگاه به وسیله بخش کنشویی تنظیم حرارت و چراغ نشانگر ON قابل کنترل توسط استفاده کننده است.
  - ③ گرم کن
- **هشدار:** هرگز از گرم کن بدون روکش پارچه ای استفاده نکنید. استفاده از دستگاه باید به گونه ای باشد که هوا میان گرم کن و پوست جریان داشته باشد.
- این دستگاه برای گرم کردن حیوانات طراحی نشده است.
- **۱. روکش پارچه ای ① را روی سطح صاف قرار دهید.** زیپ را باز نمایید.

## ۵. مشخصات فنی

مدل:	FH 600
ولتاژ:	۲۲۰ - ۲۴۰ V
توان:	۵۰ W
فرکانس:	۵۰ Hz
حق تغییرات فنی محفوظ است.	

## ۶. سایت مایکروولاف

اطلاعات دقیق در مورد محصولات و خدمات ما را می توانید در سایت اینترنتی [www.microlife.com](http://www.microlife.com) بدست آورید.