


MT 850

IB MT 850 E-V11 2225, Revision Date: 2025-04-29

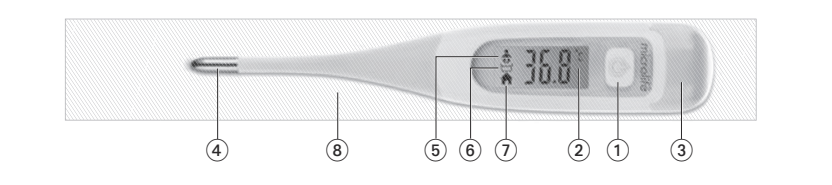

Opis toplomera	
1 Multifunkcionalno dugme	
2 Ekran	
3 Poklopac za odeljak sa baterijama	
4 Senzor za merenje / vrh za merenje	
5 Režim merjenja temperature tela	
6 Režim merjenja temperature kupke	
7 Režim merjenja temperature prostora	
8 Površina za čišćenje i dezinfekciju (kompletna površina termometra)	

Važna bezbednosna uputstva

- Pratite uputstvo za upotrebu. Ovaj dokument sadrži važne bezbednosne informacije, kao i informacije o nađnu rada uređaja. Detaljno pročitajte ovaj dokument pre upotrebe uređaja i čuvajte ga za buduću upotrebu.
- Uredaj je namenjen samo za merenje temperature tela kod ljudi (oralni, rektalni) i aksilarnim putem. Ne pokušavajte da merite temperaturu na drugim mestima, kao što je uho, jer može dovesti do lažnih rezultata i povreda.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko mislite da je oštećen ili primetite nešto neobično.
- Preporučujemo čišćenje ovog uređaja u skladu sa instrukcijama koje se prve upotrebe radi lične higijene.
- Bez izuzetaka se mora ispoštovati minimum vremena za merenje do signalnog zvuka (bip).

- Imajte na umu da merenje na drugim lokacijama može zahtevati nastavak merenja čak i posle zvučnog signala, pogledajte odeljak «Metode merenja / Normina telesna temperatura».
- Ne pokušavajte da obavite rektalno merenje kod osoba sa rektalnim problemima. Ovo može dovesti do pogoršanja problema.
- Obesedite da deca ne koriste ovaj uređaj bez nadzora; pojedini delovi su dovoljno mali da mogu biti progutani. Obratite pažnju na postojanje rizika od davljenja u slučaju da uređaj poseduje kablove ili cevi.
- Ne koristite aparat u blizini jakih elektromagnetičnih polja, kao što su mobilni telefon ili radio instalacije. Održavajte minimalno rastojanje od 3,3 m od takvih uređaja, kada koristite ovaj uređaj.
- Zaštitite toplomer od udara i pada.
- Izbegavajte savijanje sonde termometra više od 45°.
- Izbegavajte ambijentalne temperature iznad 60 °C. NEMOJTE stavljati instrument u ključanu vodu!

- Za čišćenje uređaja koristite samo komercijalna sredstva za dezinfekciju navedena u odeljku «Čišćenje i dezinfekcija», kako biste izbegli oštećenje uređaja.
- Preporučujemo proveru tačnosti uređaja svake 2 godine ili nakon mehaničkog udara (np. u slučaju pada). U slučaju oštećenja kontaktirajte lokalni Microlife servis kako biste dogovorili popravu.
- UPOZORENJE:** Rezultat merenja ovog uređaja nije dijagnoza! Nemojte se oslanjati samo na rezultat merenja.

- Baterije i elektronični aparati moraju biti uklonjeni u skladu sa lokalnim važećim pravilima, ne sa otpadom iz domaćinstva.

- Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo.

Tip BF

Uključivanje toplomera

Da uključite toplomer pritisnite multifunkcionalno dugme **1**; kratak signalni zvuk (bip) signalizira otoplomer je uključeno i crveno i zeleno pozadinsko svetlo se pali. Obavezno se test na displeju. Svi elementi moraju biti prikazani.

Testiranje rada

Pravilan rad toplomera se automatski testira svaki put kada se toplomer uključi. Ukoliko je detektovan nepravilan rad (netačnost merenja), ovo će biti naznačeno na displeju kao «ERR» nade bi moglo pogrešno obaviti merenje. U ovakvom slučaju toplomer mora biti zamijenjen.

Izbor režima rada

Pritisnite multifunkcionalno dugme **1** da izaberete željeni režim; uređaj će prihvatiti izabrani režim izabere ukoliko nema promena tokom 3 sekunde. Nakon što zavrsite izbor režima rada, termometar je spreman za upotrebu.

Upotreba toplomera

- Merenje u režimu za telo** **5** Rezultat poslednjeg merenje biće automatski prikazan na ekranu 2 tokom 2 sekunde sa «» znakom. Tada će se na ambijentalnoj temperaturi ispod 34 °C, na ekranu **2** pojaviti «-» i «». Sada je toplomer spreman za upotrebu. Odbacite metod merenja koji preferirate. Pri merenju temperature trenutna temperatura se kontinuirano prikazuje i treperi. Ako se čuje dug bip zvuk i prikazana temperatura više ne treperi, predviđena zavisna temperatura je utvrđena i termometar može biti uklonjen. 4 kratka bip tona i crveno ogledno LCD ekran upozoravaju da pacijent, onan mogu da imaju temperaturu jednaku ili veću od 37,5 °C. Napomena: Oralna temperatura.
- Za postizanje uopredivih rezultata potrebno je napraviti pauzu od 1 minuta između merenja.
- Merenje u režimu za kupku** **6** Temperatura će kontinuirano biti prikazana bez pozadinskog svetla kada je temperatura u rasponu 5 - 50 °C.
- Merenje u režimu za prostor** **7** Temperatura će kontinuirano biti prikazana bez pozadinskog svetla kada je temperatura u rasponu -10 - +50 °C.

Da biste produžili trajanje baterija uključite toplomer tako što ćete kratko pritisnuti multifunkcionalno dugme **1**. U suprotnom toplomer će se automatski isključiti nakon otprilike 10 minuta.

Metode merenja / Normalna telesna temperatura

- Putez pazuha / 34,7 - 37,3 °C** Obavite predo po stopa pazuha svojim peškirom. Postavite mereni senzor **4** ispod ruke u centar pazuhašne jame tako da vrh dondine koži u postavite ruku pacijenta uz njegovo telo. Ovo osigurava da vazduh iz prostorije ne utiče na očitavanje. Obzirom da kod aksilarnog merenja treba više vremena da se dostigne stabilna temperatura sakažite najmanje **5 minuta**, bez obzira na zvučni signal.
- Putez usta (oralno) / 35,5 - 37,5 °C** Nemojte jesti ni piti ništa vruće ili hladno 10 minuta pre merenja. Usta moraju biti zatvorena najmanje 2 minuta pre početka merenja. Pozicionirajte toplomer u jedan od džepova ispod jezika, levo ili desno od korena jezika. Senzor za merenje **4** mora imati dobar kontakt sa dnom. Zatvorite usta i držite ravnomerno kroz nos kako biste sprečili uticaj udahnutog/zadahnutog vazduha na merenje. Ukoliko nije moguće zbog blikiranih disajnih puteva, treba koristiti drugi metod merenja.
- Približno vreme merenja: 8 sekundi!**
- Putez anusa (rektalno) / 36,6 - 38,0 °C** Pажljivo unesite senzor za merenje **4** 2 do 3 cm u analni otvor. Preporučujemo se upotrebu navlake za sondu i lubrikanta. Ukoliko niste sigurni u ovaj metod merenja, konsultujte stručnu osobu radi instrukcija i vežbanja.
- Približno vreme merenja: 8 sekundi!**

Čišćenje i dezinfekcija

Za dezinfekciju u kućnim uslovima, koristite brišać sa 70% izopropil alkoholom ili samopne merenja neposredno 70% izopropil alkoholom za brisanje površinskih nečistoća sa sonde toplomer. Uvek počinite brisanje sa kraja sonde toplomer (približno od sredine toplomer) ka vrhu toplomer. Nakon toga čitav toplomer (vidi sliku bri) (b) treba poklopiti u 70% izopropil alkohol tokom najmanje 5 minuta (maksimalno 24h). Nakon potapanja osetljive deo dezinficijens osušiti tokom 1 minuta pre sledeće upotrebe.

- Za profesionalnu primenu:** Dodatno, možete koristiti navlake zaslonu (dostupne kao dodatna oprema). Kontaktirajte Microlife za više detalja vezano za dodatno dezinfekciono sredstvo za Vaš model termometra.
- Zamena baterije** Zamena baterija je neophodna, kada se na ekranu pojavi samo simbol za «bateriju». Kako biste zamijenili baterije, skinite poklopac odeljka za baterije **3** na toplomeru. Zamelite istrošenu bateriju stavljajući + ka gore. Proverite da li su Vam odgovarajuće batirje pri ruci. Baterije se mogu kupiti u bilo kojoj radnji za prodaju elektrinih uređaja.

Tehničke specifikacije	
Vrsta:	Maksimalni toplomer
Raspon merenja:	Režim merenja temperature tela: 32 - 43,9 °C Temp. < 34,0 °C: prikazuje «-» za nisku (suviše niske) Temp. > 43,9 °C: prikazuje «H» za visoke (suviše visoke)
	Režim merenja temperature kupke: 5 - 50 °C Temp. < 5 °C: prikazuje «L» za niske (suviše niske)
	Režim merenja temperature prostora: -10 - +50 °C Temp. < -10 °C: prikazuje «ERR» za niske (suviše niske) Temp. > 50 °C: prikazuje «H» za visoke (suviše visoke)
	Režim merenja temperature prostora: -10 - +50 °C Temp. < -10 °C: prikazuje «ERR» za niske (suviše niske) Temp. > 50 °C: prikazuje «H» za visoke (suviše visoke)

Tačnost merenja: Režim merenja temperature tela: ± 0,1 °C između 32 - 43,9 °C

Režim merenja temperature kupke: ± 1 °C između 5 - 50 °C

Režim merenja temperature prostora: ± 1 °C između -10 - +50 °C

Režim merenja temperature prostora: ± 1 °C između -10 - +50 °C

Radni uslovi: -25 - +60 °C; od 15 - 95 % maksimalne relativne vlažnosti

Uslovi čuvanja: -25 - +60 °C; od 15 - 95 % maksimalne relativne vlažnosti

Baterija: 3V, CR1632

Vek trajanja baterija: približno 2000 merenja (kada koristite novu bateriju)

IP Klasa: IP67

Referentni standardi: EN 12470-3, klinički toplomeri; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Očekivani vek trajanja: 5 godina ili 10000 merenja

Mérséi pontosság: Testmértési mód: ± 0,1 °C, 32 - 43,9 °C között Fűdővízmértési mód: ± 1 °C, 5 - 50 °C között Környező hőmérséklet mérséi mód: ± 1 °C, -10 - +50 °C között

Üzemi feltételek: -10 - +60 °C; 15 - 95 % maximális relatív páratartalom

Tárolási feltételek: -25 - +60 °C között; 15 - 95 % maximális relatív páratartalom

Elem: 3V, CR1632

Elemélettartam: Körülbelül 2000 mérés (új elemmel)

IP osztály: IP67

Szabvány: EN 12470-3, klinikai lázmérők; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Elvart élettartam: 5 év vagy 10000 mérés

A készülék megfelel az orvosi készülékekre vonatkozó 93/42/EEC számú direktívának.

A működési változatások jogát fenntartjuk.

- Garancia** Az eszközre a vásárlás dátumától kezdve élettartam garancia vonatkozik. Ezen garanciadőszak alatt, saját belátásunk szerint, a Microlife ingenyeresen kijavítja vagy kicseréli a hibás terméket. A készülék felépítése vagy módosítása a garancia elvesztését vonja maga után.
- A garancia nem vonatkozik a következőkre:
 - Szállítási költségek és a szállítási kockázata.
 - Nem megfelelő használat vagy a használati útmutatóban leírtak be nem tartása.
 - Az elemek kifolyásából keletkező kár.
 - Balesetből vagy helytelen használatból keletkező kár.
 - Sonogolyó-lárolóanyag és használati idő.
 - Rendezetlen ellenőrzések és karbantartások (kalibrálás)
 - Tartozékok és kopó alkatrészek: elemek.
- A garanciális szolgáltatásra van szükség, kérjük vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akiktől a terméket vásárolta, vagy a helyi Microlife szervizszel. Pontponton keresztül felveheti a kapcsolatot a helyi Microlife szervizzel: www.microlife.com/support
- A kárértékes a termék értékeire korlátozódik. A garanciánál akkor leszünk elégedi, ha a teljes terméket visszaküldjük az eredeti szállítással együtt. A garancián belül javítás vagy csere elvégzése nem hosszabbítja vagy újítja meg a jótállási időszakt. A fogyasztók jogait és jogos követelméit ez a garancia nem korlátozza.

Opis ovog toplomera	
1 Multifunkcionalna tipka	
2 Zaslon	
3 Poklopac odeljaka za bateriju	
4 Mjerni senzor/ mjerni vrh	
5 Način rada za merjenje temperature tijela	
6 Način rada za merjenje temperature vode za kupanje	
7 Način rada za merjenje temperature okoline	
8 Područje za čišćenje i dezinfekciju (cijela površina termometra)	

Važne signurnose upute

- Slijedite upute za uporabu. Ovaj dokument daje Vaše važne informacije u vezi rada i sigurnosti ovog uređaja. Molimo Vas temeljito pročitajte ovaj dokument prije upotrebe uređaja i sačuvajte ga za buduću.
- Uredaj je namijenjen isključivo za mjerenje tjelesne temperature kod ljudi oralno, rektalno ili aksilarno. Nemojte pokušavati izmjeriti temperaturu na drugim mjestima, kao što je uho, jer mjerenje može rezultirati krivim očitanjima te može uzrokovati ozljedu.
- Ne koristite uređaj ako mislite da je oštećen ili primjetite bilo što neobičajeno.
- Preporučamo da ovaj uređaj očistite prije prve upotrebe, skladno uputama za čišćenje, zbog osobne higijene.
- Bez iznimke sa mora održavati minimalno vrijeme mjerenja do očitavanja zvuka!
- Uzmite u obzir da različita mjerena mjerenja temperature mogu zahtijevati nastavak mjerenja i nakon zvučnog signala, pogledajte odeljak «Metode merenja / Normalna tjelesna temperatura».
- Ne pokušavajte rektalno mjeriti temperaturu kod osoba sa poremećajima rektuma. Tim bi postupkom mogli iritirati ili pogoršati poremećaj.
- Djeca ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati bez nadzora, niti dječiji ulov dovoljno su mali da im mogu prijetiti. Postoji opasnost od davljenja ukoliko uređaj ima cijevi ili kablove.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini jakih elektromagnetskih polja poput mobilnih telefona ili radio instalacija. Priklom upotrebe ovog uređaja udaljenost od izvora jakih elektromagnetskih polja mora biti najmanje 3,3 m.
- Zaštite uređaj od udara i padova!
- Izbjegavajte savijanje sonde termometra za više od 45°!
- Izbjegavajte temperaturu u okolini veće od 60 °C. NIKAD ne probavajte uređaj!
- Za čišćenje uređaja, koristite isključivo komercijalne dezinficijense koji se nalaze u dijelu «Čišćenje i dezinfekcija» da biste izbegli oštećenje proizvoda.
- Preporučamo da testirate tačnost uređaja svake 2 godine ili nakon mehaničkog udarca (np. pad). Molimo Vas da kontaktirate svoj lokalni Microlife servis da biste dogovorili testiranje.

- UPOZORENJE:** Rezultat merenja ovog uređaja nije dijagnoza! Nemojte se oslanjati samo na rezultate merenja.

- Baterije i elektronički uređaji treba zbrinuti skladno primjenjivim lokalnim odredbama, a ne s kućnim otpadom.

- Pre upotrebe pažljivo pročitajte upute prije primjene ovog uređaja.

- Baterije i elektronički uređaji treba zbrinuti skladno primjenjivim lokalnim odredbama, a ne s kućnim otpadom.

- Pre upotrebe pažljivo pročitajte upute prije primjene ovog uređaja.

- Tip BF uređaja koji dolazi u dođir s pacijentom.

Uključivanje toplomera

Za uključivanje toplomera, pritisnite multifunkcionalnu tipku **1**; kratak zvuk signalizira «toplomer je UKLJUČEN» te crveno i zeleno pozadinsko svetlo zasvijetli. Provod se testiranje zaslona. Svi segmenti moraju biti prikazani.

Testiranje funkcije

Pravilo funkcioniranja toplomera testira se automatski, svaki put kada se toplomer uključi. Ako se otkrije kvar (netočnost merenja), na kvar će ukazati znak «ERR» na zaslonu, a merjenje postaje nemoguće. U tom slučaju, toplomer je potrebno zamijeniti.

Odabir načina rada merjenja

Pritisnite multifunkcionalnu tipku **1** kako biste odabrali željeni način rada; uređaj će prihvatiti odabrani način rada ako nema promjena unutar 3 sekunde. Nakon što je odabir načina rada dovršen toplomer je spreman za upotrebu.

Upotrebljavanje toplomera

Mjerenje u načinu rada za mjerenje temperature tijela **5**

- Odbacite područje ispod pazuha svojim ručnikom. Postavite mereni senzor **4** ispod ruke u srediste pazuha tako da vrh dondine koži, te postavite ruku pacijenta uz tijelo pacijenta. Time ćete osigurati da zrak prostorije ne utiče na očitanje. S obzirom da je aksilarni metod potrebno više vremena da se dosegne svoe stabilnu temperaturu, pričekaite bar **5 minuta**, bez obzira na zvučni signal.
- U ustima (oralno) / 35,5 - 37,5 °C** Nemojte jesti ni piti bilo što vruće ili hladno 10 minuta prije merenja. Usta trebaju ostati zatvorena do 2 minute prije očitanja. Postavite toplomer u jedan od džepa ispod jezika, lijevo ili desno od kornjena jezika. Mjerni senzor **4** mora biti u dobrom kontaktu s dnom. Zatvorite usta i ravnomjerno dišite kroz nos kako biste spriječili da na merenje uticaj udahnuti / izdahnuti zrak.
- Ako zbog blikiranih dišnih puteva to nije moguće, koristite drugu metodu mjerenja.

Približno vrijeme merjenja: 8 sekundi!

Mjerenje u načinu rada za mjerenje temperature okoline **7** Temperatura će biti prikazana neprekidno, bez pozadinskog svetla kad je temperatura između 32 - 43,9 °C.

Za produženje vijeka trajanja baterija, isključite toplomer kratkim pritiskom na multifunkcionalnu tipku **1**. U suprotnom, toplomer će se automatski isključiti nakon približno 10 minuta.

Metode merjenja / Normalna tjelesna temperatura

- Ispod pazuha (aksilarno) / 34,7 - 37,3 °C** Odbacite područje ispod pazuha svojim ručnikom. Postavite senzor za merenje **4** ispod ruke u srediste pazuha tako da vrh dondine koži, te postavite ruku pacijenta uz tijelo pacijenta. Time ćete osigurati da zrak prostorije ne utiče na očitanje. S obzirom da je aksilarni metod potrebno više vremena da se dosegne svoe stabilnu temperaturu, pričekaite bar **5 minuta**, bez obzira na zvučni signal.
- U ustima (oralno) / 35,5 - 37,5 °C** Nemojte jesti ni piti bilo što vruće ili hladno 10 minuta prije merenja. Usta trebaaju ostati zatvorena do 2 minute prije očitanja. Postavite toplomer u jedan od džepa ispod jezika, lijevo ili desno od kornjena jezika. Mjerni senzor **4** mora biti u dobrom kontaktu s dnom. Zatvorite usta i ravnomjerno dišite kroz nos kako biste spriječili da na merenje uticaj udahnuti / izdahnuti zrak.
- Ako zbog blikiranih dišnih puteva to nije moguće, koristite drugu metodu mjerenja.
- Približno vrijeme merjenja: 8 sekundi!**
- U anusu (rektalno) / 36,6 - 38,0 °C** Pажljivo umetnite mjerni senzor **4** na toplomeru 2-3 cm u analni otvor. Preporuča se upotreba poklopac sonde i lubrikanta. Ako niste sigurni u ovu metodu, konzultirajte stručnu osobu.
- Približno vrijeme merenja: 8 sekundi!**

Čišćenje i dezinfekcija

Za dezinfekciju u kućne, koristite tampon ili pamučnu maramicu natopljenu 70% izopropil alkoholom da biste obrišali površinsku nečistoću sa sonde i termometra. Uvijek započinite brisanje od kraja sonde termometra (približno od sredine termometra) prema vrhu termometra. Nakon toga cijeli termometar (vidi sliku bri) (b) treba oprati u 70% izopropil alkohol najmanje 5 minuta (maksimalno 24 sata).

Nakon uranjanja, dopustite da se dezinficijens osuši 1 minutu prije sledeće upotrebe.

Za uporabu stručnjaka: Dodatno, možete staviti poklopce sonde(dostupni su kao dodatna oprema). Kontaktirajte Microlife za više pojedinosti o drugim dezinficijensima za vaš model termometra.

Zamjena baterije

Potrebno je zamijeniti bateriju kad se samo simbol «baterija» pojavljuje na zaslonu. Za promjenu baterije uklonite poklopac odeljaka za bateriju **3** s toplomera. Umetnite novu bateriju u oznekom + na vrhu. Proverite imate li na raspolaganju trajni istog tipa. Baterije se mogu kupiti u bilo kojoj prodavnicini elektrinih proizvoda.

Jeśli jesté pewien metódy pomiaru, skonsultuj się ze specjalistą w celu uzyskania wskazówek / szkolenia.

Przybliżony czas pomiaru: 8 sekund!

Czyszczenie i dezynfekcja Do dezynfekcji w warunkach domowych należy użyć wacika z 70% alkoholem izopropylowym lub bawełnianej chusteczki zwilżonej 70% alkoholem izopropylowym, aby zetrzeć zanieczyszczenia powierzchni z sondy termometru. Zawsze zaczynaj wycieranie od końca sondy termometru (w przybliżeniu na środku termometru) w kierunku końcówki termometru. Następnie cały termometr (patrz numer 8) na rysunku) należy zanurzyć w 70% alkoholu izopropylowym na co najmniej 5 minut (maks. 24 godziny). Po zanurzeniu pozostawić środek dezynfekujący do wyschnięcia na 1 minutę przed kolejnym użyciem.

Do użytku profesjonalnego: Dodatkowo można zastosować osłone czujnika (dostępne jako wyposażenie dodatkowe). Skontaktuj się z Microlife, aby uzyskać więcej informacji na temat środków dezynfekujących do Twojego modelu termometru.

Wymiana baterii

Bateria wymaga wymiany, gdy tylko «bateria» na wyświetlaczu pojawia się symbol. W tym celu zdejmij pokrywke pomownika na baterię 3) termometru. Umieść nową baterię biegunem + ku górze. Upewnij się, że jest to bateria tego samego typu. Baterie te są dostępne w każdym sklepie z towarami elektrycznymi.

Specyfikacja techniczna	
Typ:	Termometr maksymalnych wskazań
Zakres pomiaru:	Pomiar temp. ciała: 32 - 43,9 °C Przy temperaturze < 34,0 °C: wyświetla się symbol «-» za niską (zbyt niską) Temp. > 43,9 °C: wyświetla się symbol «H» wysoka (zbyt wysoka) Tryb kąpiel: 5 - 50 °C Przy temperaturze < 5 °C: wyświetla się symbol «L» niska (zbyt niska) Przy temperatura > 50 °C: wyświetla się symbol «ERR» niska (zbyt niska) Tryb otoczenia: -10 - +50 °C Przy temperaturze > 50 °C: wyświetla się symbol «ERR» niska (zbyt niska) Przy temperaturze > 50 °C: wyświetla się symbol «H» wysoka (zbyt wysoka)

Dokładność pomiaru: Pomiar temp. ciała: ± 0,1 °C pomiędzy 32 - 43,9 °C Tryb kąpiel: ± 1 °C pomiędzy 5 - 50 °C Tryb otoczenia: ± 1 °C pomiędzy -10 - +50 °C

Warunki pracy: -25 - +60 °C; maksymalna wilgotność względna 15 - 95 %

Warunki przechowywania: -25 - +60 °C; maksymalna wilgotność względna 15 - 95 %

Bateria: 3V, CR1632

Żywotność baterii: Około 2000 pomiarów (używając nowej baterii)

Klasa IP: IP67

Normy: EN 12470-3, termometry kliniczne; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Przewidywana żywotś 5 lat lub 10000 pomiarów
nie uzasadniają:

Uzrządzenie spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Wymobów Medycznych 93/42/EEC.

Prawo do zmian technicznych zastrzeżone.

Gwarancja

To urządzenie jest objęte dożywotnią gwarancją od dat zakupu. W tym okresie gwarancji, według naszego uznania, Microlife bezpłatnie naprawi lub wymieni wadliwy produkt.

Otwarcie lub dokonanie modyfikacji urządzenia unieważnia gwarancję.

Następujące elementy są wyłączone z gwarancji:

- Koszty transportu i ryzyko z nim związane.
- Szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji użytkownika.
- Uszkodzenia spowodowane przez wyciekające baterie.
- Uszkodzenia spowodowane wypadkami lub niewłaściwym użyciem.

• Materiały opakowaniowe / magazynowe i instrukcje użytkownika.
• Regularne kontrole i konserwacja (kalibracja).

• Akcesoria i części zużywające się: baterie.

Jeśli wymagana jest usługa gwarancyjna, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony, lub z lokalnym serwisem Microlife. Możesz skontaktować się z lokalnym serwisem Microlife za pośrednictwem naszej strony internetowej: www.microlife.com/support

Odszkodowanie jest ograniczone do wartości produktu. Gwarancja zostanie udzielona, jeśli cały produkt zostanie zwrócony z oryginalnym dokumentem zakupu oraz kartą gwarancji. Naprawa lub wymiana w ramach gwarancji nie przewidziana ani nie odnawia okresu gwarancji. Roszczenia prawne i prawa konsumentów nie są ograniczone przez tę gwarancję.

Tehničke specifikacije

Tip: Maksimalni toplomer

Mjerni raspon: Režim rada za mjerenje temperature tijela: 32 - 43,9 °C Temperatura < 34,0 °C: prikazuje «-» za nisku (previsoku) Temperatura > 43,9 °C: prikazuje «H» za visoku (previsku)

Način rada za mjerenje temperature vode za kupanje: 5 - 50 °C Temperatura < 5 °C: prik