


OSAT PRODUKTBEKRIJVNING

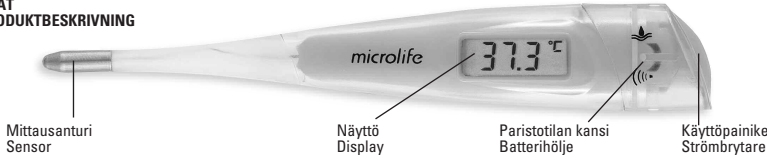

IB MT 19F1 Var3 1006

TURVALLISUUSOHJEET

- Kuumemittari on tarkoitettu yksinomaan ruumiinlämpötilan mittaamiseen.
- Mittausta on aina jatkettava siihen asti, kunnes kuumemittari antaa äänimerkin mittauksen loppuunsaoritukselta.
- Kuumemittari sisältää pieniä osia, jotka saattavat joutua lasten suuhun. Tästä syystä kuumemittaria ei saa jättää lasten ulottuville ilman valvontaa.
- Älä kolhi tai lyö kuumemittaria.
- Älä tarvuta mittarin kärkeä yli 45° kulmaan.
- Älä säilytä kuumemittaria yli 60 °C lämpötilassa, äläkä upota sitä kuumaan veteen.
- Käytä kuumemittarin puhdistukseen ainoastaan «PUHDISTUS JA DESINFIOINTI»-kohdassa mainittuja aineita. Vioittunutta kuumemittaria ei saa upottaa nesteeseen.
- Huomio:** Kuumemittarissa on pitkäikäinen paristo, huolehdi sen hävittämisestä ongelmajätteistä annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Kuumemittarin valmistaja suositaa mittaustarkkuuden tarkistusta maahantuojan huollossa kahden vuoden välein.

KUUMEMITTARIN KÄYNNISTÄMINEN

Paina yläpään painiketta. Lyhyt äänimerkki ilmaisee virran kytkettyneen. Painalluksen jälkeen mittarin äänimerkki ilmoittaa käynnistymisestä ja samalla laite käy läpi näyttötestin. Jos ympäristön lämpötila on alle 32 °C, niin näytön oikeaan yläkulmaan tulee «--»-kirjain sekä vilkkuva «°C». Nyt kuumemittari on valmis käyttöön.

KUUMEMITTARIN KÄYTTÖ

Mittaustapahtuman edistyessä kuumemittari näyttää mitattua lämpötilaa ja «°C»-merkki vilkkuu. Tämän jälkeen kuumemittari antaa 10 äänimerkkiä ja «°C»-merkki lakkaa vilkkumasta. Tämä on merkki siitä, että kuumemittarin mitaamaan lämpötilan nousu on juuri kuluneen 8 sekunnin aikana ollut alle 0,1 °C. Nyt lämpötila on luettavissa kuumemittarin näytöltä. Pariston käyttöikä voi pidentää kytkemällä mittari pois käytöstä heti mittauksen jälkeen. Muussa tapauksessa kuumemittari kytkeytyy pois käytöstä noin 10 minuutin kuluttua.

MITTAUSTULOKSEN TALLENNUS

Jos kuumemittarin käynnistysvaiheessa pidetään käyttöpainike alaspainettuna noin kolme sekunnin ajan, niin näytölle tulee viimeksi mitattu lämpötila. Tämän muistista haetun lämpötilan merkinä on näytön oikean reunan «M»-kirjain. Lämpötilaa näytetään noin kolme sekuntia ja tämän jälkeen muistissa ollut lukema pyyhkiytyy pois ja kuumemittari on valmis uuteen mittaukseen.

MITTAUSTAVAT

Mittaus suusta (oraalinen)

Aseta kuumemittari toiseen kielen alapuolella olevista taskuista, joko kielen juuren vasemman tai oikean puoleiseen taskuun. Mittausanturin täytyy olla asetettu tiivistä kudosta vasten. Tämän jälkeen tulee sulkea suu ja hengittää tasaisesti nenän kautta, jotta mittausulos ei vääristy sisään tai ulos hengitetyin ilman takia. Likimääräinen mittausaika: 20 sekuntia!

Mittaus peräaukosta (rektaalinen)

Tämä on kaikkein luotettavin mittaus tapa, joka soveltuu erityisesti vauvoille ja pikkulapsille. Työnnä kuumemittarin mittausanturi varovasti peräaukkoon 2 - 3 cm:n syvyyteen. Likimääräinen mittausaika: 10 sekuntia!

Mittaus kainalosta

Luotettavien tulosten saamiseksi suosittelemme lämpötilan mittaamista suusta tai peräaukosta. Likimääräinen mittausaika: 20 - 90 sekuntia!

PUHDISTUS JA DESINFIOINTI

Nimi: isopropyylialkoholi 70 %; pidä upotettuna korkeintaan 24 tuntia.

PARISTON VAIHTO

Kun kuumemittarin paristo tyhjenee, niin näytön oikeaan alakulmaan tulee «▼»-merkki. Korvaa paristo vastaaanlaisella paristolla ja asenna paristo + puoli ylöspäin. Hävitä vanha paristo kohdan «Turvallisuusohjeet» mukaisesti.

FI

SAKERHETSFORESKRIFTER

- Termometern är endast avsedd för att mäta kroppstemperaturen.
- Temperaturmätningen är färdig när termometern signalerar (beep).
- Termometern innehåller smådelar som är farliga om barn skulle svälja dem. Håll alltid termometern utom räckhåll för barn.
- Termometern är inte stötsäker och undvik därför att tappa termometern i golvet eller att utsätta den för slag.
- Undvik att böja toppen mer än 45°!
- Undvik att utsätta termometern för temperaturer över 60 °C. Koka aldrig termometern!
- Använd ett av apoteket rekommenderat desinfektionsmedel vid rengöring. Termometern måste vara intakt när du rengör den.
- Varning!** Termometern innehåller batterier som ska slängas vid därför avsedda stationer.
- Tillverkaren rekommenderar att termometern kontrolleras av auktoriserad person varannat år.

SV

SA HAR ANVANDER DU TERMOMETERN

Tryck på knappen på termometerns topp för att starta apparaten; en kort signal ljuder «termometern är på». En kort signal hörs och indikerar att termometern har satts på, i detta ögonblick testas LCD displayen så att samtliga funktioner kontrolleras. Om rumstemperaturen är under 32 °C, visas «--» och ett blinkande «°C» i displayen. Termometern är nu klar att användas.

ANVÄNDNING

Den uppmätta temperaturen visas i displayen kontinuerligt under temperaturmätningen, bokstaven «°C» blinkar kontinuerligt under hela mätningen. Om signalen ljuder bip-bip-bip 10 gånger och «°C» inte längre blinkar, betyder detta att den mätta ökningen i temperatur nu är mindre än 0,1 °C på 8 sekunder och att termometern är klar att avläsas. För att spara på batteriet, stäng av termometern efter användning genom att trycka lätt på strömbrytaren, annars stängs termometern av automatiskt efter 10 minuter.

EMINNESFUNKTION

När termometern sätts på, pressa ned strömbrytaren i minst 3 sek och den förra uppmätta temperaturen visas i displayen. Ett litet «M» för minne visas samtidigt på högra sidan av displayen. Det senast uppmätta värdet (och «M») försvinner efter ca 3 sek och termometern är därmed klar för att mäta en ny temperatur. Den förra temperaturen i minnet har därmed tagits bort.

MÄTMETODER

I munnen (oralt)

Placera termometern i en av fickorna under tungan, till vänster eller höger om tungroten. Matsensorn skall ligga mot vävnaden. Stäng munnen och andas lugnt genom näsan så att inte mätningen påverkas av in-/utandningsluften. Mättid cirka 20 sekunder.

I anus (rektalt)

Detta är den mest tillförlitliga metoden och passar bäst för spädbarn och mindre barn. Placera matsensorn försiktigt i anus ca 2 till 3 cm in. Mättid cirka 10 sekunder.

I armhålan (axellt)

Vi rekommenderar att temperaturen mäts oralt eller rektalt för att erhålla säkra resultat. Mättid cirka 20 till 90 sekunder.

RENGÖRING OCH DESINFEKTERING

Namn: Isopropylalkohol 70 %; sänk ner i max. 24 timmar.

BATTERIBYTE

När «▼» symbolen visas i displayens nedre högra hörn är batteriet svagt och behöver bytas. Placera ett nytt batteri typ SR41 1,55 V i batterihållaren och försäkra dig att batteriet trycks ned på sin plats, skjut tillbaka batterihållaren ner i termometerhöljet och placera termometerns batterihölje tillbaka på termometern. Beträffande avfallshantering av batterier, se «Säkerhetsanvisningar».

	TEKNINEN ERITTELY	TEKNISKA DATA
Laitetyyppi / Typ:	Maksimilämpömittari	Maximum temp
Mitta-alue / Temperatur spektrum:	32,0 °C ... 43,9 °C Alle 32,0 °C on näytössä «--». Yli 43,9 °C on näytössä «H».	32,0 °C – 42,9 °C temperaturer under 32,0 °C markeras i displayen med «--» (för låg) och temperaturer över 42,9 °C markeras i displayen med «H» (för hög).
Mittaustarkkuus / Tolerans:	± 0,1 °C alueella 34 °C ... 42 °C 18 °C ... 28 °C ympäristölämpötilassa.	± 0,1 °C mellan 34 °C och 42 °C, vid en rumstemperatur mellan 18 °C och 28 °C.
Automaattinen tarkistus / Självtest:	Sisäinen tarkistus 37 °C lämpötilaan, virheilmoitus («ERR») jos virhe on yli 0,1 °C.	Termometern kontrollerar automatiskt testvärdet 37 °C, «ERR» visas i displayen vid en avvikelse på 0,1 °C. Testvärdet visas inte i display
Näyttö / Display:	Kolmen numeron nestekidenäyttö, näyttötarkkuus 0,1 °C.	LCD display med 3 siffror, minsta angivet värde är 0,1 °C.
Äänimerkki / Signal:	Ilmoittaa, että lämpötilan muutos on 8 sekunnin aikana vähemmän kuin 0,1 °C.	När temperaturen ökar med mindre än 0,1 °C per 8 sek avslutas temperaturmätningen och en signal indikerar att den uppmätta temperaturen är klar att avläsas.
Muisti / Minne:	Viimeisimmän mittauksen muisti.	För att lagra det sista värdet.
Säilytyslämpötila / Temperatur vid förvaring:	-10 °C ... +60 °C	10 °C – +60 °C.
Paristo / Batteri:	IEC typ SR41, 1.55 V	IEC typ SR41, 1.55 V
Viitestandardit / Standard:	EN 12470-3: 2000, kliniset lämpömittarit, ASTM standardi	EN 12470-3: 2000, kliniska termometrar, ASTM standard.

TAKUU

Myönämme elinikäisen takuun ostopäivästä. Takuu ei koske virheellisestä käsittelystä aiheutuvia vaurioita. Paristot ja pakkaus eivät myöskään sisälly takuuseen. Muita korvausvaatimuksia ei oteta huomioon. Viallisen laitteen ostotositte on liitettävä mukaan. Pakkaa kuumemittari huolellisesti ja postita se osoitteeseen:

Ostopäivä:


GARANTI

Vi garanterar livslång garanti efter inköpsdatum. Skador som uppstår genom värdslöshet täcks inte av garantin. Batteri och förpackning är inte inkluderade i garantin. Kvitto måste kunna uppvisas vid reklamation. Packa den trasiga termometern väl och skicka den till:

Inköpsdatum:

microlife® Digital Pen-Type Thermometer MT 19F1

PRODUKT BESKRIVELSE
PRODUKT BESKRIVELSE

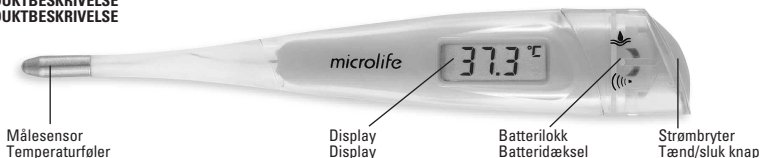

Målesensor
Temperaturføler

Display
Display

Batteriløkk
Batteridæksel

Strømbryter
Tænd/sluk knap

SIKKERHETSFRSKRIFTER

- Termometeret er kun egnet til måling av kroppstemperatur.
- Temperaturmålingen er ferdig når signaltonen piper.
- Termometeret inneholder små deler som kan være farlig for barn.
- Unngå at termometeret faller i gulvet eller får andre slag.
- Unngå å bøye spissen mer enn 45°!
- Unngå temperaturer over 60 °C. **Aldri kok termometeret.**
- Ved rengjøring av termometeret anbefales vanlig desinfeksjonsmiddel som fåes på apoteket eller i faghandelen. NB! Termometeret må være intakt før det dypes i væske.
- Termometeret skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men i en container beregnet for batterier.
- Produsenten anbefaler at termometeret blir etterkontrollert med 2 års mellomrom.

NO

SLIK BRUKER DU TERMOMETERET

For å skru på termometeret trykk knappen på oversiden. Et kort signal indikerer at termometeret er satt på, samtidig testes displayet og alle funksjoner kontrolleres. Hvis romtemperaturen er under 32 °C, vises «--» og en blinkende «°C» i displayet. Termometeret er nå klart til bruk.

NAR TERMOMETERET ER I BRUK

Den oppmålte temperaturen vises kontinuerlig i displayet og bokstaven «°C» blinker under målingen. En signaltone indikerer at temperaturstigningen er mindre enn 0,1 °C per 8 sek. Og «°C» slutter å blinke. Den oppmålte temperaturen er klar for avlesning. Termometeret kobler seg selv ut etter ca. 10 min. Vi anbefaler alikevel at du selv slår av termometeret for å forlenge batteriets levetid.

MINNEFUNKSJON

Hvis du holder strømbryteren inne minst 3 sek i det du slår på termometeret, vises den siste målte temperaturen i displayet. En «M» vises samtidig i høyre del av displayet. Den senest målte temperaturen og «M» forsvinner etter ca. 3 sek., og termometeret er klart for ny måling.

MÅLEMETODER

I munnen (oralt)

Plasser termometeret i en av de hulrommene under tungen, i venstre eller høyre side av tungen bakkant. Målesonden må ha god kontakt med vevet. Lukk munnen og pust jevnt gjennom nesen for å unngå at målingen blir påvirket av luft som suges inn og blåses ut. Omtrentlig måletid: 20 sekunder!

I anus (rektalt)

Dette er den mest pålitelige målemetoden, og den egner seg spesielt for barn og småbarn. Termometerets målesonde føres forsiktig 2 til 3 cm inn i analåpningen. Omtrentlig måletid: 10 sekunder!

I armhulen (aksillært)

For å oppnå mer pålitelige resultater anbefaler vi å måle temperaturen oralt eller rektalt. Omtrentlig måletid: 20 til 90 sekunder!

RENGJØRING

Betegnelse: Isopropylalkohol 70 %; nedsenket: maks. 24 timer.

UTLADET BATTERI

Når «▼» vises i displayets nederste høyre hjørne, må batteriet skiftes ut. Sett et nytt batteri av typen SR41 1,55V i batteriholderen, og forsikre deg om at batteriet er på plass. Skyv batteriholderen på plass og sett på lokket. For anvisninger for deponering av batteri, bes De vennligst lese «Sikkerhetsforskrifter».

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Termometeret er udelukkende beregnet til å måle kroppstemperatur!
- Minimumsbegrensningen for måletiden – indtil signalet [bippet] høres – skal overholdes uden undtagelse!
- Termometeret indeholder små dele (batteri etc.), som små børn kan komme til at sluge. Derfor må termometeret aldrig overlades til børn uden opsig.
- Termometeret skal beskyttes mod slag og stød!
- Man bør undgå at bøje spidsen mere end 45°.
- Den omgivende temperatur bør ikke overskride 60 °C. Termometeret må IKKE koges!
- Der må kun bruges kommercielle desinfektionsmidler, der står i listen i afsnittet «rengjøring og desinfektion» til at rense termometeret. Hvis termometeret sænkes ned i en desinficerende væske, skal det være intakt.
- **Advarsel:** Termometeret indeholder et batteri med lang levetid. Når batteriet skal smides væk, bedes de lokale regler for specialaffald overholdes.
- Producenten anbefaler at lade et autoriseret laboratorium justere målenøjagtigheden hvert andet år.

DA

TERMOMETERET TÆNDES

Under målingen vises den aktuelle temperatur konstant. Symbolet «°C» blinker under hele målingen. Hvis det akustiske signal høres (bip-bip-bip 10 gange) og «°C» ikke blinker længere, betyder det, at den målte temperaturstigning nu ligger på under 0,1 °C i løbet af 8 sekunder og at termometeret kan aflæses. Batteriet holder længere, hvis man slukker for apparatet efter brug ved kort at trykke på betjeningsknappen. Hvis man ikke trykker på knappen, slukkes der automatisk for termometeret efter ca. 10 minutter.

BRUG AF TERMOMETERET

Under målingen vises den aktuelle temperatur konstant. Symbolet «°C» blinker under hele målingen. Hvis det akustiske signal høres (bip-bip-bip 10 gange) og «°C» ikke blinker længere, betyder det, at den målte temperaturstigning nu ligger på under 0,1 °C i løbet af 8 sekunder og at termometeret kan aflæses. Batteriet holder længere, hvis man slukker for apparatet efter brug ved kort at trykke på betjeningsknappen. Hvis man ikke trykker på knappen, slukkes der automatisk for termometeret efter ca. 10 minutter.

SÅDAN GEMMES MÅLERESULTATER I HUKOMMELSEN

Hvis du holder knappen trykket ned i mere end 3 sekunder, når du tænder for termometeret, vises den maksimums-temperatur, der blev målt ved sidste måling. Samtidig vises der et lille «M» for «memory» i højre side af displayet. Efter yderligere 3 sekunder forsvinder denne værdi, og termometeret skifter til den normale målemodus. Derefter slettes den gemte værdi.

MÅLEMETODER

I munnen (oralt)

Placér termometeret i en af de to lommer under tungen, til venstre eller højre for tungeroden. Målesensoren skal være i god kontakt med vevet. Luk din mund og træk vejret jævnt gennem næsen for at undgå, at målingen bliver påvirket af indåndings- eller udåndingsluften. Cirka måletid: 20 sekunder!

I endetarmen (rektalt)

Dette er den mest pålidelige målemetode og er særligt velegnet til børn. Før varsomt målesensoren på termometeret 2 til 3 cm ind i endetarmsåbningen. Cirka måletid: 10 sekunder!

I armhulen

For at opnå mere pålidelige resultater anbefaler vi at måle temperaturen oralt eller rektalt. Cirka måletid: 20 til 90 sekunder!

RENGØRING OG DESINFEKTION

Navn: Isopropyl alkohol 70 %; nedsænkes: max. 24 timer.

OPBRUGT BATTERI

Når symbolet «▼» (trekant der står på spidsen) vises for neden til højre i displayet, er batteriet brugt op og skal skiftes ud. Fjern batteridækslet, udskift batteriet og sæt batteridækslet på plads igen. Batteri af typen SR41 1,55V anbefales. Med hensyn til bortkastning af brugte batterier henvises der til «sikkerhedsinstruktionerne».

	TEKNISKE DATA	TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Type / Type:	Maksimum termometer	Maksimumtermometer
Temperaturspekter / Måleområde:	32,0 °C – 42,9 °C Temp. < 32,0 °C markeres i displayet med «--» (lav) og Temp. > 42,9 °C markeres i displayet med «H» (høy)	32,0 °C til 42,9 °C Temp. < 32,0 °C: display «--» for «low» (for lavt) Temp. > 42,9 °C: display «H» for «high» (for højt)
Toleranse / Målenøjagtighet:	± 0,1 °C mellom 34 °C og 42 °C ved en romtemperatur mellom 18 °C og 28 °C.	± 0,1 °C mellom 34 °C og 42 °C ved en omgivende temperatur på 18 °C til 28 °C
Selvtest / Selvtest:	Termometeret kontrollerer automatisk testverdien for 37 °C. Et avvik > 0,1 °C vises med «ERR» i displayet.	Automatisk intern kontrol med en testværdi på 37 °C; hvis der konstateres en afvigelse på > 0,1 °C, vises der «ERR» (error).
Display / Display:	Liquid crystal display (LCD) med 3 desimaler. 0,1 °C er minste desimal.	Display med flydende krystaller (LCD) med 3 cifre Mindste enhed i displayet: 0,1 °C
Signal / Signaltone:	Signaliserer at termometeret er klart til bruk og at temp.stigning er mindre enn 0,1 °C / 8 sek.	Til at signalisere at termometeret er klart til bruk og at temperaturstigningen er mindre end 0,1 °C i løbet af 8 sekunder.
Minne / Hukommelse:	Sist målte verdi	Til at gemme den sidst målte værdi.
Oppbevaringstemperatur / Oppbevaringstemperatur:	-10 °C til +60 °C	-10 °C til +60 °C
Batteri / Batteri:	IEC typ SR41, 1.55 V	IEC typ SR41, 1.55 V
Standard / Henvisning til normer:	EN 12470-3: 2000, clinical thermometers, ASTM standard	EN 12470-3: 2000, kliniske termometre, ASTM standard

GARANTI

Vi gir en livslang garanti som gjelder fra kjøpsdatoen. Skader forårsaket av feilbruk dekkes ikke av garantien. Batterier og emballasje dekkes heller ikke av garantien. Alle andre erstatningskrav fraskrives. Krav mot garantien må fremsettes sammen med kvittering på kjøp. Send det defekte termometeret godt innpakket sammen med tilstrekkelig porto til:

Kjøpsdato:

GARANTI

Vi girer en livslang garanti efter købsdatoen. Skade forårsaget som følge af upassende håndtering er ikke omfattet af garantien. Batterier og emballage er ligeledes ikke omfattet af garantien. Vi fralægger os ethvert andet ansvar. Et eventuelt erstatningskrav skal indsendes sammen med købskvitteringen. Sørg for, at det defekte termometer er pakket forsvarligt ind og afsendt med tilstrækkelig porto:

Købsdato: